

# Dacapo

## Ampla

Gir støtte til plus-size-pasienter



**NY høyspesifisert skummadrass**

For effektiv trykkavlastning



**Yes, you can.®**

# Plus-size-pasienter står overfor mange utfordringer


Forekomsten av fedme fortsetter å øke hos både voksne og barn verden over. I de fleste EU-landene er over halvparten av de voksne, i følge Eurostat\*, erklært overvektige. Fedme forårsaker en rekke dagligdagse helseutfordringer fra egenomsorg til begrenset mobilitet, og etterlater seg en pasientgruppe med mange uheldige og krevende helseutfordringer.

Viktigheten av tilstrekkelig tilgang på utstyr som hjelper pasienter til å leve mer aktive og selvstendige liv har en direkte innvirkning på både den mentale og fysiske helsen.

Behovet for mer omfattende pleie av plus-size-pasienter øker stadig. Det er derfor viktig å opprettholde et nivå på behandlingstiltakene som er høyt både hva gjelder støtte og komfort slik at pleien oppleves som både verdig og inkluderende.

**Vår nye Dacapo Ampla trykkfordelingsmadrass er det nyeste tilskuddet i vårt utvalg av produkter spesielt utviklet for plus-size-pasienter.**

\* Kilde: [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Main\\_Page](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Main_Page)

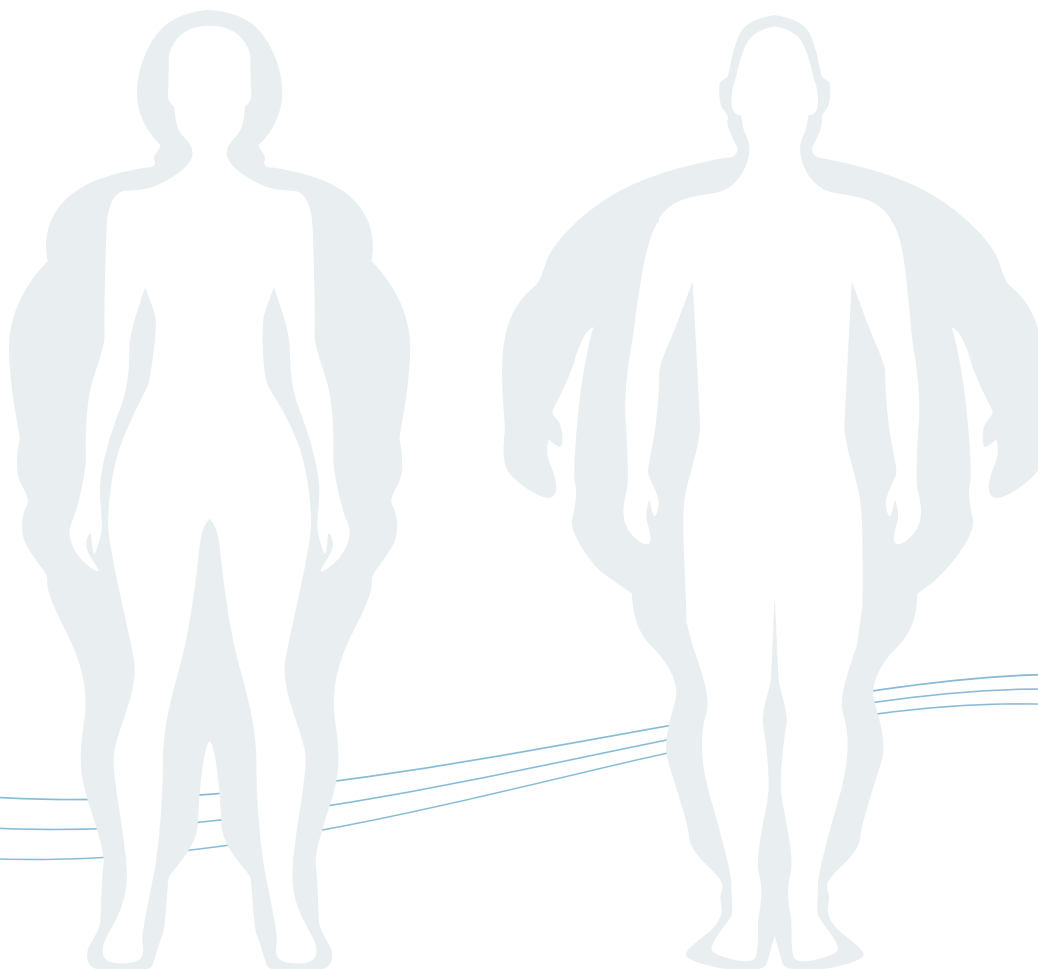

## Designet og utformet for plus-size-pasienter

Vår nye Dacapo Ampla høyspesifikasjonsmadrass gir effektiv trykkfordeling og håndtering av mikroklima for plus-size-pasienter.


Madrassen er designet for å oppnå og oppfylle de høye kliniske kravene som stilles av helsepersonell. Dette inkluderer optimal nedsenking og omhylling samt trykkfordeling og reduksjon av shear og friksjon.

Maksimal komfort i alle posisjoner støtter opp om pasientens repositioneringsplaner samt pleierutiner som hygiene og personlig pleie.



► **Leveres komprimert og rullet** slik at 3 ganger så mange madrasser kan lagres og transporteres for redusert karbonavtrykk

1

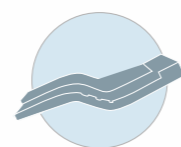

### Klinisk effektiv

Enestående trykkfordelings-egenskaper for effektiv forebygging av trykksår.

2



### Demografisk representativ

Dekker det økende behovet for større, spenstige og klinisk effektive produkter for plus-size-pasienter.

3



### Kvalitets-sikret

Leverer optimal kvalitet. Vår testing inkluderer trykkartlegging, uavhengig holdbarhetstesting, cytotoxicitetstesting, branntesting og akselerert aldring.



► **Høyspesifisert skum** gir god støtte til plus-size-pasienter opp til 350 kg på en trygg og effektiv måte.



► **Flere størrelser** gjør at den kan passe til ulike pleiesenger designet for plus-size-pasienter



► **Pustende, vannavstøtende trekk** for effektiv temperaturregulering og håndtering av mikroklima



► **Glidelås på 3 sider** gjør at trekket enkelt kan tas av ved vask



► **Bærehåndtak** for enkel håndtering





► **Skåret skum** omfordeler trykket, reduserer shear og hjelper til med å håndtere hudens mikroklima

# Trykkfordeling

Dacapo Ampla gir optimal nedsenkning og omhylling av pasienten. Dette gir et lavere vevsgrensesnitt for sårbar hud og reduserer risikoen for å utvikle trykksår.

Resultatene fra trykkartleggingstesten (illustrert til høyre) viser den utmerkede trykkfordelingen til Dacapo Ampla.

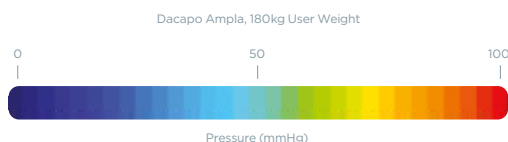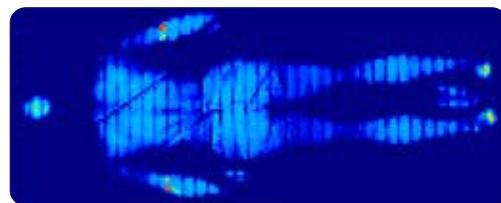


## Tekniske data ▼

For mer informasjon om dette produktet, inkludert brukermanual, se [www.invacare.no](http://www.invacare.no).



Bredde ▼

850, 900, 1030, 1150,  
1200 mm

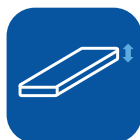

Høyde ▼

150 mm



Lengde ▼

2000, 2050 mm



Vekt ▼

14 kg



Brukervekt ▼

max. 350 kg



Vasketemperatur ▼

95 °C



Garanti ▼

2 years

## Artikkelnummer ▼

60130967	Madrass Dacapo Ampla	85x200x15 Inkotrekk
60130968	Madrass Dacapo Ampla	90x200x15 Inkotrekk
60130970	Madrass Dacapo Ampla	115x200x15 Inkotrekk
60130971	Madrass Dacapo Ampla	120x200x15 Inkotrekk
60130972	Madrass Dacapo Ampla	115x205x15 Inkotrekk

Tlf: 22 57 95 00  
[norway@invacare.com](mailto:norway@invacare.com)  
[www.invacare.no](http://www.invacare.no)

Postadresse:  
Invacare AS  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo

Besøksadresse:  
Invacare AS  
Brynsveien 16  
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:  
Invacare AS  
Østensjøveien 19  
0661 Oslo



Yes, you can.®