

# NordBed Kid

På anbud med NAV



Sikkerhet og god komfort  
for barn i ulike stadier

SIKKER | REGULERBAR | KOMFORTABEL



Yes, you can.®

# NordBed Kid

## En trygg, konfigurert seng som kan tilpasses barnet

Vår nye NordBed Kid er den ideelle sengen, for bruk i hjemmet og på institusjoner

### Tilpasning til det enkelte barns behov

NordBed Kid er designet for barn fra 3-12 år eller 75-154 cm høye. De er tilgjengelig i tre ulike lengder med et utvalg av ulike sidegrinder.

Utvalget sidegrinder består av følgende: doble sammenleggbare dører, senkbare og faste sider, med sprinkler eller pleksiglass i høyde 40 cm eller 80 cm. Se total oversikt lenger ned.

Liggeflaten, med justerbar rygg, lår og benstøtte, er designet etter antropometrisk måling og gir anatomisk støtte og god komfort.

Polster med hygienetrek for ekstra beskyttelse for barnet er også tilgjengelig i en delikat grønn farge.

### Sikkerhet

I utviklingen av NordBed Kid, har sikkerhet vært ekstremt viktig. Fra sikker låsemekanisme, doble sammenleggbare dører, til oppbevaringsboksen for håndkontrollen som sikrer at den er utenfor barnets rekkevidde. NordBed Kid samsvarer med den nye EU-sikkerhetsstandard EN5063: 2017.

### Trygt arbeidsmiljø for pleieren

NordBed Kid er høyde justerbar fra laveste posisjon ved 30cm som tillater barnet selv å forflytte seg, til 80cm som gir en god arbeidshøyde for pleieren. Sentralbremser (valgfritt), senkbare sider med sentrert utløsermekanisme, full elektrisk liggeflate er utviklet for å sikre et trygt og komfortabelt arbeidsmiljø for pleieren.



# Egenskaper NordBed Kid



## Håndkontroll

- ▶ Knappene på håndkontrollen har farger som gjør de lett gjenkjennelige
- ▶ Knapperne kan låses med en medfølgende magnetnøkkel

## Dørlås

- ▶ Doble sammenleggbare dører med en lås på toppen, som er enkel for pleieren å betjene.
- ▶ Designet for å sikre at det ikke er fare for skade på barnet, mens barnet er i sengen.

## Valg av sidegrinder

- ▶ Utvalget av ulike grinder gjør det mulig å tilpasse sengen til barnets behov
- ▶ Utvalget inneholder doble sammenleggbare dører, senkbar side og fast side, med sprinkler eller pleksiglass
- ▶ Høydealternativer i 40 cm og 80 cm



## Justerbar liggeflate

- ▶ Liggeflaten er designet etter antropometrisk måling, for økt støtte og meget god komfort for barnet



## Sikker oppbevaringsboks

- ▶ Håndkontrollen kan enkelt og sikkert låses inne i oppbevaringsboksen, som sikrer at det kun er pleieren som kan styre sengen.

## Høydejusterbar

- ▶ Fra kun 30 cm høyde som tillater enkel forflytning av barnet selv, til 80 cm arbeidshøyde for pleier



## Sikkerhetsstandard EN50637:2017

Designet er i samsvar med de nye EU-sikkerhetsstandardene for senger



## Design

Moderne, hjemmelig design med et lyst og moderne bøk farget treverk



## Utvalg av størrelser

Tilgjengelig i lengdene Small, Medium og Large

# Designet for komfort og sikkerhet

NordBed Kid tilbyr god komfort, samtidig med at den møter den strenge EU-standard

## Sidegrinder

NordBed Kid kan tilpasses med ulike sidegrinder basert på barnets behov. Sidegrindene er designet med økt styrke og stabilitet for å oppfylle kravene til standarden EN50637:2017. Nedenfor vises de ulike alternativene som er tilgjengelige.

### Doble sammenleggbare dører

- ▶ Dørene kan åpnes delvis eller helt for å gi enkel tilgang og samtidig opprettholde sengens stabilitet og sikkerhet for barnet
- ▶ Låsen er designet for å sikre at barnet ikke får påført skader mens barnet er i sengen
- ▶ Siden senkes med én bevegelse for enkel tilgang
- ▶ Enkel å utløse, tillater pleier å forbli foran barnet
- ▶ Gir god sikt igjennom siden

### Fast side

#### Polster

- ▶ Beskyttende polster med hygienetrek kan benyttes på alle sider også ved bruk av senkbar og sammenleggbar grind.

### Sidegrind / Polster

|               | Fast side sprinkel/<br>pleksiglass | Senkbar side sprinkel/<br>pleksiglass | Doble<br>sammenleggbare<br>dører sprinkel/<br>pleksiglass | Polster |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------|
| NordBed Kid S | 80cm                               |                                       | 80cm  | ✓       |
| NordBed Kid M | 40cm/80cm                          | 40cm                                  | 40cm/80cm   | ✓       |
| NordBed Kid L | 40cm/80cm                          | 40cm                                  | 40cm/80cm   | ✓       |



## Tekniske data ▼


Vennligst se [www.invacare.no](http://www.invacare.no) (finne landingsside) for brukermanual samt mer informasjon om produktet.



Innvendig  
bredde  
Utvendig  
bredde ▼




Lengde innside  
Lengde  
utvendig ▼

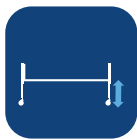


Høydejusterbar  
▼



Liggeflate  
mål ▼

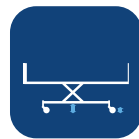

Frihøyde ▼

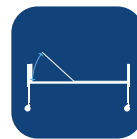

Rygg vinkel ▼

|               |         |           |         |               |      |       |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|------|-------|
| <b>Small</b>  | 90/80cm | 140/146cm | 30-80cm | 62-7-16-48cm  | 15cm | 0-70° |
| <b>Medium</b> | 90/80cm | 160/166cm | 30-80cm | 67-13-18-55cm | 15cm | 0-70° |
| <b>Large</b>  | 90/80cm | 179/185cm | 30-80cm | 78-15-23-57cm | 15cm | 0-70° |



Lår vinkel ▼



Legg vinkel ▼



Maks  
brukervekt ▼



Total vekt (uten  
endegavel) ▼




Tyngste del av  
produktet ▼

|               |       |       |      |      |      |
|---------------|-------|-------|------|------|------|
| <b>Small</b>  | 0-12° | 0-24° | 70kg | 86kg | 33kg |
| <b>Medium</b> | 0-12° | 0-30° | 70kg | 95kg | 40kg |
| <b>Large</b>  | 0-12° | 0-30° | 70kg | 97kg | 42kg |

## Artikkelnummer ▼

| HMS.nr. | Artikkelnummer | Beskrivelse  |
|---------|----------------|--|
| 288476  | 1656403S2      | Artikkelnummeret inneholder Dacapo-madrass i bomull (8 cm tykk), integrerte sentralbrems, dør 80 cm som kan monteres på høyre eller venstre side av sengen. Grindpolstring og inkontinestrekke på madrass kan leveres som tilbehør.<br>Be om tilbud for andre konfigurasjoner. |

## Farger ▼

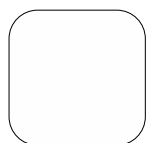

Hvit  
sengeramme  
RAL: 9016



Bøk (treverk)

## Regulatoriske data ▼



Testet av TÜV mot  
Standard EN50637:2017

Merk at fargen kan variere noe fra de vist ovenfor

# DACAPO KID

**Invacares Dacapo skummadrasser** er av høy kvalitet og gir optimal liggekomfort for brukeren. Invacare har i utviklingen av Invacare Dacapo skummadrasser lagt vekt på høy komfort for bruker, enkel rengjøring og håndtering, samt gode arbeidsforhold for pleiepersonalet. I tillegg er det lagt vekt på optimal trykkavlastning med hensyn til å minimere risiko for liggesår og trykksår hos syke brukere og personer med funksjonsnedsettelse.

**Invacare Dacapo Kid** er tilpasset Invacares utvalg av barnesenger, og er en standard skummadrass designet for unge og lette brukere. Madrassen er laget av økologisk miljøskum, lar kroppens konturer synke ned, og gir den sengeliggende brukeren en god og behagelig trykkavlastning. Dacapo Kid kan leveres med både inkontinestrekk og bomullstrekk. Et pustende og elastisk inkontinestrekk er behagelig å ligge på, samtidig som at den hygieniske standarden er høy. Glidelås på madrassens tre sider bidrar også til enkel håndtering, eksempelvis når trekket skal av og på ved vask.




#### Smarte egenskaper:


- ▶ Væskebestandig trekk som er toveis strekkbart i tillegg til å være pustende og skånsomt mot huden. Dette bidrar til å redusere skyv- og friksjonskrefter samt mikroklima.
- ▶ Trekket kan vaskes i maskin på opptil 95°C.
- ▶ Pustende polyuretantrekk.
- ▶ Glidelås som bidrar til enkel håndtering ved skift av trekk. Glidelåsen er dekket av dryppkant som sikrer god hygiene, enkel rengjøring og lang levetid for madrassen.



Invacare Dacapo Kid er tilpasset Invacares utvalg av barnesenger, og passer derfor til NordBed Kid.

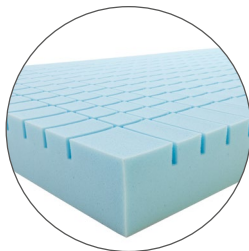

Madrassen gir den sengeliggende brukeren en god og behagelig trykkavlastning.

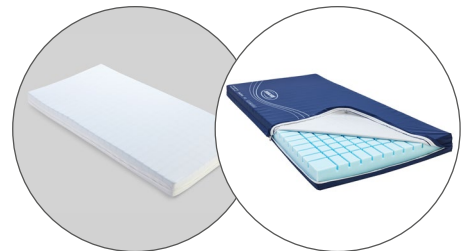

Dacapo Kid kan leveres med både bomullstrekk og inkontinestrekk

## Tekniske data ▼



Bredde ▼

60, 70, 80 cm



Lengde ▼

140, 160, 180 cm



Høyde ▼

8 cm



Maks brukervekt ▼

100 kg



Total vekt ▼

3 kg



Maks. temperatur vask ▼

95°



Trekk ▼

Mørkeblå

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.



Tlf: 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Invacare AS  
Brynsveien 16  
0667 Oslo