

NordBed Ultra



ERGOMOVE™ TEKNOLOGI | SIKKERHET | SELVSTENDIGHET



Innovative NordBed Ultra

Pasienter med særlige behov og som er avhengige av hjelp, trenger produkter som enkelt kan tilpasses deres behov. Dette gjelder spesielt personer med demens. **NordBed Ultra** er et utmerket valg grunnet de mange tilpasningsmulighetene som sengen tilbyr. Den har et gjenkjennelig estetisk design, som er ideelt for å gi pasienten følelsen av å være hjemme. Ved hjelp av automatisk tilpasning av liggeflaten, reduseres risikoen for forskyvning i sengen når pasienten skal endre stilling.

ErgoMove-teknologi

Invacare **NordBed Ultra** har **ErgoMove-teknologi** som gir pasienten aktiv sittestilling med rygglenstilbakeføring ved hjelp av et tastetrykk. I aktiv sittestilling kan pasienten enkelt spise, drikke og lese, samtidig som trykkfordelingen opprettholdes.

Løftemotorene bidrar til en naturlig bevegelse av liggeflaten i samspill med kroppens fasong. Den automatiske liggeflatereguleringen, sikrer at pasienten forblir i den samme stillingen og reduserer friksjon og forskyvning. Dette reduserer behovet betraktelig for pleierassistanse ved forflytning i sengen.



Sikkerhet, selvstendighet og bevegelighet

Laveste høyde på bare 25 cm:

- ▶ Øker sikkerheten og minsker risikoen for pasienter som er utsatte for fall
- ▶ Forebygger fallskader for ekstra utsatte pasientgrupper, som pasienter med demens, uten bruk av sidegrinder
- ▶ Lettere for pasienten å stige inn og ut av sengen

Sidegrinder og støttehåntak til ulike behov:

Delte og heldekkende sidegrinder

- ▶ For å sikre at pasienten ikke faller ut av sengen
- ▶ For enklere forflytning eller vending i sengen

Ut- og innstigningshjelp

- ▶ Støtte ved inn- og utstigning av sengen

Up-and-Out™

- ▶ For en trygg og smidig forflytning, samt økt selvstendighet og bevegelighet, er pasientene i stand til å manøvrere **Up-and-Out**-funksjonen kun ved hjelp av et tastetrykk. Ved hjelp av innstillingene vil liggeflaten automatisk justeres til en passende posisjon for å forenkle inn- og utstigning av sengen, i tillegg til å forebygge friksjon og forskyvning.



4

UNIKE EGENSKAPER

1

ErgoMove-teknologi

- ▶ Pasienten repositioneres komfortabelt til en aktiv sittestilling og senkes ned igjen til en behagelig liggstilling, uten å skli i sengen og uten behov for forflytning.
- ▶ Reduserer skyv og friksjon

2

Up-and-Out

- ▶ Sikrer en trygg og smidig forflytning samt økt selvstendighet



3

25 cm liggeflatehøyde

- ▶ Ved bruk av 100mm hjul blir sengens liggeflate kun 25cm, som gir en sikrere forflytning og økt forebygging mot fallskader.

4

Optimalisert madrass understøttelse

- ▶ Optimalisert etter måling av kroppssammensetningen, som gir økt komfort og god madrassunderstøttelse

Øvrige egenskaper

- ▶ **RememberMe™:**
 - Programmerbar håndkontroll med LCD-skjerm
 - **ErgoMove** og **Up-and-Out** kan tilpasses den enkelte pasienten
- ▶ **Integrert liggeflateforlenger**
 - Forlengbar med opp til 10 cm ved hode- og fotenden, 20 cm tilsammen
- ▶ **Anti-Trendelenburg og Trendelenburg-funksjon**
 - Anti-Trendelenburg gir økt komfort for pasient ved god redistribusjon av trykket i aktiv posisjon
 - Trendelenburg kan benyttes ved medisinsk behandling og sikre god pleie ved akutte situasjoner
- ▶ **Under-bed-light**
 - Lyset kan enkelt slås av og på med håndkontrollen
 - Forebygger mot fall og uhell
 - Et Out-of-bed-light kan også slå seg på automatisk ved utstigning



Håndkontroll ▲

Lette gjenkjennelige farger for svaksynte pasienter

- ▶ De oftest brukte knappene har lett gjenkjennelige farger, som er nøye valgt ut av eksperter, for enkelt å skille mellom funksjonene.
- ▶ Hver enkelt knapp lyser når den blir trykket på, for å hjelpe pasienten både på dagtid og kveldstid.
- ▶ Hovedknappene er plassert øverst på håndkontrollen for enkel manøvrering. Øvrig justering gjøres enkelt med de andre knappene.
- ▶ Håndkontrollen er låsbar som standard.


Tekniske data ▼

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.

	Bredde utvendig Madrasbredde ▼	Lengde utvendig Madraslengde innvendig ▼	Høyderegulerbar med 100mm hjul ▼	Inndeling liggeflate ▼	Frihøyde med 100mm hjul ▼	Lårvinkel ▼
NordBed Ultra	100 / 90 cm	213 / 200 cm	25 - 85 cm	80-17-30-65 cm	15°	49°
	Leggvinkel ▼	Anti-Trendelenburg / Trendelenburg ▼	Maks. brukervekt ▼	Vekt (uten gavel og grinder) ▼	Sengens tyngste del ▼	Maskinvaskbar ▼
NordBed Ultra	19°	+/- 15°	200 kg / SWL 235 kg	105 kg	55 kg	Ja

NB: Sengen må ikke benyttes av pasienter under 12 år, eller med kroppsstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Rammefarge ▼

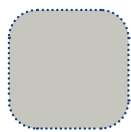

Aluminiumsgrå

Treverk ▼



Bøk



Eik



Umbrå



Bøk/lyseblå



Lyseblå



Hvit

Artikkeloversikt

Art. nr.	Produktbeskrivelse	Materiale	Madrassmål (cm)
1649885_S3	NordBed med hel sengegrind, Nora endegavl og Freya sidegrind.	Bøk	90x200
1649885_S4	NordBed med hel sengegrind, Nora endegavl og Freya sidegrind.	Umbrå	90x200
1649885_S5	NordBed med hel sengegrind, Nora endegavl og Freya sidegrind.	Hvit	90x200

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Grensesvingen 9
0661 Oslo



Yes, you can.®