



AQUATEC®

Ocean Ergo

Et avansert sortiment med dusj- og toalettstoler



Optimale løsninger for personlig pleie

Ergonomisk, allsidig og enkel å manøvrere



Yes, you can.®

Ergonomiske forbedringer og **enda flere tilpasningsmuligheter**

Vårt nyeste Aquatec Ocean Ergo-sortiment er spesielt designet for å gi støtte og hjelp ved forflytning og stell på baderommet.

Aquatec Ocean Ergo-serien byr på et bredt og fleksibelt utvalg av dusj- og toalettstoler som gir personlige pleieløsninger ved et bredt spekter av behov. Serien inkluderer alt fra standard-modeller og modeller med drivhjul, til mer avanserte modeller med tilt-in-space-funksjon.

Alle produktene er utviklet og designet i samarbeid med ledende terapeuter, der brukerens livsstil og velvære, og god ergonomi, er våre klare hovedmål.

Tilt-in-space-modeller gir ekstra støtte i sitteposisjoner.

Både Ocean Ergo VIP og Ocean Ergo Dual VIP har en setevinkel på 5° til 40° med en integrert vektshiftmekanisme som sikrer optimal stabilitet. Ocean Ergo Dual VIP er dessuten multifunksjonell da den både har setetilt og justerbar rygg. Setet og ryggstøtten kan dermed vinkles og åpnes opp mellom 5° og 35° i en enkel og jevn bevegelse på grunn av den lette rammen.

Den smidige og behagelige tilt-in-space-funksjonen bidrar til enklere forflytning, posisjonering og stell. Når sitteenheten tiltes bakover, skyves tyngretpunktet fremover, slik at stolen alltid vil være stødig, sikker og ta lite plass i rommet. Tiltet er jevn og enkel å kontrollere for hjelper, og det oppleves svært trygt for både bruker og hjelper.


Alle modellene i den nye Ocean Ergo-serien er optimalisert med nytt design for å oppnå økt sikkerhet, komfort og støtte. Enten den personlige pleieløsningen er selvstendig eller utføres ved hjelp av en pleier, er alle våre Ocean Ergo-stoler et sikkert, komfortabelt og verdig valg.



NYE egenskaper

Forbedret armlen

- > Nye armlen gir økt støtte og komfort for brukeren. De nye og valgfrie armlenputene gir brukere en mykere overflate og hvilestilling. Armlenet har også en brukervennlig og valgfri integrert sikkerhetslås som tilbehør.

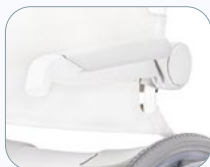

Redusert setehøyde

- > Rammen kan senkes ekstra lavt for å imøtekomme ulike høydebehov og for å fremme trygge og selvstendige forflytninger.



Tilt-stopp-funksjon

- > En valgfri funksjon som er enkel å montere og som forhindrer at rammen tilter forover forbi 0°. Dette sikrer at rammen forblir horisontal i forhold til bakken og er et hjelpemiddel for de som blir heist inn/ut av stolen.



Ergonomisk nakkestøtteholder

- > Med flere aksejusteringer gir den ergonomiske nakkestøtteholderen svært god postural støtte for hode-/nakkeregionen. Justeringer gjøres raskt og enkelt ved å enkelt rotere de integrerte håndskruene for å oppnå riktig posisjon for den individuelle brukeren.





Innovativ ergonomisk seteplate

- > Konturformet design oppmuntrer til en mer oppreist sittestilling for økt uavhengighet og komfort.
- > Designet etter avtrykk etterlatt av bruker.
- > En 5° setetilt løfter knærne i en naturlig knebøystilling ved toalettbesøk
- > Forflytningshjelpemidler i front tillater brukeren å posisjonere seg selv inn i en behagelig posisjon.



Svært konfigurierbar

- > Tilgjengelig med et bredt utvalg av posisjonerings-, toalett- og setetilbehør, som kan brukes til å støtte et bredt spekter av tilstander og posisjoneringsbehov.



Meget stabil

- > Økt stabilitet med ramme i rustfritt stål for ekstra sikkerhet og trygghet.



Enkel å håndtere

- > Gir et lite fotavtrykk og en optimalisert hjulbase gjør det lettere å manøvrere i små rom.
- > Enkel demontering for transport og lagring.

Vi presenterer vår nyeste **Ocean Ergo-serie**

Oppdag hele serien nedenfor, inkludert valgfritt tilbehør til individuelle behov.

På anbud
med NAV

På anbud
med NAV

Ocean Ergo

En standard pleierdrevet modell

Art. nr.: 1643741

HMS-nr.: 269542

Inkluderer myksete, bekkenholder og bekken

Ocean Ergo XL

En standard bariatrisk pleierdrevet modell med maksimal brukervekt på 180 kg

Art.nr.: 1643742

Ocean Ergo 24"

Standard modell for brukerdrevet kjøring

Art. nr.: 1650146

HMS-nr.: 297749

Inkluderer myksete, bekkenholder og bekken

På anbud
med NAV



Ocean Ergo 24" XL

En standard bariatrisk modell for brukerdrevet kjøring med maksimal brukervekt på 180 kg

Art. nr: 1640484

Ocean Ergo VIP

Stol med manuell setetilt designet for brukere som har behov for litt mer assistanse med posisjonering når de sitter i stolen. **OBS: Merk at bildet viser stolen uten myksete.**

Art. nr.: 1643743

HMS-nr.: 269836

Inkluderer myksete, bekkenholder og bekken

Ocean Ergo Dual VIP

Stol med manuell setetilt og ryggregulering designet for brukere som har et større behov for assistanse med posisjonering når de sitter i stolen

Art. nr.: 1644843

Tekniske data



Setebredde ▼



Setedybde ▼



Total bredde ▼



Total dybde ▼



Bredde mellom
armen ▼

	Setebredde ▼	Setedybde ▼	Total bredde ▼	Total dybde ▼	Bredde mellom armen ▼
Ocean Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	905 mm	475 mm
Ocean Ergo XL	480 mm	480 mm	645 mm	905 mm	555 mm
Ocean Ergo 24"	480 mm	480 mm	670 mm	1050 mm	475 mm
Ocean Ergo 24" XL	480 mm	480 mm	670 mm	1050 mm	555 mm
Ocean Ergo VIP	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm
Ocean Ergo Dual VIP	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm



Setehøyde ▼



Tilt setevinkel ▼



Tilt ryggvinkel ▼



Vekt ▼



Maks.
brukervekt ▼

	Setehøyde ▼	Tilt setevinkel ▼	Tilt ryggvinkel ▼	Vekt ▼	Maks. brukervekt ▼
Ocean Ergo	440 - 600 mm	-	-	17 kg	150 kg
Ocean Ergo XL	440 - 600 mm	-	-	18 kg	180 kg
Ocean Ergo 24"	440 - 600 mm	-	-	23 kg	150 kg
Ocean Ergo 24" XL	475 - 600 mm	-	-	24 kg	180 kg
Ocean Ergo VIP	475 - 600 mm	-5° - 40°	-	23.5 kg	150 kg
Ocean Ergo Dual VIP	475 - 600 mm	-5° - 40°	5° - 35°	28.3 kg	150 kg

For mer informasjon, brukermanualer og
tilbehørsbrosjyre, se www.invacare.no



Hvit

Rammefarge

Telefon: +47 22 57 95 00
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo