

# SB<sup>®</sup> 755

Når trygghet kommer først



**Et optimalt hjelpemiddel**

for ulike brukerbehov



**Yes, you can.®**

# Støtte og komfort i alle hvilestillinger

Ved å kombinere komfort, enkel håndtering og sikkerhet, er SB 755 pleieseng svært godt egnet i alle hjemmepleie- og langtidspleiemiljøer.

SB 755 gir optimal komfort med en ideell sittestilling som igjen minimerer shear og friksjon. Sengen kan enkelt justeres av pleiepersonalet for å møte brukerens individuelle behov.

Med en uttrekkbar hode- og fotende er

SB 755 også godt egnet for høyere brukere, som vil gi økt komfort for bruker og gi bedre arbeidsforhold for pleiepersonalet.

Ved å velge en seng som er spesialtilpasset for å tåle rengjøring i vaskemaskin, er SB 755 nå enda enklere å vedlikeholde.

## Enkel å lagre og transportere

Montering og demontering av SB 755 er gjort enkelt for å lette transport og oppbevaring. Ved å plassere sengen på basen kan den enkelt trilles fra kjøretøyet til soverommet. Montering kan utføres raskt og enkelt av én person. Ingen deler av sengen veier mer enn 25 kg og en spesialsaks for demontering er tilgjengelig som ekstrautstyr.



## Sikker og kvalitetssikret

SB 755 er kompatibel med Sikkerhetsstandard IEC 60601-2-52-kompatibel. Dette gjør SB 755 til et pålitelig og sikkert valg, som sikrer optimal kvalitet og høye sikkerhetsstandarder.




## 1 Automatisk tilbakeføring av ryggen

Høy brukerkomfort ved aktivering av ryggstøtte, som minimerer shear og friksjon



## 2 Økt komfort

Optimalisert liggeflate for økt komfort

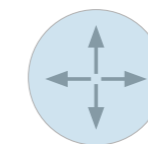

## 3 Forlengbar madrassflate

Kan utvides med opptil 10 cm i både hode- og fotende, totalt 20 cm. Dette gjør at sengen enkelt kan tilpasses brukerens individuelle behov.



> **Madrasstøtte**  
med mulighet for valg av lameller i tre eller aluminium.

> **Sidegrinder**  
Velg mellom 3 ulike alternativer som varierer i lengde, høyde og uttrykk. Full lengde - Britt V eller Line 3/4 Lengde - Scala

> **Endegavler**  
Tilgjengelig i en rekke ulike design og utførelser.

> **Håndkontroll**  
Tilgjengelig som ikke-låsbar (standard), låsbar eller som Soft-kontroll.

## Endegavler

> **Olivia** Kan brukes i kombinasjon med frontpanel i tre. Tilgjengelig i bøk.

> **Victoria** Avtakbart panel. Tilgjengelig i bøk, lys eik og hvitpigmentert bøk.

> **Sophie** Finnes i bøk, lys eik og hvitpigmentert bøk.

> **Emma** Avtagbar - Tilgjengelig i bøk, lys eik og hvitpigmentert bøk.


> **Susanne** Finnes i bøk, hvitpigmentert bøk og lys eik.

> **Anita** Finnes i bøk og lys eik.

Ulike valgmuligheter:



Design i tre:  
Finnes i bøk, hvitpigmentert bøk eller lys eik.

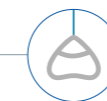

Løftestang med høyde- og dybdejusterbart håndtak



Håndtak for å støtte brukeren ved reposisjonering og ved forflytning inn og ut av sengen.



Velg mellom 100 mm eller 125 mm hjul.



Lengre sidegrind for å passe til utvidet seng

# SB® 755 Wide

## Høyere, bredere, større...

Vår populære SB 755 er tilgjengelig i bredere varianter på 1050 mm og 1200 mm som i tillegg kan forlenges i begge ender. Dette gir igjen økt komfort og velvære for høyere og større brukere.

Disse bredere modellene gir ekstra plass og komfort for større brukere, med god plass til å snu seg i sengen. SB 755 Wide er designet og konstruert med et forbedret system for tilbakeføring av ryggen for å tilby optimal komfort. Sengen gir også en optimal sittestilling

for bruker og er designet for å redusere shear og friksjon. SB 755 Wide er en moderne og stilren seng med et strømlinjeformet design som er enkel å rengjøre og vil passe godt inn i ethvert hjemmepleie- eller langtidspleiemiljø.



## Tilbehør

Under finner du et utvalg av vårt tilgjengelige tilbehør



### > Olivia endegavl

Kan brukes sammen med kosmetisk langside og **Scala 2** sidegrind. Leveres kun i lys eik.



### > Victoria endegavl

Avtagbart panel – tilgjengelig i bøk, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrinder.



### > Sophie endegavl

Tilgjengelig i bøk, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrinder.



### > Emma endegavl

Tilgjengelig i bøk, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Scala 2** sidegrinder.



### > Susanne endegavl

Tilgjengelig i bøk, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrinder.



### > Anita endegavl

Tilgjengelig i bøk, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrinder.




### > Britt V sidegrind

Integrert sidegrind i bøk, hvitpigmentert bøk og lys eik. Leveres i faste lengder på 200, 210 og 220 cm.



### > Line/Line teleskopisk sidegrind

Integrert sidegrind i aluminium. Leveres i bøk og hvitpigmentert bøk. Leveres i lengde 200 cm (**Line**) og 200–220 cm (**Line teleskopisk**).

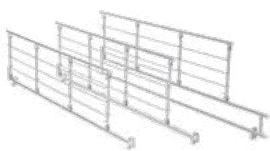

### > Scala 2 sidegrinder

Nedfellbare sidegrinder i metall. Leveres i 3 høyder som passer med madrasshøydene 15, 20 og 25 cm.



### > Sidegrind-forhøyer

Til sidegrind Line samt Britt III/V. Monterbar forhøyningsribbe som øker høyden med 150 mm, noe som innebærer en maks madrasshøyde for Britt sidegrind 270–300 mm, samt for Line sidegrind 320–340 mm.



### > Polstret trekk til sidegrind Line og Britt V

Polstret trekk som kan sitte på samtidig som man hever/ senker sidegrinden. Fåes som normalpolstret og dobbeltpolstret i lengdene 2000/2100/2200 mm. Vaskbart på 90 grader. Farge blå.



### > Støttehåndtak

Støttehåndtak som kan brukes til vending i seng eller til inn-/ utstigning av seng. Kan benyttes sammen med sidegrinder.



### > Flere håndkontroller

*Invacare Soft Control* eller standard håndkontroll, begge med "grønn knapp"-funksjon



### > Løftebøyle

Håndtaket kan justeres i høyde og dybde.



### > Utsvingbart støtte- og vendehandtak

Håndtaket gir god støtte for brukeren ved inn- og utstigning av sengen.



### > Sengetralle Bjørn

For lagring og transport av 850–1200 brede senger.

\* Gjør at man kan aktivere to motorer samtidig, (lår- og ryggmotor) slik at pasienten kommer opp i sitteposisjon uten å gli ned i sengen.


## Tekniske spesifikasjoner ▼




Utvendig bredde,  
innvendig bredde ▼



Utvendig lengde,  
innvendig lengde ▼

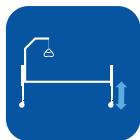

Høydejustering ▼

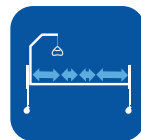

Madrassstøttemål ▼

SB 755	950/850 mm 1000/900 mm
SB 755 Wide 1050 mm	1150 mm 1050 mm
SB 755 Wide 1200 mm	1300 mm 1200 mm

2130 mm 2070 mm Madrass: 2000mm
---------------------------------------

350 - 820 mm Total høyde: 1600 - 2070 mm
--

800 - 260 - 260 - 680 mm
-----------------------------



Klaring under sengen ▼

150 mm



Ryggvinkel ▼

0 - 73°



Lårvinkel ▼

0 - 28°



Benstøttevinkel ▼

0 - 18°



Benstøtteløft ▼

0 - 18°



Vinkel under/  
over ramme ▼

Under: 25°  
Over: 14°



Maksimal  
brukervekt ▼

SWL 235 kg  
200 kg



Tyngste del av  
produktet ▼

SB 755: 25 kg
SB 755 Wide 1050 mm: 40 kg
SB 755 Wide 1200 mm: 44 kg



For mer informasjon om produktene og produktenes brukermanual, vennligst se [www.invacare.no](http://www.invacare.no).



Samsvarer med sikkerhetsstandarden,  
IEC 60601-2-52.

NB: Sengen må ikke brukes av brukere under 12 år,  
eller av brukere med kroppsstørrelse tilsvarende en  
gjennomsnittlig 12 år gammel person eller mindre.

Vær oppmerksom på at fargene kan variere noe fra det som er vist på bildene ovenfor.

Lys grå

Bøk

Lys eik

Hvitpig-  
mentert  
bøk

## Artikkelnummer ▼

Artikkelnummer ▼	Beskrivelse ▼	Størrelse ▼	Materiale ▼	Produktbeskrivelse ▼
3000755_4203NC1_1	SB755AL 90x200 Hvitpig bøk 125 mm hjul	90 x 200 cm	Hvitpigmentert bøk	Endegavler Susanne, sidegrinder BrittV
3000755_4203NC1_2	SB755AL 90x220 Hvitpig bøk 125 mm hjul	90 x 220 cm	Hvitpigmentert bøk	Endegavler Susanne, sidegrinder BrittV
3000755_4203NC1_2	SB755AL 90x200 Eik 125 mm hjul	90 x 200 cm	Eik	Endegavler Susanne, sidegrinder BrittV
3000755_4203NC1_4	SB755AL 90x220 Eik 125 mm hjul	90 x 220 cm	Eik	Endegavler Susanne, sidegrinder BrittV
3000755_3203NC1_3	SB755AL 85x200 Bøk 125 mm hjul	85 x 200 cm	Bøk	Endegavler Susanne, sidegrinder BrittV
3000755_5503NC1_1	SB755AL 120x200 Bøk 125 mm hjul	120 x 200 cm	Bøk	Endegavler Susanne, sidegrinder BrittV

Tlf: 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Postadresse:  
Invacare AS  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo

Besøksadresse:  
Invacare AS  
Brynsveien 16  
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:  
Invacare AS  
Østensjøveien 19  
0661 Oslo

