



scalacombi®



# Scalacombi S46 trappeklatrer

Det mobile og praktiske hjælpemiddelet for enkel og sikker trappegang.

NYHET







# Scalacombi S46 trappeklatrere er det riktige valget for deg hvis:

- ✓ Du trenger hjelp til å komme deg opp og ned trappe-  
ne i eget hjem
- ✓ Sikkerhet, ergonomi og komfort skal være i høysetet  
- både for bruker og ledsager
- ✓ Du er ute etter en løsning som ikke krever strukturelle  
endringer i hjemmet
- ✓ Brukervennlighet er viktig for deg

## Du har kontrollen

Når sykdom, skade eller kroppens generelle aldring går utover mobiliteten, kan det å bruke trapper bli et stort og krevende hinder i hverdagen. Problemer med å komme seg opp og ned trapper kan føre til at hele etasjer i huset blir stående ubrukt, og man blir i verste fall tvunget til å flytte fra eget hjem. I tillegg kan situasjonen oppleves krevende og belastende for pårørende. Fastmonterte trappeheiser krever ofte kompliserte og kostbare ombygginger, og er ikke alltid egnet for alle typer trapper og hjem.

Takket være Scalacombi S46 trappeklatrere kan disse utfordringene løses på en enkel måte. Scalacombi S46 krever ingen strukturelle endringer i huset, og trappeklatreren kan brukes i alle typer trapper.

Både personen som er rammet og deres pårørende vil dra like stor nytte av dette innovative hjelpemiddelet. Scalacombi S46 trappeklatrere bidrar ved hjelp av sin utforming og teknologi til frihet, uavhengig og fleksibilitet for begge parter – som gjør det mulig å fortsatt utføre livets mange daglige gjøremål.





# Å kunne bo hjemme

## SIKKERHET

### Pålitelig og smart

Brukervennlighet og sikker bruk er nøkkelegenskaper ved Scalacombi S46 trappeklatrere. Med sin velutprøvde, men likevel enkle teknologi, bidrar Scalacombi S46 til tillit og trygghet, både hos bruker og ledsager. Scalacombi S46 er både intuitiv og enkel å komme i gang med, noe som gjør at du umiddelbart vil erfare de gode effektene av å kunne bruke en slik trappeklatrere i eget hjem - eller på besøk.

Takket være automatisk vinkelovervåking og en rekke andre smarte funksjoner er sikkerheten ivaretatt i alle typer trapper.

- ✓ **Stabilitet:** Solid fotbrett og armlener
- ✓ **Betjening:** Intuitivt og brukervennlig display
- ✓ **Allsidighet:** Ulike smarte kjøremoduser, med start-sperre og nødstoppbryter
- ✓ **Sikkerhet:** Sikkerhet har høyeste prioritet ved bruk og betjening av Scalacombi S46 trappeklatrere. De integrerte sensorene samler inn og behandler all nødvendig informasjon for en trygg og komfortabel opp- og nedstigning. Det dynamiske, myke trinnet er en av de viktigste funksjonene ved Scalacombi S46. Trappeklatreren reduserer automatisk hastigheten før kontakt med hvert trinn. De integrerte sensorene måler trinnhøyden, og muliggjør en optimalt tilpasset og skånsom klatreprosess - opp og ned.



Sikkerhetsbremsen stopper automatisk og pålitelig opp før kanten av hvert trappetrinn

## MOBILITET

### Allsidig og fleksibel

Scalacombi S46 trappeklatrere er egnet for alle typer trapper og kan skreddersys både brukers og ledsagers individuelle behov.

Scalacombi S46 er utstyrt med et praktisk hindermodus, for enkel forsering av dørkarmer, tepper og andre hindringer på vei mot trappen.

Trappeklatreren leveres med oppfellbart fotbrett og avtagbare, inn- og utsvingbare armlener for enklere lagring og transport.

- ✓ **Installasjon:** Scalacombi S46 er klar til bruk i de fleste trapper, uten behov for modifikasjoner
- ✓ **Sammenleggbare:** Scalacombi S46 er sammenleggbare og er svært enkel å oppbevare, demontere og transportere

Scalacombi S46 er enkel å oppbevare og demontere for transport

## KOMFORT

### Komfortabel og elegant

Under utviklingen av vår nye Scalacombi S46 trappeklatrere ble brukervennlighet og komfort for brukeren gitt absolutt høyeste prioritet. Det brede, stabile setet er polstret med et mykt, men støttende, materiale for optimal komfort. Det dynamiske, myke trinnet muliggjør en jevn og sømløs forsering av trappetrinnene - både opp og ned.

Scalacombi S46 vil passe godt inn i hjemmet. Det moderne og minimalistiske designet skaper et helhetlig utseende, som oser av høy kvalitet.

- ✓ **Komfortabel:** Glir smidig og sømløst over hvert trappetrinn, takket være soft-step-elektronikk
- ✓ **Høy kvalitet:** Scalacombi S46 er i likhet med våre øvrige Alber-produkter produsert i Tyskland, i henhold til de høyeste standarder.
- ✓ **Utseende:** Attraktivt og elegant design








## Utmerket på alle overflater


Trapper er ikke bare forskjellige i oppbygning og type, men også i materiale og design, avhengig av formål og plassering.

Scalacombi S46 håndterer nesten alle materialer og underlag, enten trappen er laget av tre, stein eller metall, eller om den er dekket av et teppe. Dekkene til Scalacombi S46, som er laget av et svært slitesterkt materiale, gir tilstrekkelig grep og stabilitet på alle vanlige overflater, noe som gir ledsager selvillit og trygghet under bruk. Scalacombi S46 er også skånsom mot trappebelegg, selv etter intensiv bruk.


Stein og fliser

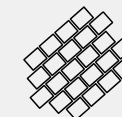


Teppe

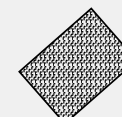


Tre og laminat

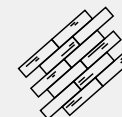

Gitter og metalloverflater

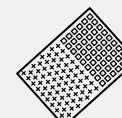

Glass og plastikk

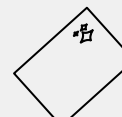


**i** Alle tørre overflater kan enkelt forseres i manuell modus.

### TRAPPER


## Tar trappene på alvor. Og gjør livet litt enklere.

I motsetning til trappeheiser krever Scalacombi S46 ingen strukturelle endringer i hjemmet ditt. Dette sparer tid, gir trygghet og gir en rask og fleksibel løsning. Scalacombi S46 er kompatibel med nesten alle typer trapper, inkludert smale, bratte eller spiraltrapper.


Takket være det kompakte og sammenleggbare designet, er trappeklatreren også ideell for reiser. Dermed kan du enkelt komme deg opp og ned trappene - både i og utenfor hjemmet ditt.

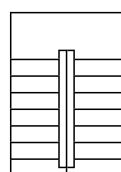


Trinnhøyde  
opptil 20 cm

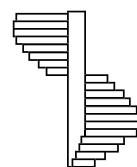

Spiral-  
trapper

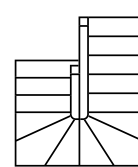

Smale og  
buede trapper

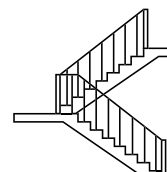

Utvendige  
trapper med  
rekkverk

Ingen renovering  
eller ombygging er  
nødvendig - uavhengig  
av trappetype





# To ulike modeller

ULIKE MODELLER

## scalacombi® med integrert sete

Scalacombi S46 er ideell for personer som trenger hjelp i trapper, men som ikke er avhengig av rullestol i hverdagen. Trappeklatreren har et komfortabelt, integrert sete, fotstøtte og armlener, og kan enkelt foldes sammen og stues bort for å spare plass.

**Scalacombi S46 er på avtale med NAV.**



PÅ AVTALE  
MED NAV

Rangert som nummer 1  
i delkontrakt 17

## scalamobil® Kobles til rullestolen

Scalamobil S45 kan kobles til nesten alle typer rullestoler, og gjøres raskt og enkelt, uten behov for verktøy. Dette gjør at rullestolbrukeren kan bli sittende i rullestolen når man ønsker å komme seg opp og/eller ned trappene. Denne modellen er ikke på avtale med NAV.

**Artikkelnummer: 1595225**



**i** scalamobil kan også kombineres med komfortrullestoler eller spesielt smale rullestoler.

Inkluderte komponenter



**Batteripakke**

Den sterke og kraftige batteripakken kan håndtere opptil 300 trappetrinn.


**Artikkelnummer: 1595179**



**Lader**

Smart automatisk lader som skrur seg automatisk av når batteriet er fulladet.

**Artikkelnummer: 1519809**

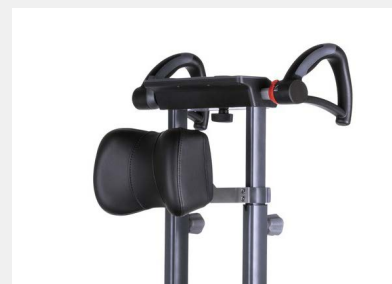

**Nakkestøtte**

Nakkestøtte med myk polstring som gir sikker støtte og stabilitet for hode og nakke. Høyde-, dybde- og vinkelregulbar. Festes enkelt ved hjelp av klipsfunksjon.

**Artikkelnummer: 1520736**

DISPLAY

# Ergonomisk og intuitiv

Smart betjeningspanel for økt sikkerhet og komfort.

Vinkelassistenten indikerer om Scalacombi S46 er i riktig posisjon



Nødstop

Kjørebryter  
Opp/ned



**Hindermodus:**

Smart funksjon som gjør det enkelt å forsure hindringer som dørterskler og tepper på vei mot trappene.



**Låsefunksjon:**

Startsperren sikrer trappeklatreren mot uautorisert bruk.



**Av/på:**

Hovedbryter for å skru trappeklatreren av og på.

**AUTO**

I automatisk modus registreres klatreretningen av sensorer og igangsettes automatisk.

**ASSIST**

I assistent-modus vil klatringen assisteres når enheten er i riktig posisjon og kjørebryteren bekrefter sensorsignalene.


**MANUAL**

I manuelt modus er trappeklatring mulig i alle situasjoner, ettersom sensorfunksjonene er deaktivert.



Tydlig display som viser batteristatus, vinkel og klatreretning.

HØYDE- OG BREDDEREGULERBARE HÅNDTAK

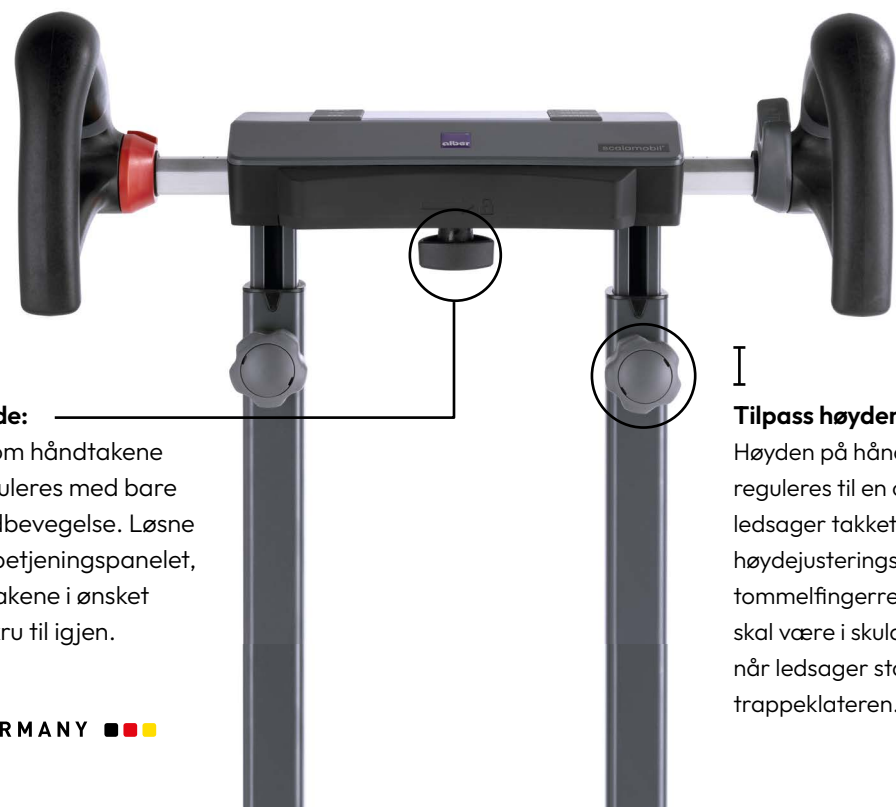

**Grepets bredde:** Bredden mellom håndtakene kan enkelt reguleres med bare én enkelt håndbevegelse. Løsne skruen under betjeningspanelet, plasser håndtakene i ønsket posisjon, og skru til igjen.

**Tilpass høyden:** Høyden på håndtakene kan enkelt reguleres til en optimal høyde for ledsager takket være den praktiske høydejusteringsfunksjonen. En tommelfingerregel er at håndtakene skal være i skulderhøyde på ledsager når ledsager står ved siden av trappeklateren.



**Standardkonfigurasjon (hovedprodukt)**

Scalacombi S46 leveres komplett med integrert sete, nakkestøtte, armlener, fotbrett, batteri og lader.

Artikkelnummer	1595226
HMS-nummer	327635

**Tekniske data**

	scalacombi S46
Totalvekt	38 kg
Maksimal brukervekt	140 kg
Høyde	117 cm
Bredde	50 cm
Dybde	59 cm
<b>Rekkevidde</b>	Opptil 300 trappetrinn (ca 20 etasjer)*
<b>Hastighet</b>	Ca 12 trinn i minuttet, inkludert Soft Step*
<b>Batteri</b>	2x12 V; 3,4 Ah blygel, lekkasjesikker og vedlikeholdsfri. Vekt batteripakke: 2,7 kg.
<b>Maksimal trinnhøyde</b>	20 cm
<b>Minimum trinndybde</b>	11 cm

\*avhengig av brukerens vekt samt trinnets geometri





## Tilbehør

### 01. Hoftebelte:

Hoftebelte med velutprøvd sikkerhetshurtiglås. Gir ekstra sikkerhet for brukeren.

Artikkelnummer: 1565509      HMS-nummer: 230349

### 02. Skulderbelte:

Rullebelter som festes i kryss. Brukers overkropp holdes på plass og gir en økt følelse av trygghet.

Artikkelnummer: 1564990      HMS-nummer: 230348

### 03. Lader for bruk i bil:


Praktisk lader for lading av batteripakken i kjøretøyet mens du er på veien. Elektronisk automatisk lading og utkobling (funksjonen avhenger av kjøretøyet som brukes). Visuell overvåking av ladingen. Spenningsområde 12-32 V.

Artikkelnummer: 1520413      HMS-nummer: 196537

### 04. Isofix-feste for barnesete:

Gjør det enkelt å feste et barnesete.

Artikkelnummer: 1594935

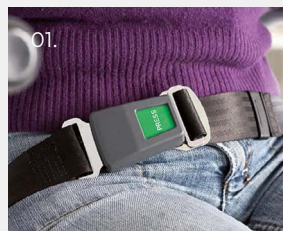

Tlf: 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Postadresse:  
Invacare AS  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo

Besøksadresse:  
Invacare AS  
Brynsveien 16  
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:  
Invacare AS  
Østensjøveien 19  
0661 Oslo

