

# Softform Premier

## Active 2



Statisk og dynamisk trykkfordelende skummadrass

ENKEL OG TRYGG I BRUK | DIGITAL PUMPE | MODULÆR OPPBYGNING



Yes, you can.®

Invacare® **Softform Active® 2** er en hybridmadrass som har et innlagt vekseltrykk mellom et lag profilert- og et lag stabiliserende høykvalitetsskum. Madrassen brukes med eller uten aktivering av vekseltrykk. Uten vekseltrykk aktivert, beholder den posisjon som en statisk skummadrass for pasienter med middels risiko for trykksår. Dersom bruker har behov for en dynamisk madrass, kan man enkelt koble til pumpen, som gir madrassen en overflate med vekslende trykk. Dette kan gjøres uten å flytte brukeren, slik at pasientens komfort ivaretas.



### Statisk overflate

- ▶ Spesialskummet tilbyr en komfortabel og effektiv trykkfordelende overflate for pasienter med middels risiko for utvikling av trykksår, samt for de med skader i huden. Skummet er soneinndelt i ulike firkanter, for tilpasset trykkfordeling. Dette gir madrassen helt spesielle mikroklimatiske og trykkfordelende egenskaper.

### Dynamisk overflate

- ▶ Pumpen aktiveres enkelt og gir brukeren ytterligere terapeutisk behandling via de bueformede luftcellene som ligger mellom de to skumlagene. Luftcellene veksler i sykluser på 10 minutter og gir trykkavlastning under vekslingene.

### Hybridteknologi

- ▶ Kombinasjonen av spesialskum og de spesialdesignede bueformede luftcellene, gir en komfortabel overflate som øker trykkfordelingen og egner seg til de fleste pasientgrupper. Hybrid-terapi er egnet for de aller fleste behov, fra intakt hud til alvorlige trykksår. Ved aktivering eller deaktivering av RX-pumpen, kan type behandling tilpasses raskt etter individuelle behov og ønske om komfort, uten å måtte flytte brukeren.

## Egenskaper ▼



### Luftceller

- ▶ Invacares bueformede luftceller vinkler ergonomisk pasientens konturer og sørger for god støtte under hele kroppen og gir en optimal vekslende trykkfordeling.



### Tildekket slange

- ▶ Slangen har et trekk rundt seg av sikkerhets- og hygienehensyn.



### Kabelhåndteringssystem

- ▶ Et enkelt knappesystem langs kanten av madrassen sikrer at strømkabelen er trygt sikret mens madrassen er i bruk.

## Egenskaper ▾



### «Plug 'n' play» Digital pumpe

- Koble til, slå på, og pumpen er klar til bruk!  
Pumpen er stille i bruk og vil ikke forstyrre pasientens søvn.




### Modulær konstruksjon

- Madrassen er konstruert slik at det er enkelt å skifte ut de ulike bestanddelene.



### Innovativ glidemekanisme

- Shear-krefter er en av hovedårsakene til utvikling av trykksår (EPUAP Clinical Practice Guidelines, 2014).  
**Softform Premier Active 2** tilbyr en innovativ glidemekanisme, som signifikant reduserer shear-kreftene ved bruk i en profilert seng.

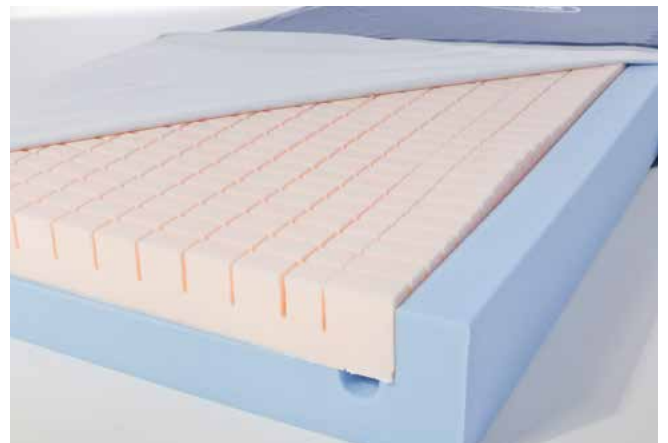

### Spesialskum

- Dersom det skulle oppstå strømbrydd, kan brukeren forbli liggende godt og trygt på madrassens spesialskum, uten behov for akutt hjelp eller forflytning.

### En komplett løsning






- **Softform Premier Active 2** kombinerer trykkfordelende kvaliteter fra det oppskårede og soneinndelte spesialskummet, samt fra luftcellene i midten av madrassen. Luftcellene aktiveres etter eget ønske og behov for ytterligere terapi. Dette sikrer at brukeren alltid har god støtte og trykkfordelende egenskaper i madrassen.

For å bekjempe kostbare og tidkrevende problemer som oppstår ved skadede madrassstrekk har Invacare utviklet et «gjennomtrengningsbestandig» trekk (SRT). Dette spesialtrekket er utviklet for å kunne møte rengjøringsregimene som er påkrevd i et helsemiljø. For mer informasjon om SRT, se [www.thinkpressurecare.co.uk/clinical-papers/strikethrough-resistant-clinical-articles/](http://www.thinkpressurecare.co.uk/clinical-papers/strikethrough-resistant-clinical-articles/)



## Tekniske data ▼

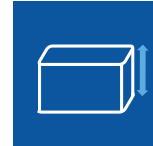	Bredde	Lengde	Høyde	Vekt	Maks brukervekt	Vask	Farge
<b>Softform Premier Active 2 Madrass</b>	 830 - 900 mm	 1810 - 2100 mm	 152 mm	 14 kg	 247,6 kg	 80°	 Baltisk blå
Flere størrelser kan produseres ved forespørsel							

	Bredde	Lengde	Høyde	Vekt	Pumpe	Produert i henhold til:
<b>Active 2 RX pumpe</b>	 105 mm	 275 mm	 155 mm	 1,75 kg	 Støynivå = 24 dB	European Standard: BS EN 597-1 Cig European Standard: BS EN 597-2 Match BS7177:1996 Crib 5.

- Oppskåret, soneinndelt spesialsikum i madrassens overflate
- Aktiv luftcelle-behandling ved behov
- Klinisk bevist at madrassen passer til alle kategorier av trykksår
- Gjennomtrengningsbestandig (SRT) madrassstrekk
- Egnert for høyrisikopasienter
- Trekk med brannhemmende egenskaper, velg mellom: Crib 5 eller Crib 7
- Maksimal brukervekt 247,6 kg
- Brannhemmende trekk egenskaper, velg mellom: Crib 5 eller Crib7
- Maksimal brukervekt 247,6 kg

Artikkelnummer	Hybrid madrass - Luft og Skum	Madrass mål cm	Materiale	Produktbeskrivelse
1630033	Madrass Softform Premier Active 2 m/pumpe RX	83x200x15,2	Spesialsikum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass/dynamisk med pumpe
1630034	Madrass Softform Premier Active 2 m/pumpe RX	85x200x15,2	Spesialsikum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass/dynamisk med pumpe
1630035	Madrass Softform Premier Active 2 m/pumpe RX	88x200x15,2	Spesialsikum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass/dynamisk med pumpe
1630036	Madrass Softform Premier Active 2 m/pumpe RX	90x200x15,2	Spesialsikum/polyuretan	Trykkfordelende skummadrass/dynamisk med pumpe
1629800	Pumpe Softform Premier Active 2 RX			

Selv den aller beste madrassen kan ikke alene forhindre eller helbrede trykksår, den skal alltid inngå i en komplett pleieplan.

For mer informasjon om produktene og produktenes brukermanual, vennligst se [www.invacare.no](http://www.invacare.no).

Tlf: 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
[www.invacare.no](http://www.invacare.no)

Postadresse:  
Invacare AS  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo

Besøksadresse:  
Invacare AS  
Brynsveien 16  
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:  
Invacare AS  
Østensjøveien 19  
0661 Oslo



Yes, you can.®