

# Softform® Premier Active 2

med Active 2 RX-pumpe



Yes, you can.®

## En dynamisk madrass med forbedret trykkavlastning


For å kunne tilby helsepersonell en dynamisk, terapeutisk madrass - som gir flere nivåer av trykkavlastning - har vi kombinert vår Active 2 RX-pumpe med vår Softform Premier skummadrass og skapt Softform Premier Active 2 RX.

Ved hjelp av kun et tastetrykk på Active 2 RX-pumpen kan pleiepersonalet gi brukeren optimal støtte og trykkavlastning. Når pumpen skrur på, vil luftcellene i madrassen bli dynamiske. Når de alternerende luftcellene jobber sammen med den klinisk dokumenterte\* skummadrassen Softform Premier, bidrar dette til forebygging av trykksår.

**"Svært høy risiko" reaktiv madrass**  
Madrassen er laget av skum av høy kvalitet (High Specification) med avanserte utskjæringer. Skummets egenskaper bidrar til effektiv tilpasning til kroppens konturer, og bidrar til et optimalt mikroklima og sikrer god trykkfordelingen for brukere med høy risiko for å utvikle trykksår.

### En komplett, individuelt tilpasset løsning

- Softform Active 2 RX kombinerer de trykkfordelende egenskapene fra de avanserte utskjæringerne i skummet med de innlagte luftcellene under skummet, som kan aktiveres ved behov for aktiv behandling.
- Denne unike oppbygningen sikrer at brukeren alltid er støttet av det omsluttende høykvalitetsskummet\*\*, uansett om pumpen er avslått eller i bruk. Det komfortable høykvalitetsskummet sikrer effektiv trykkfordeling og opprettholder komforten til alle tider.
- Softform Premier Active 2 RX er også tilgjengelige i brede størrelser for å tilby sikker og verdig støtte til pasienter som har bruk for en bredere madrass.

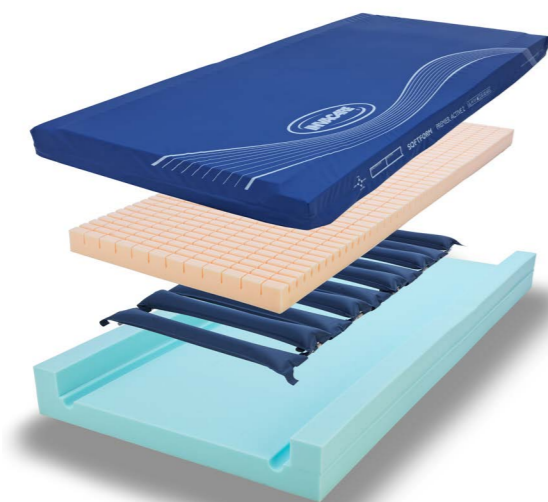

\* For mer informasjon, se <https://invacarerest.com/europe-en/knowledge/clinical-evidence/>  
\*\* (NICE Clinical Guideline 179, September 2014)



### SMARTE FUNKSJONER OG EGENSKAPER

Fra den moduloppbydde madrassen til den effektive RX-pumpen




### Statisk skumoverflate i høykvalitetsskum

Brukere vil alltid oppnå svært god trykkavlastning fra skummadrassen, selv i de tilfellene der strømmen mot formodning skulle gå.



### Plug'n'Play digital kontrollenhet

Intuitiv og brukervennlig - både å sette opp og betjene

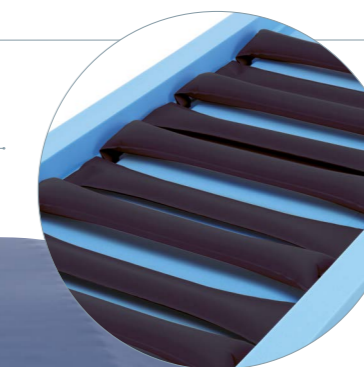

### Kostnadsbesparende moduloppbygning

Alle komponentene kan enkelt byttes ut, noe som forlenger produktets levetid, og gjør det mer økonomisk å skifte ut kun enkeltdele.



### Minimerer shear med glide-effekt

Den innovative glidemekanismen reduserer shear-kreftene betydelig når den brukes sammen med en elektrisk pleieseng. EPUAP anbefaler at man unngår å utsette huden for både trykk- og shear-krefter, som begge er sentrale faktorer i utviklingen av trykksår (EPUAP, 2014)



### Selvregulerende system

Den smarte Active 2 RX-pumpen gir alltid et optimalt trykk, uten behov for å gjøre egne innstillinger og justeringer.



## Tekniske data ▼

For mer informasjon om dette produktet, se [www.invacare.no](http://www.invacare.no)



Bredde ▼



Lengde ▼



Høyde ▼



Vekt ▼



Maksimal brukervekt ▼



Maksimal vasketemperatur ▼

### Softform Premier Active 2 trykkavlastende madrass

83 - 85 - 88 - 90 - 103 og 120 cm

200 cm

15 cm

14 kg

247,6 kg

95° C



Dybde ▼



Bredde ▼



Høyde ▼



Vekt ▼

### Kontrollenhet/pumpe

105 mm

275 mm

155 mm

1,75 kg

### Artikkelnummer ▼

### Beskrivelse ▼

1630033	Softform Premier Active 2 RX, komplett med pumpe, 83 x 200 x 15 cm
1630034	Softform Premier Active 2 RX, komplett med pumpe, 85 x 200 x 15 cm
1630035	Softform Premier Active 2 RX, komplett med pumpe, 88 x 200 x 15 cm
1630036	Softform Premier Active 2 RX, komplett med pumpe, 90 x 200 x 15 cm
1631765	Softform Premier Active 2 RX, komplett med pumpe, 103 x 200 x 15 cm
1631768	Softform Premier Active 2 RX, komplett med pumpe, 120 x 200 x 15 cm

## Farge ▼



Baltisk blå

OBS: Fargen kan avvike noe fra bildet

## Regulatoriske data ▼

### Madrassen er produsert i samsvar med:

Europeisk standard: BS EN 597-1 Cig  
Europeisk standard: BS EN 597-2 Match  
Standard for brannikkerhet: BS7177:1996 Crib 5

### Pumpe:

Støynivå: ≤ 24 dB\*  
Syklusid: 10 minutter (1 av 2 sykluser)

### Brannikkerhetsstandard:

BS7177:2008

\* Testrapport tilgjengelig på forespørsel

## Øvrig informasjon ▼

- ▶ Kastellert skumoverflate i høykvalitetsskum
- ▶ Aktiv støtte når det er nødvendig
- ▶ Klinisk utprøvd for alle kategorier av trykksår
- ▶ Egnet for pasienter med svært høy/høy risiko
- ▶ Alternativer for brannhemmende trekk i Crib 5 eller Crib 7
- ▶ Maksimal brukervekt 247,6 kg
- ▶ Ulike størrelser tilgjengelig

God sykepleie er avgjørende for å forebygge trykksår. Denne madrassen vil bidra positivt til resultatet av en pleieplan for å forebygge trykksår. Utdanning, klinisk vurdering og pleie, samt individuelle tilpasninger for den enkelte brukers behov, er grunnleggende faktorer i forebyggingen av trykksår. En rekke vurderingsskalaer kan brukes som en formell metode for å vurdere risiko for utvikling av trykksår, men skal alltid benyttes i kombinasjon med en vurdering av brukerens kliniske status. En risikovurdering skal aldri erstatte en generell klinisk vurdering.

Tlf: 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Postadresse:  
Invacare AS  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo

Besøksadresse:  
Invacare AS  
Brynsveien 16  
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:  
Invacare AS  
Øststensjøveien 19  
0661 Oslo

