



Vicair[®] Academy


Madrass



Effektiv trykkfordeling og minimering av skyvkrefter



Yes, you can.[®]

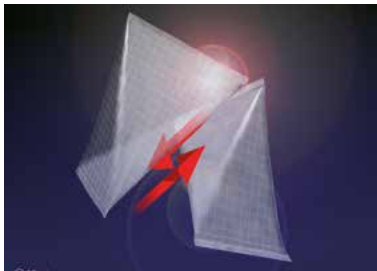

Vicair Academy madrass gir fremragende trykkfordeling og støtte til brukere med høy risiko for å få trykksår uten bruk av elektrisk utstyr.


Madrassen består av flere hundre trekantede lavfriksjons-luftceller, **SmartCells™**, som gjør at madrassen former seg etter kroppens konturer og bevegelser. Konseptet tilbyr en optimal kombinasjon av trykkfordeling, støtte og stabilitet, samtidig som skyv- og friksjonskreftene effektivt minimeres.

Unikt design


► **Vicair Academy-madrassen** benytter seg av **Vicair Technology™**, en unik og innovativ metode som gir en fleksibel liggeflate og god støtte til kroppen. **Vicair Academy** består av 36 bøtteformede kamre fylt med **SmartCells™**. Disse trekantede cellene har en lavfriksjonsoverflate som glir lett mot hverandre slik at madrassen former seg etter kroppens konturer. De bøtteformede kamrene som SmartCellene ligger i er forskyvelige seg i mellom, slik at skyvkreftene minimeres.

Effektiv trykkfordeling

► Den enkelte **SmartCell** sin evne til forskyvning og individuell tilpassing tillater kroppen å synke ned i madrassen, og gir svært effektiv trykkfordeling. Madrassen er i tillegg meget komfortabel og stabil å ligge på. **Vicair Technology** gjør at det er mulig selv for brukere med alvorlige deformiteter å synke ned i madrassen og oppnå optimal komfort, støtte og trykkfordeling.

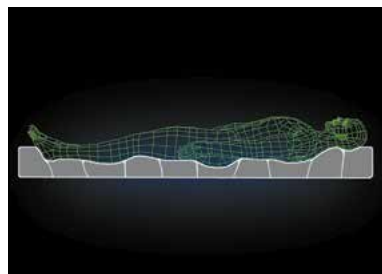

Egenskaper ▼

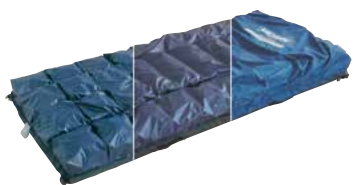

Trekk

► **Vicair Academy-madrassen** leveres med et løst to-lags inkontinestrekk, som både tillater at brukeren synker ned i madrassen og minimerer skyv- og friksjonskreftene.



Fleksibel innstilling

► **Vicair Academy-madrassen** følger sengens innstillinger.



Bøtteformede kamre

► De 36 kamrene er plassert på en bunn av skum. Kamrene er formet slik at de gir en stor overflate for kroppen å synke ned i og dermed god understøttelse for hele kroppen.

Tekniske data ▼



850-1200 mm



2000-2150 mm



140 mm



8 / 9 kg



Maks. 250 kg



95°

Trekket kan vaskes ved 95°. Se vaskeanvisning i bruksanvisning.



Blå

Art. nr.	Madrass, statisk luft	Madrassmål	Materiale	Produktbeskrivelse
ARM415/LF/68140	Madrass Vicair Academy	60x140x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/70140	Madrass Vicair Academy	70x140x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/85200	Madrass Vicair Academy	85x200x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/85215	Madrass Vicair Academy	85x215x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/90200	Madrass Vicair Academy	90x200x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/90215	Madrass Vicair Academy	90x215x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/105200	Madrass Vicair Academy	105x200x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/105215	Madrass Vicair Academy	105x215x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/120200	Madrass Vicair Academy	120x200x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft
ARM415/LF/120215	Madrass Vicair Academy	120x215x14	Smart Cells	Trykkfordelende helmadrass, statisk luft

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®