

rea | Azalea (A), Dahlia (D) Tilbehør



Invacare® Rea komfortrullestoler har et bredt utvalg av tilbehør som gir brukeren mulighet til å oppnå optimal støtte og sittestilling samt økt komfort. Tilbehøret kan brukes på de fleste Rea komfortmodeller, noe som gir terapeuter mulighet til å finne den modellen som passer brukeren best. Ved å tilby bedre støtte vil brukeren bli i stand til å delta i ønsket aktiviteter i en mer avslappet og behagelig sittestilling.

På de neste sidene referer vi til A eller D, som står for henholdsvis **Azalea** og **Dahlia**. En del av tilbehøret er også kompatibelt med Invacares allround og aktive rullestoler.

Rygg



Flex3 ryggplate

Gir en fast og stabil støtte kombinert med en ryggpute. Ryggplaten er individuelt høyde- og breddejusterbar. **(A) (D)**




Flex 3 velcro rygg (standard på Azalea)

Med borrelåsbånd som kan høyde- og breddejusteres samt vinkles og utvides. Kombineres med ryggoverdrag eller ryggpute. **(A) (D)**



Ryggoverdrag (standard på Azalea)

Polstret overdrag til velcro rygg. **(A) (D)**

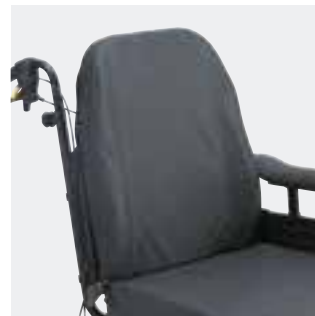

Laguna ryggpute

Laguna ryggpute gir en avslappet og komfortabel støtte takket være ryggens formede sider i skum. **(A) (D)**




Mistral² ryggpute

Mistral² ryggputen gir med sine ekstra store og stabile sidestøtter brukeren en optimal sittestilling med god støtte, og samtidig god plass til bevegelse av armene. **(A) (D)**



Passad² ryggpute

Passad² gir stabilitet og komfort og er spesielt velegnet for brukere med stort behov for støtte ved skuldre og bekken. **(A) (D)**

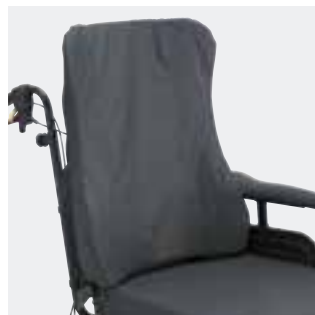


Passad² ryggpute høy

Passad² i en 100 mm høyere variant, designet for høye brukere. **(A) (D)**



Vicair multifunksjonell

Ryggpute oppdelt i separate kamre med trekantede luftputer (Soft Cells). For brukere som trenger ekstra posisjoneringmuligheter. **(A) (D)**

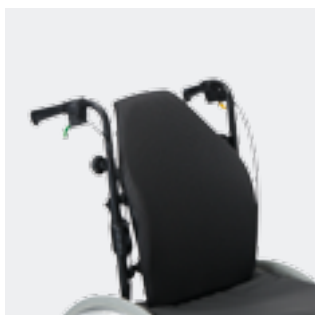

Invacare® Matrix® Elite

Matrix Elite har lett sidestøtte (80 mm dybde) med god klaring ved skuldre og hofter. Dette gir rom for bevegelse i overkroppen. Justerbar i dybde, høyde, vinkel og rotasjon. **(A) (D)**



Invacare® Matrix® Elite dyp

Matrix Elite dyp har høy og dyp sidestøtte (160 mm dybde) som gir god støtte for overkroppen samtidig som det er god klaring ved skulde og hofter. Justerbar i dybde, høyde, vinkel og rotasjon **(A) (D)**



Invacare® Matrix® Elite TR

Elite TR er designet til rullestol med sete- og/eller ryggtilt. Puten har et ekstra skumlag, som er svært mykt og som lar brukeren synke godt inn i puten og fordeler trykket over en større flate. Lett sidestøtte med god klaring ved skuldre og hofter. 75 mm dybde. Justerbar i dybde, høyde, vinkel og rotasjon. **(A) (D)**



Invacare® Matrix® PB

Matrix Posture Back har middels sidestøtte (130 mm dybde) og kraftig polstring for å gi postural støtte og høy komfort. **Matrix Posture Back**, dyp har mer sidestøtte (180 mm). Justerbar i dybde, høyde, vinkel og rotasjon. **(A) (D)**

Sete - og ryggtilt



Ledsagerstyrt setetilt og ryggregulering

Ryggen og hele seteenheten tiltes ved hjelp av gasspatron når utløserhåndtaket aktiveres. Posisjonen kan låses i ønsket vinkel. **(A) (D)**



Sete- og ryggtilt, elektrisk

Ryggen og hele seteenheten tiltes elektrisk. Kan benyttes av både bruker og ledsager. Kan låses i ønsket vinkel på selvbetjening. **(A) (D)**

Kjørehåndtak



Kjørehåndtak

Høydejusterbare skyvehåndtak monteres med en stabiliserende ryggbøyle. **(D)**



Kjørebøyle, vinkeljusterbar

Vinkeljusterbar bøyle som enkelt kan vinkles for å gi et behagelig grep for ledsager eller for å komme nærmere brukeren ved forflytninger. **(A) (D)**

Art. nr.:
SP1563967 til sb 39cm
SP1564551 til sb 44cm
SP1561552 til sb 49cm

Sete og seteputer



Glidesete

Hjelper til rett posisjonering på setet. Utløses med en liten spak på høyre side. Forenkler inn- og utstigning i stolen. **(A)**

Art. nr. 1484576 Glideste 39
HMS nr. 186569
Art. nr. 1484577 Glideste 44
HMS nr. 186570
Art. nr. 1484578 Glideste 49
HMS nr. 186571



Floshape setepute

Konturformet 100 mm standardpute i lateks-skum. Tilpasser seg kroppens former og gir dermed god trykk-fordeling. Leveres både med plysj- og dartex-trekk. **(A) (D)**



Mistral²

Pute med to lag for økt komfort. **(D)**




Inkontinentsoverdrag

Detløseinkontinensoverdraget passer til putene. Kan vaskes ved 60 grader. **(A) (D)**

Art. nr. 5253078-TR26, størrelse 39 cm
HMS nr. 8689
Art. nr. 5253079-TR26, størrelse 44 cm
HMS nr. 8690
Art. nr. 5253080-TR26, størrelse 49 cm
HMS nr. 8691

Benstøtter og fotplater

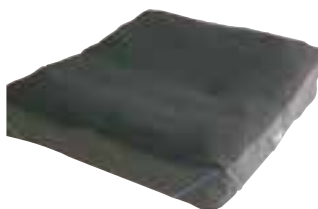

Vicair[®] multifunksjonell

Sittepute bestående av separate kamre med trekantede luftputer (Soft Cells). For brukere som trenger ekstra posisjoneringmuligheter og/eller har risiko for å utvikle trykksår. **(A) (D)**



Vinkelregulerbare benstøtter med justerbare (alternativt faste) fotplater

Lengdekompenserende ved vinkling av benstøtten. **(A) (D)**



80° benstøtter

Benstøtter med justerbare (alternativt faste) fotplater og med sving inn/sving ut funksjon som aktiveres via håndtakets låsemekanisme. Kan benyttes av hjelper så vel som bruker. **(A) (D)**



90° benstøtte

Føttene kommer nærmere kroppen. Kan anvendes på rullestoler med små forhjul. **(A) (D)**

Benstøtter og fotplater



Sentermontert benstøtte
Gir kompakt støtte for bena. Benstøtten er justerbar i høyde, dybde og vinkel. Oppfellbare fotplater som gjør forflytning enklere. **(A) (D)**
Art. nr. 1484821
HMS nr. 185425



Amputasjonsbenstøtte
Gir brukeren perfekt støtte, er høyde-, vinkel- og dybdejusterbar. Med sving inn/sving ut funksjon. **(A) (D)**
Art. nr. 1442990 (høyre)
HMS nr. 185376
Art. nr. 1442991 (venstre)
HMS nr. 185377



Gipsbenstøtte
Stabil 90° gipsbenstøtte med justerbare myke leggplater og fotstøtte. **(A) (D)**
Art. nr. 1435771 (venstre)
Art. nr. 1435770 (høyre)

Fotplate



Vinkeljusterbare fotplater (standard)
Fotplatene kan stilles inn i dybde, høyde og vinkel. **(A) (D)**



Fotplateforlenger
Fotplateforlengeren gir mulighet for bedre støtte i dybden. **(A) (D)**
Art. nr. SP5255297 (par) bredde 135 mm
Art. nr. SP5255299 (par) bredde 160 mm



Hel fotplate
Kan svinges opp til siden eller tas helt av sammen med den ene benstøtten. Vinkel- og dybdejusterbar. **(A) (D)**



Polster til hel fotplate
Polster med tykkelse 12 mm, gjør fotplaten ekstra myk og behagelig. **(A) (D)**
Art. nr.: SP1563959 (SB 39)
SP1563962 (SB 44)
SP1563963 (SB 49)



Faste fotplater
Faste fotplater som kan forbli oppe når stolen foldes. **(A) (D)**



Polster til delt fotplate
Polster med tykkelse 12 mm, til vinkel- og dybdejusterbare fotplater. Kan tas av for vask. **(A) (D)**
Art. nr.: SP1563946



Leggbeskytter
Myk og justerbar leggstøtte som kan erstatte leggstøtten på de vinkeljusterbare bestøttene eller kompletteres med de vinkelfaste. Til brukere som trenger en hel støtte bak fotplatene. **(A) (D)**
Art. nr.: SP1563951



Fotkasse
Fotkasse med polstrede sider. **(A)**
Art. nr.: 1571749 til sb 39
1571750 til sb 44
1571751 til sb 49

Armlen



Formet armlen (standard) Ducktail

Komfortable og høydejusterbare armlen som er vinklet opp på bakenden for å gi ekstra støtte når rullestolen er tiltet bakover. **(A) (D)**



Armlene komfort

Høydejusterbare og avtagbare armlener med bredere og lengre puter. **(A) (D)**



Helpolstret armlene

Mykt armlene polstret på utsiden og innsiden av armlenet. **(A) (D)**



Hemi armlen

Høyde-, dybde- og vinkeljusterbare for å gi optimal komfort for brukeren. **(A) (D)**



Trekk til klesbeskytter

Skjuler klesbeskytteren. Dartex polstring og det myke fyllet gir økt komfort. **(A)**
Art. nr. 1415453
HMS nr. 166243



Innleggspute til klesbeskytter

20 mm tykk pute som reduserer setebredde. Monteres på øverste del av klesbeskytteren slik at den ikke kommer i veien for seteputen. **(A) (D)**



Klesbeskytter overdrag

Tykkelse 22 mm. Gjør klesbeskytteren mer komfortabel og reduserer sittebredden. Monteres med 2 stk. borrelåser som festes rundt klesbeskytter. **(A) (D)**
Art. nr.: SP1563943

Sete - og ryggvalg



Abduksjonskile

Myk, oval abduksjonskile til plassering mellom knærne. Dybdejusterbar og avtagbar. **(A) (D)**



Nakkestøtte høyderegulerbar

Harsammemonteringsbeslag som hovedstøtten. Konturformet for å gi god støtte til nakke og nederste del av hodet. **(A) (D)**



Sidejusterbar hodestøtte (multi)

Vinkeljusterbare vinger på sidene. Dybde-, vinkel-, høyde- og sideveis justerbar. **(A) (D)**

Sete - og ryggvalg



Korsryggstøttepute

Plasser bak ryggtrekket/puten for å øke og forbedre formen på ryggstøtten.

(A) (D)

Art. nr. 5252527
HMS nr. 027168



Vaskbart trekk

For enklere vedlikehold. Til standard hodestøtte og sidejusterbar multi hodestøtte.

(A) (D)



Hodestøtte med kinnstøtte

Ekstra kinnstøtte til den mer passive bruker. Har samme monteringsbeslag som standard hodestøtte.

(A) (D)

Art. nr. 1446560
HMS nr. 029463



Overgangstrekk

Dekker for et eventuelt mellomrom mellom ryggplate og sete.

(A)



Kiler

Faste posjoneringskiler for å gi lett støtte under setepute eller bak ryggpute.

(A) (D)

Art. nr. 1513037



Fast sidestøtte

Bredde- og dybdejusterbar samt avtagbar.

(A) (D)



Sidestøtte multijusterbar

Mange innstillingsmuligheter gjør den lett å forme til den enkelte bruker. Finnes også i forlenget versjon som passer til velcro-ryggen.

(A) (D)



Sidestøtte swing-away

Med utsvingbart beslag. Fåes både med fast- og multijusterbar pute.

(A) (D)



Sidestøtte med armlenforlenger

Gir 50 mm høyere plassering av kroppsstøtten enn den enkle kroppsstøtten. Spesielt velegnet til høye brukere.

(A) (D)



Selevest

Elastisk vest i str. small. Plasseres over sternum og gjerne i kombinasjon med hoftesele.

(Azalea Minor)



Selefeste

Montering for selen. Mulig å plassere på hodestøtten.

(A) (D)

Art.nr 1559963

Forhjulsoppheng og forhjul



Hurtigkobling

Svinghjulet kan enkelt løsnes ved å trykke på knappen, slik at stolen blir enklere å transportere. **(A) (D)**



Enhåndsdrift

For brukere som bruker høyre eller venstre arm for å kjøre stolen. **(D)**



Chassisforlenger

Flytter forhjul 50 mm fremover for økt stabilitet. **(A)**



Svinghjul

Fås i størrelsene 5"-8" og i myke, massive og luftfylte dekktyper. **(A) (D)**

Sikkerhet




Drivringer

Fås i følgende materialer: aluminium som standard, rustfritt stål, skum, Black Grip eller plast som tilbehør. **(A) (D)**




Eikerbeskytter

Monteres for å beskytte brukerens fingre. **(A) (D)**

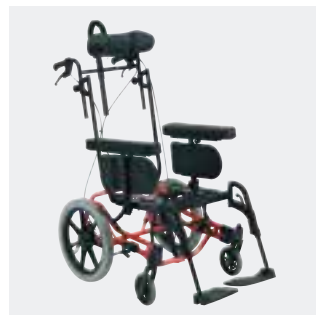

Trommelbremses til 16"/20"/22"/24" drivhjul

Sikrer hjelperen/ledsageren kontroll over rullestolens bremses. **(A) (D)**

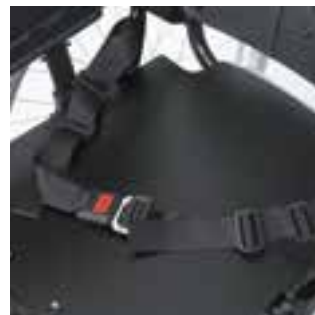

Hoftebelte

Sikrer brukeren i rullestolen. **(A) (D)**

Art. nr. 1551066
HMS nr. 138819

Øvrige muligheter



Reflekser

Øker synligheten av stolen i mørket. **(A) (D)**
Art. nr. 5206655
HMS nr. 186478



Bord og tilhørende pute

Forbedret stabilitet og festemekanisme. Finnes i 3 størrelser som hver kan bredjusteres 10 cm utover. I tillegg er det kommet en pute som dekker hele bordplaten. **(A) (D)**

Art. nr. bord
Medium (til sb. 39) SP1570748
Stor (til sb. 44) SP1570749
XL (til sb. 49) SP1570775



Pute til bord

Art. nr.
Medium (til sb. 39) SP1571269
Stor (til sb. 44) SP1571270
XL (til sb. 49) SP1571271
(A) (D)



Fingerskruer

Erstatter skruer på benstøtte og armlen. **(A) (D)**
Art. nr. SP1484457



Lås til bord



Swing-away-bord

Forenkler forflytning inn- og ut av stolen. Det er også avtagbart.



Innfestning av posisjoneringsbelter

Som et supplement til det bakre standardfestet kan man montere et fremre feste til posisjoneringsbraketten for å få flere innfestningspunkter. **(A)**

Art. nr.: SP1563952

Øvrige muligheter



Vinkelmåler

For å finne vinkelen til sete og rygg i forhold til basen.

(A) (D)

Art. nr.: SP1563954 (rygg)
1561584 (sete)



Krykkeholder

Med plass til to krykker.

(A) (D)

Art. nr. SP1560811

alber Hjelpemotorer



Alber e-motion

Diskret hjelpemotor styrt via drivringene. Gir brukeren ergonomiske fordeler og samtidig lang større frihet til å komme seg rundt.

Art. nr. 1490998_24
HMS nr. 161208



Alber e-fix E35

Konverterer en manuell rullestol til en lettevekts el-rullestol. **e-fix** demonteres lett og kan tas med i f.eks bagasjerommet på bilen.

Art. nr. 1566293
HMS nr. 215765



Alber scalamobil S35

Bruk trapper på den enkle måten. Konverterer rullestolen til en mobil "trapp-rullestol".

Art. nr. 1520731
HMS nr. 174014



Alber scalacombi S36

Inneholder integrert oppfellbart sete og rygg. Anvendes typisk av brukere som ikke har behov for en rullestol, men som har bruk for hjelp til å komme opp og ned trapper.

Art. nr. 1520417
HMS nr. 174506



Alber viamobil

Gjør kjøreturen lettere og mer skånsom for hjelperen, og gir overskudd til lengre og mer behagelige turer for brukeren.

Art. nr. 1521003
HMS nr. 176396