

*Fino, Faro, Douro & Porto*_{NG}



NOVIDADE

Encontre uma gama de poltronas
ainda mais completa



NOVIDADE

Para ativar a posição de Relax total, apenas é necessário o afastamento da poltrona da parede em 9 cm.

O bom compromisso entre conforto e simplicidade

Funcionais e com linhas modernas, as poltronas **Fino** e **Faro** adaptam-se facilmente a todo tipo de ambientes. O apoio de cabeça incorporado oferece posicionamento otimizado da cabeça completando assim o conforto destas duas poltronas.

A poltrona **Fino** oferece dimensões de assento reduzidas : largura e profundidade de 450 mm. Os apoios de braços oferecem um elevado nível de conforto graças aos revestimentos almofadados.

Disponível em 2 versões

A poltrona **Fino** e **Faro** estão disponíveis na versão elétrica com 1 motor que permite a elevação das pernas seguida da reclinção de encosto (Posição Relax). Permite ainda a posição de elevação para ajudar à passagem da posição sentada para a posição de pé e viceversa.

Ambos os modelos possuem rodízios na parte traseira.



Fino
Posição Relax
Heritage Camel



Faro
Posição Sentada
Heritage Camel



Faro
Posição elevação
Napa Preta



Faro
Posição Relax
Heritage Camel

Características



Apoio de cabeça para melhor posicionamento e maior conforto.



Comando com 2 botões simples de uso e ergonómico.





Bolsa lateral para colocação de comando ou outros objetos (versão elétrica).

Cores

Heritage camel

Napa preta

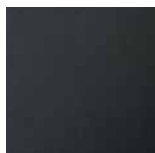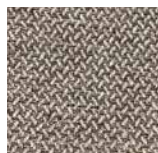

Códigos

1644969 **Fino** elétrica 1 motor Heritage Camel

1608090 **Faro** elétrica 1 motor Heritage Camel

11608091 **Faro** elétrica 1 motor Napa Preta

NOVIDADE

Para ativar a posição de Relax total, apenas é necessário o afastamento da poltrona da parede em 10 cm.



Posição sentada
Heritage Camel



Posição sentada
Napa Castanho Chocolate

O reencontro entre a elegância e o conforto!

A poltrona **Douro** oferece conforto adicional graças à continuidade entre o assento e o apoio de pernas. Está equipada de apoios laterais de tronco para ajudar a manter um posicionamento adequado. Com um design simples, largura total estreita e várias cores à escolha, esta poltrona facilmente encontrará um lugar em ambientes domiciliários. Fornecida de série com 2 proteções de encosto (nível superior).

Diferentes versões disponíveis

A poltrona **Douro** está disponível na versão elétrica com 1 motor. Permite a elevação das pernas seguida da reclinção de encosto (posição Relax). Permite ainda a posição de elevação para ajudar à passagem da posição sentada para a posição de pé e vice-versa. A **Douro** também existe na versão manual que permite uma posição Relax exercendo algum apoio, para trás, nos apoios de braços. Todas as versões possuem rodízios na parte traseira.

Características



Apoios laterais de tronco/cabeça.



Comando com 2 botões simples de uso e ergonómico.



Bolsa lateral para colocação de comando ou outros objetos (versão elétrica).




Fornecida com uma proteção do encosto extra (para ter como alternativa à outra quando for higienizada).

Cores

Heritage Camel



Napa Castanho Chocolate

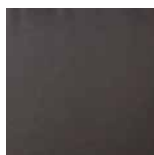

Códigos

1608093 **Douro** Manual Napa Castanho Chocolate

1608094 **Douro** 1 motor Heritage Camel

1608097 **Douro** 1 motor Napa Castanho Chocolate

Para ativar a posição de Relax total, apenas é necessário o afastamento da poltrona da parede em 5 cm (versão 1 motor)

NOVIDADE



Design sóbrio e clássico

O design da poltrona *Invacare Porto* oferece ainda mais conforto e aconchego. Mais compacta e envolvente, desenvolvida com apoio de pernas inteiro e apoios laterais de tronco. A **Porto_{NG}** garante um conforto otimizado. Graças às suas dimensões reduzidas e vários tipos de tecidos, a **Porto_{NG}** vai facilmente integrar-se em qualquer tipo ambientes.

Diferentes versões disponíveis

A poltrona **Porto_{NG}** existe na versão elétrica com 1 motor que permite a elevação das pernas seguida da reclinção de encosto (posição Relax). Permite ainda a posição de elevação para ajudar à passagem da posição sentada para a posição de pé e vice-versa.

A poltrona **Porto** está agora disponível também na versão 2 motores que permite a regulação do encosto independentemente da regulação do apoio de pernas. Com 2 motores a reclinção do encosto é mais abrangente permitindo assim uma posição de descanso inigualável. Todas as versões possuem rodízios na parte traseira.



Posição de elevação
Napa Chocolate




Posição Relax
Napa chocolate



Posição de descanso (2 motores)
Microfibra Cinza com debrum branco.

Características

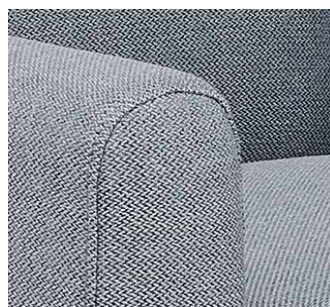


Apoios de Braço redesenhadados, para um aspeto mais moderno.



Comando com 2 botões simples de uso e ergonómico (versão 1 motor).



Comando com 4 botões simples de uso e ergonómico (versão 2 motores).

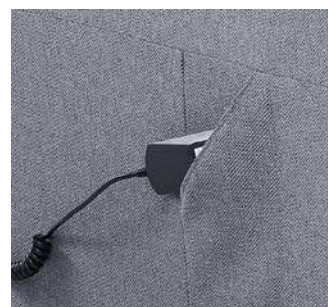


Bolsa lateral com um novo design, para um aspeto mais moderno e também maior ergonomia durante a sua utilização.

Cores

Napa Cinza Taupe



Napa Castanho Chocolate

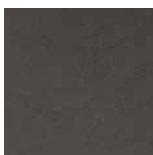

Heritage Cinza










Códigos

1608134 **Porto_{NG}** 1 motor Napa Castanho Chocolate

1608135 **Porto_{NG}** 2 motores Heritage Cinza

1608136 **Porto_{NG}** 2 motores Napa Cinza Taupe

Tabela de características

		Cores	Posição Relax	Posição de elevação	Posição de descanso	Continuidade entre assento e apoio de pernas	Profundidade de assento	Altura de assento/chão	Largura de assento
									
Versão elétrica 1 motor									
1644969	Fino	Heritage Camel	◆	◆			450 mm	470 mm	450 mm
1608090	Faro	Heritage Camel	◆	◆			540 mm	470 mm	530 mm
1608091		Napa Preta	◆	◆					
1608094	Douro	Heritage Camel	◆	◆		◆	540 mm	470 mm	530 mm
1608097		Napa castanho chocolate	◆	◆		◆	540 mm	470 mm	530 mm
1608134	Porto NG	Napa castanho chocolate	◆	◆		◆	540 mm	450 mm	530 mm
Versão elétrica 2 motores									
1608135	Porto NG	Heritage Cinza	◆	◆	◆	◆	540 mm	450 mm	530 mm
1608136		Napa Cinza Taupe	◆	◆	◆	◆	540 mm	450 mm	530 mm
Versão manual									
1608093	Douro	Napa castanho chocolate	◆			◆	540 mm	470 mm	530 mm

As diferentes posições



Posição relax:

Posição sentada confortável que permite ainda a elevação de pernas e reclinção de encosto para uma posição semi deitada.



Posição de elevação:

Ajuda à passagem da posição sentada para a posição de pé e vice-versa.



Posição de descanso:

Posição deitada

	Reclinação máxima do encosto	Altura total	Largura total	Profundidade total	Profundidade total, poltrona inclinada totalmente	Afastamento da parede para inclinação máxima do encosto	Altura apoio de braço/chão	Peso máximo utilizador	Peso da poltrona	Densidade da espuma
1 Motor de costas para a parede										
Fino	120°	1000 mm	730 mm	780 mm	1520 mm	90 mm	670 mm	125 kg	53 kg	Assento 28kg/m ³ Encosto 18kg/m ³ Apoios de braços 28kg/m ³
Faro	120°	1110 mm	770 mm	880 mm	1580 mm	90 mm	600 mm	125 kg	50 kg	Assento 28kg/m ³ Encosto 18kg/m ³ Apoios de braços 28kg/m ³
Douro	120°	1080 mm	740 mm	860 mm	1580 mm	100 mm	640 mm	125 kg	57 kg	Assento 28kg/m ³ Encosto 28kg/m ³ Apoios de braços 28kg/m ³
Porto NG	120°	1020 mm	790 mm	910 mm	1670 mm	50 mm	600 mm	125 kg	52 kg	Assento 28kg/m ³ Encosto 18kg/m ³ Apoios de braços 28kg/m ³
Versão elétrica 2 motores de costas para a parede										
Faro	135°	1110 mm	770 mm	880 mm	1670 mm	460 mm	600 mm	125 kg	50 kg	Assento 28kg/m ³ Encosto 18kg/m ³ Apoios de braços 28kg/m ³
Porto NG	135°	1020 mm	790 mm	860 mm	1670 mm	460 mm	600 mm	125 kg	52 kg	Assento 28kg/m ³ Encosto 18kg/m ³ Apoios de braços 28kg/m ³
Versão manual de costas para a parede										
Douro	120°	1080 mm	740 mm	860 mm	1580 mm	220 mm	640 mm	125 kg	57 kg	Assento 28kg/m ³ Encosto 28kg/m ³ Apoios de braços 28kg/m ³

Opções / Acessórios

Para modelos elétricos:

1577640	Kit Bateria + cabo
1577638	Transformador + cabo de alimentação

Para modelos com 1 motor:

SP1604803	Motor
SP1604806	Comando 2 botões

Para modelos com 2 motores:

SP1604804	Motor função elevação e regulação apoios de pernas combinadas
SP1604805	Motor de encosto
SP1604807	Comando 4 botões, com cabo

Para o modelo Fino:

SP1606656	Revestimento para os apoios de braços (par)
-----------	---

Sabia que com este Kit de Bateria poderá utilizar a Poltrona em qualquer lugar, sem haver necessidade de estar ligada à corrente?

