

rea[®]

Dahlia[®]



**Le fauteuil multi-positions
compact et maniable !**



Yes, you can.

Invacare® **Rea Dahlia**, avec sa faible largeur hors-tout et son design moderne, propose de nombreuses possibilités de réglages et d'inclinaisons. Polyvalent, ce fauteuil roulant multi-positions est idéal pour les utilisateurs à la recherche de mobilité et de maniabilité tout en ayant un niveau de confort optimal.

Le **Dahlia** dispose de deux angles d'inclinaison d'assise, soit de 30° soit de 45°, et d'une inclinaison de dossier de 30° ce qui améliore les capacités de positionnement et permet de faire varier les points de pression. Le **Dahlia** partage de nombreux éléments avec les autres fauteuils de la famille Rea ce qui facilite sa personnalisation.

Un transfert de poids tout en douceur

La bascule d'assise à 45° permet un soulagement important des zones de pression les plus vulnérables de l'utilisateur. La conception unique du mécanisme d'inclinaison permet de basculer l'assise en douceur, nécessitant peu de force musculaire pour la tierce-personne.



Un fauteuil au service de la mobilité

Le **Dahlia** équipé de la bascule d'assise à 30° est adapté aux utilisateurs plus actifs qui ont notamment la capacité de se propulser. La hauteur sol/siège peut être réduite à seulement 330 mm pour ainsi permettre à l'utilisateur de se déplacer par traction podale. En option, l'utilisateur peut avoir accès à la manette d'inclinaison d'assise limitée à 10° pour gérer de manière autonome sa position.



Dahlia 30° avec hauteur d'assise à partir de 330 mm pour permettre la traction podale.



Dahlia 30° avec auto inclinaison d'assise pour l'utilisateur qui peut changer de position de manière autonome.

Disponible avec accoudoirs réglables en largeur ou fixes.



Dahlia 45° pour un transfert des points de pression optimal.



Dossier inclinable à 30° avec système de compensation pour limiter les effets de cisaillement.

Caractéristiques et options



◀ Avantages pour Dahlia 30° et 45°

- Facile à manoeuvrer par l'utilisateur grâce aux roues arrière positionnées au plus près de lui
- Largeur totale réduite : +180 mm par rapport à la largeur d'assise pour un encombrement limité
- Facile à incliner grâce à des mécanismes fluides et nécessitant peu d'efforts
- Nombreux éléments compatibles avec les fauteuils Invacare



◀ Dossiers de positionnement Matrix Elite E2

Dossiers légers et ergonomiques en option pour un soutien ferme et confortable. Choisissez un galbe de 80 mm ou de 180 mm en fonction du tonus et de la stabilité du tronc.

- Nouvelle mousse haute résilience ondulée pour une meilleure immersion, réduction du cisaillement et circulation de l'air facilitée pour un meilleur contrôle de la température et l'humidité
- Nouvelles découpes scapulaires et sacrale pour un maximum de liberté de mouvements



◀ Dual Stability System (DSS)

- Dual Stability System (DSS) qui maintient la stabilité du fauteuil dans toutes les positions de bascule d'assise
- Grâce au point de pivot haut du dossier, les effets de cisaillement sont réduits au minimum lors de l'inclinaison du dossier




◀ Le Dahlia 45° Base désormais disponible

- Châssis pliant en acier
- Largeur d'assise de 390 à 490 mm, réglable à +50 mm
- Inclinaison d'assise jusqu'à 45° par vérins pneumatiques
- Inclinaison de dossier jusqu'à 30° par vis

Données techniques ▼

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

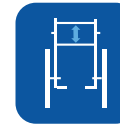								
	Largeur d'assise ▼	Profondeur d'assise ▼	Hauteur d'assise ▼	Hauteur du dossier ▼	Hauteur des accoudoirs ▼	UL ▼	Bascule d'assise ▼	Inclinaison de dossier ▼
Rea Dahlia	390-440/ 440-490/ 490-540 16" (390-490/ 440-540/490- 590 mm)	430 - 500 mm	30° : 330 - 500 mm 45° : 350 - 500 mm	500 - 800 mm (sans coussin d'assise)	250 - 320 mm	330 - 667 mm	30°: -1 - 30° 45°: 0 - 45°	0° - 30°

								
	Largeur hors-tout ▼	Hauteur hors-tout ▼	Longueur hors-tout avec potence ▼	Poids du fauteuil ▼	Poids max. utilisateur ▼	Poids de transport ▼	Rayon de giration ▼	Crash testé ▼
Rea Dahlia	SW + 160 mm (16") SW + 180 mm (24")	30°: 825 - 1250 mm 45°: 850 - 1250 mm	900 - 1195 mm	>35kg ¹	Max 135 kg	21/25 kg (SW 390 mm) ²	755 mm	ISO 7176-19



Pente maximale d'utilisation de freins de stationnement ▼

Rea Dahlia

7°

Pour plus d'informations concernant les options et les accessoires, consultez la brochure Accessoires **Dahlia**.

1. Poids total en largeur d'assise 390 mm et dans la configuration la plus légère. L'option bascules électriques ajoute 4.2 kg au poids de transport.
2. Component Cross-Compatibility: nombreux éléments communs avec les produits de la famille *Invacare® Rea*.




Coloris de châssis ▼



Noir

Coloris de la bande réfléchissante ▼

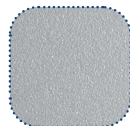


Gris



Bleu



Champagne

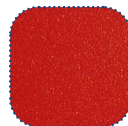

Rouge



Vert pétrole

Revêtement du siège ▼



Revêtement PU noir TR26



Velour noir TR35



Mesh micro-aéré noir TR36