


Flo-tech™ Lite



Coussin galbé offrant un très bon confort et une bonne posture

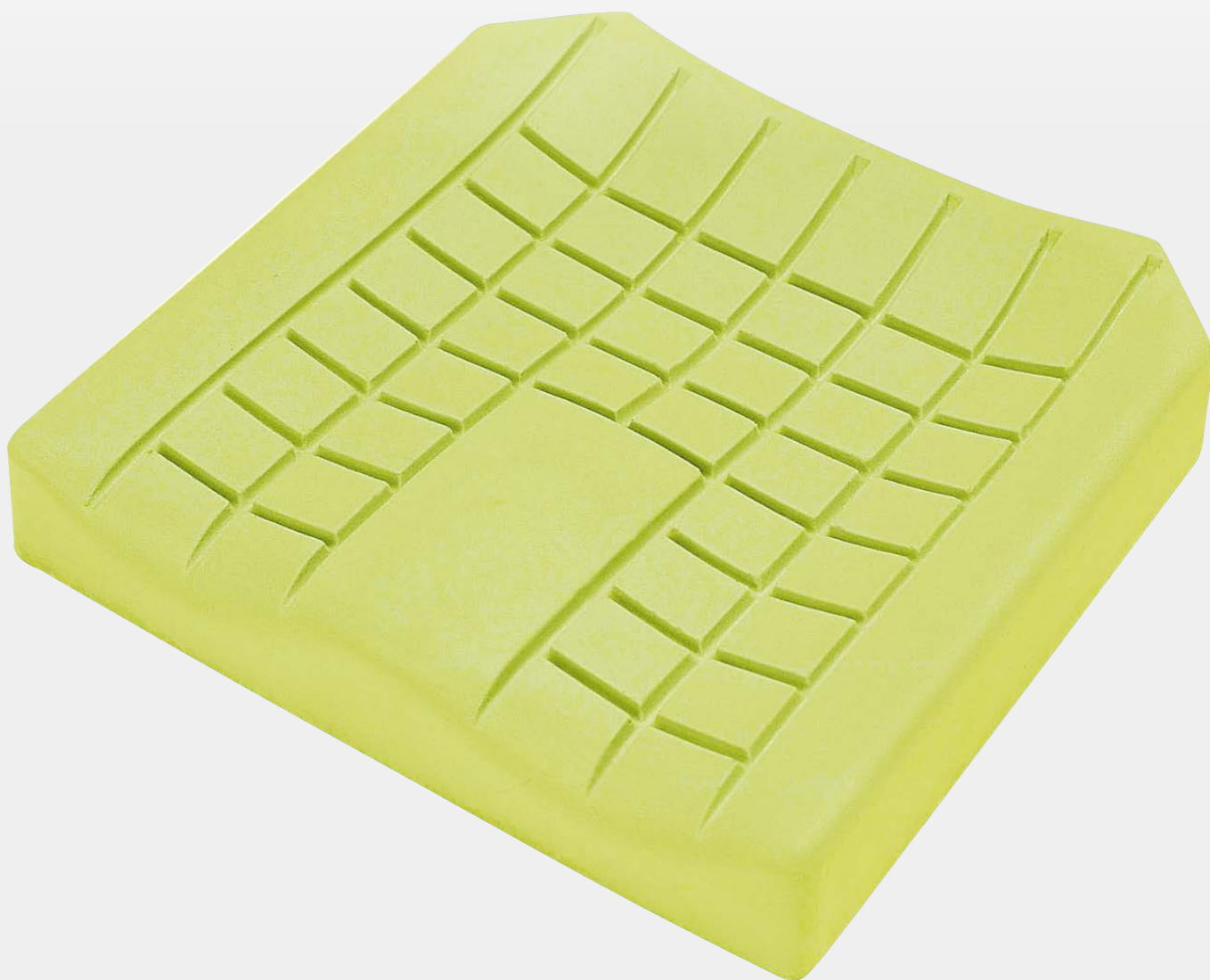

Yes, you can.

Le coussin **Invacare Flo-tech Lite** est un coussin galbé qui convient parfaitement aux utilisateurs présentant un faible risque d'escarres et souhaitant uniquement plus de confort. La surface d'assise galbée offre une bonne stabilité et un bon soutien postural. Avec des tailles à partir de 380 x 405 mm.

Caractéristiques et options



Housse imperméable

La housse est extensible dans les deux sens, résistante à l'eau, dotée d'une base antidérapante et d'une poignée de transport.



Compense l'effet hamac

Sa forme biseautée sous le coussin permet de pallier l'éventuel effet hamac de la toile d'assise et de veiller à ce que le coussin soit correctement positionné.



Traitement Ultra-fresh™ pour une protection contre les bactéries et les odeurs

Tous les coussins sont traités antibactérien pour les rendre résistants à la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs. Il contribue à une fraîcheur plus durable.

Base en mousse galbée de haute qualité.

La mousse haute résiliente est fabriquée à l'aide d'une formule unique offrant des niveaux élevés de redistribution de la pression et améliorant la durabilité du coussin. Le galbe permet au coussin **Flo-tech Lite** d'offrir une forme en 3D, qui ne peut pas être obtenue avec de la mousse coupée. Le pommeau situé à l'avant du coussin permet le bon alignement des membres inférieurs, favorise une bonne posture et permet à l'air de circuler.

Surface d'assise galbée

Offre une bonne stabilité et un bon soutien postural. Permet également une très bonne répartition du poids par rapport à une surface plane. Les contours du coussin permettent un léger mouvement, permettant de réduire les forces de cisaillement et de frottement.

Données techniques


Pour obtenir des informations complémentaires, y compris le manuel d'utilisation, veuillez consulter le site d'Invacare.

	Différentes tailles	Hauteur	Poids total du produit	Poids max. utilisateur ¹	Température de lavage maximale
Flo-tech Lite	Une douzaine de tailles disponibles	78 mm	1.5 kg	127 kg	80°

Fabriqués selon les normes européennes : BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match et BS 7176 (Crib 5)

1. Les limites de poids maximales de l'utilisateur sont fixées en supposant que le coussin choisi est d'une largeur et d'une profondeur adaptées aux utilisateurs prévus.

Couleurs

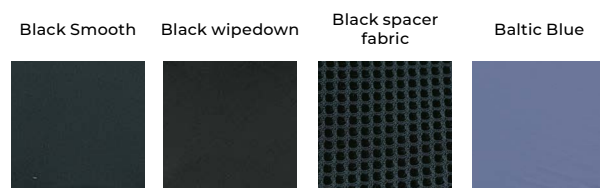

Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-38
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Invacare AG
Neuhofweg 51
4147 Aesch BL
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch



Yes, you can.®