



Küschall® COMPACT

POLYVALENCE
& CONFORT
RÉUNIS



Küschall.com



*PLIANT
& LÉGER*

COMPACT

Le Küschall Compact est la référence absolue en matière de **fiabilité et de qualité dans le domaine des fauteuils roulants pliants**. Il s'adapte facilement à différents besoins pour optimiser le confort global. Disponible avec des potences fixes, il offre rigidité et d'excellentes performances de conduite. En potences escamotables, les transferts sont facilités, tout comme le rangement et le transport.

*CONFORT
AMÉLIORÉ*





DES FONCTIONNALITÉS EXCEPTIONNELLES

Grâce à son dossier rabattable, ce fauteuil est peu encombrant et facile à transporter. Les potences sont disponibles avec un angle de 70° ou 80°, en version fixes ou escamotables.



DÉCOUVREZ LE COMPACT CARBONE

Un petit détail. Une différence notable. Les potences en carbone, confèrent au Compact une finition plus légère et plus raffinée. Une amélioration subtile qui rehausse à la fois le confort et l'esthétique générale, sans compromettre la fiabilité sur laquelle vous comptez.



Scannez
pour en
savoir plus !

Donnez une touche d'élégance à votre Compact et roulez en toute confiance grâce à une touche de carbone.

C

-200g*

* sur le poids complet du fauteuil



Küschall®
COMPACT





REGARDEZ DE PLUS PRÈS

PLIAGE FACILE

La conception unique du croisillon permet de plier facilement le Compact, avec un seul doigt : une caractéristique essentielle si vous manquez de force ou si la mobilité de vos mains est réduite.

DOSSIER RABATTABLE

Le dossier réglable en inclinaison et rabattable sur l'assise se replie facilement sur l'assise pour un rangement compact et un transport aisé.

KEEP ON TRACK*

Un système de réglage des roues avant intuitif et unique, conçu pour garantir que votre fauteuil roulant fonctionne toujours de la manière la plus économe en énergie possible, ce qui facilite la propulsion sur de plus longues distances.



POTENCES

Optez pour un fauteuil roulant équipé de potences escamotables, parfait pour le transport ou les transferts, ou de potences fixes 70° ou 80° pour une plus grande rigidité et un look dynamique.

Küschall® | e

Potences en carbone disponibles pour un rendu plus léger et plus raffiné

PALETTES

Les palettes s'adaptent à toutes les largeurs de siège et sont dotées d'une surface antidérapante pour un confort et un maintien accrus.


* : Réglage du parallélisme



PERSONNALISEZ VOTRE COMPACT

1. COLORIS DE CHÂSSIS

Coloris standards

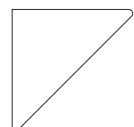

Blanc Éclatant



Gris Anthracite



Noir Spatial



Rouge Carmin



Bleu Azur

Coloris additionnels*




Jaune Flashy



Noir Brillant



Gris Argent

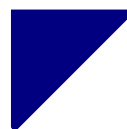

Bleu Nuit
Nacré



Rouge Rubis



Orange
Dynamite



Vert Forêt

* Délais de livraison rallongés

2. STYLE DE DÉCALCOMANIE



3. COLORIS DE DÉCALCOMANIE



Rouge



Noir



Gris Clair



Doré



Rouge



Bleu



Gris Foncé



Noir

4. UNIQUE

Créez votre nouveau fauteuil roulant Küschall de A à Z grâce à UNIQUE. Ce service sur mesure vous permettra de concevoir un fauteuil personnalisé, adapté à vos besoins et à votre mode de vie.

unique
Designed by you. Built by us.





DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR D'ASSISE 280 – 500 mm par pas de 20 mm	PROFONDEUR D'ASSISE 280 – 500 mm par pas de 20 mm	DISTANCE UL 200 - 510 mm par pas de 10 mm	HAUTEUR DE DOSSIER 300 – 510 mm par pas de 15 mm	ANGLE DE DOSSIER 82°/86°/90°/ 94°/98°/102°
				
HAUTEUR D'ASSISE Avant : 380 – 530 mm Arrière : 370 – 500 mm par pas de 10 mm	ANGLE DE CHÂSSIS 70° / 80° Droit ou avant rétréci	LARGEUR TOTALE Largeur d'assise + 160 mm	LARGEUR TOTALE PLIÉ Approx. 290 mm	LONGUEUR TOTALE Châssis 70° approx. 870 – 1220 mm Châssis 80° approx. 850 – 1200 mm
				
CARROSSAGE 0° / 3°	POIDS TOTAL Approx. 10.3 kg (potences escamotables) Approx. 9.6 kg (châssis fixe)	POIDS DE TRANSPORT Approx. 7.8 kg (potences escamotables) Approx. 6.7 kg (châssis fixe)	POIDS MAX. UTILISATEUR 130 kg	CRASH TEST Conforme à la norme ISO 7176-19
				

Toutes les mesures et poids indiqués sont basés sur la configuration la plus légère et la plus compacte possible dans une largeur d'assise de 400 mm et une profondeur d'assise de 400 mm.
Les poids et les mesures peuvent changer en fonction de la configuration du fauteuil. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site internet.

/ UNLIMIT YOUR WORLD *

Tél. +41 (0) 61 487 70 80
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch/fr

Invacare AG
Neuhofweg 51
4147 Aesch
Switzerland



Küschall est une marque déposée. Tout a été mis en œuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible au moment de l'impression. Dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, Invacare International GmbH se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés.

© August 2026, Invacare AG Tous les droits sont réservés. CH

* : Votre monde sans limite