

Bitte vollständig ausfüllen!

Anfrage
 Bestellung

Bestellerangaben

 Kundennummer

 Firmenadresse ggf. Firmenstempel

Datum, Unterschrift


Kommission

Wir passen den Lifter individuell an Ihre Badewanne an!

Freistehende Wanne

ja _____ nein _____


Vermaung fr Badewannenliffter mit Sonderseitenklappen

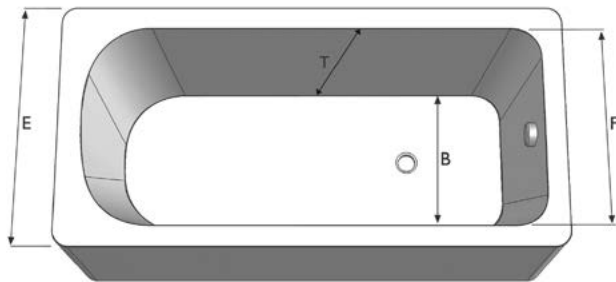

B	Wannenbreite unten Nicht mglich bei: < 280 mm / > 600 mm	mm
E	Wannenbreite oben (auen)	mm
F	Wannenbreite oben (innen)	mm
T	Wannentiefe* Wannentiefe >= 430 mm – dann Hhenadapter ntig. Max. 3 Hhenadapter je 2 cm mglich.	mm

Achtung:
 Differenz zwischen "E" und "F" muss mindestens 60 mm betragen.
 E - F = > 60 mm, mindestens 30 mm pro Seite

Zustzliche Vermaung bei ungleichen Seitenklappen

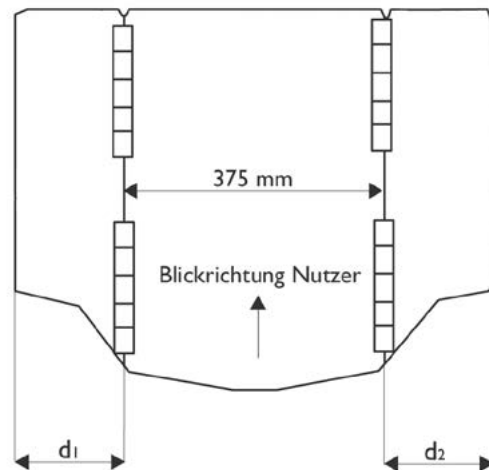

Seitenklappenbreite:
 d1; d2 max.: 300 mm
 d1; d2 min.: 100 mm

d1	Breite Seitenklappe links	mm
d2	Breite Seitenklappe rechts	mm

Sondersitzbezug

Fr Bezge fr Sitzplatten mit Sonderseitenklappen – bitte unbedingt folgende Mae angeben;
d1 + 375 mm (Sitzplattenbreite) + **d2**

d1	Breite Seitenklappe links	mm
	Breite Sitzplatte	375 mm
d2	Breite Seitenklappe rechts	mm

* Legen Sie dazu bitte eine Holzplatte oder hnliches quer von Rand zu Rand und messen Sie die Tiefe in der Mitte der Wanne.

Fr die Vollstndigkeit und Richtigkeit der Maangaben haftet der Besteller!