Aide Technique à la posture

Mobilisation. Prévention. Confort



Ergonomie et Confort

Positionner les patients, Apporter Confort et Prévention


Gamme d’aide technique à la posture pour repositionner le patient dans une approche de prise en charge globale de l’escarre.

Indications thérapeutiques

> Aider à la prévention ou au traitement d’une escarre
> Assurer un maintien postural et corriger les attitudes vicieuses
> Faciliter les soins pour les soignants et aidants.

Lejrelet Tube 125

Le coussin LEJRELET Tube 125 mesure 125 cm de long, ce qui le rend idéal pour être placé devant la poitrine ou dans le dos afin de créer une position confortable et relaxante pour effectuer une décharge latéral 30°. Il peut également être utilisé pour aider à soutenir les clients qui ne peuvent pas se tenir droits en position couchée sur le côté.

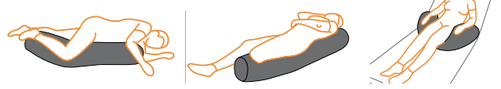




> **Soutien de la poitrine et du dos**
Idéal pour être placé devant la poitrine ou dans le dos en position couchée sur le côté.

> **Pour enfants et adultes**
Procure confort, stimulation tactile et stabilité positionnelle grâce à sa composition en fibres de mousse viscoélastique.

Lejrelet Wedge Plicature des genoux

Ce coussin triangulaire est conçu en fonction de l’anatomie de la poitrine humaine. Cela rend le coussin de soutien particulièrement adapté à un placement devant la poitrine ou dans le dos du client pour effectuer une décharge ou soutenir une posture semi-fowler.



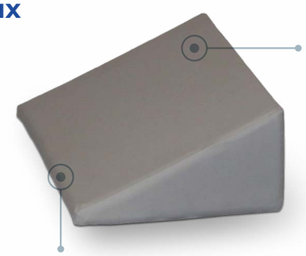



> **Mousse double couche**
Noyau ferme associé à une surface soulageant la pression pour plus de stabilité et de confort et une meilleure redistribution des pressions.

> **Forme anatomique**
Forme ergonomique conçue pour accompagner un repositionnement latéral ou une position semi-fowler.

Lejrelet Rectangulaire

Ce coussin de maintien soulageant la pression mesure 15 cm de haut, assurant une position neutre de la hanche et du bassin du patient lorsqu’une jambe est placée sur le coussin en position couchée sur le côté. Cela permet d’éliminer les torsions douloureuses dans le bas du dos, qui sont par ailleurs fréquentes dans cette position.

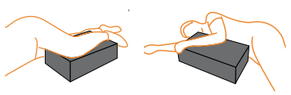

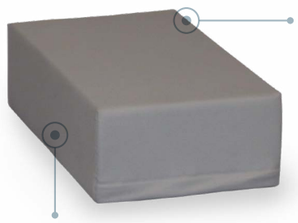

> **Housse de qualité**
Tissu 4 D multi extensible, perméable à la vapeur d'eau et imperméable aux liquides, facilement nettoyage qui protège du risque infectieux.

> **Position neutre des hanches et du bassin**
Contribue à éliminer les douleurs lombaires dues aux torsions en position couchée sur le côté.

Lejrelet Oval

Le LEJRELET Oval est l’un des plus petits coussins de positionnement du marché, ce qui le rend idéal pour apporter ce petit soutien supplémentaire dont vous avez souvent besoin lorsque vous utilisez des coussins de maintien plus grands. Par exemple, il peut servir de coussin de soutien lombaire, de coussin d’abduction du genou ou de support pour une main parétique.



> **Micro-maintien**
Idéal comme support lombaire, coussin d’abduction du genou ou support pour la main.


> **Forme de beignet à la demande**
Moules de remplissage en granulés de mousse pour soulager la pression sur les oreilles, les coudes et les mains.



Talonnière Maxxcare®
Protège. Soutient. Soulage.

La talonnière Maxxcare a été développé par Vicair, entreprise connue pour ses coussins uniques spécialisés, qui offrent une redistribution supérieure de la pression et un positionnement optimal. Grâce à cette expertise, la talonnière Maxxcare a été développée à partir d’un matériau durable à faible friction à l’extérieur, et d’un revêtement doux et confortable à l’intérieur.
Quatre tubes d’air amovibles forment un coussin d’air confortable autour du pied pour une protection complète du pied et de la cheville.



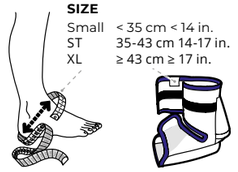



> **Il y a une étiquette** sur l’avant de la botte qui peut être complétée avec les informations du patient pour des besoins d’identification. La botte est bordées de surpiqûres solidement cousues pour plus de confort autour de la cheville, du mollet et des orteils.

> **Les sangles velcro réglables**
assurent le meilleur ajustement possible pour les patients pour un positionnement sécurisé. Si nécessaire, la botte peut être lavée à la machine sans retirer les coussins d’air.

> **La talonnière Maxxcare**
décharge efficacement les talons vulnérables.



Guide de prescription

Prescripteurs
Médecins. Ergothérapeutes sous conditions.

Libellé de prescription
L'état de santé de M. ou Mme X nécessite la délivrance d'un coussin de positionnement des hanches et des genoux, [**STANDARD** ou **MODULAIRE base** +(N) plot(s)] pour un usage en position allongée.

Renouvelable tous les 2 ans


STANDARD

> Remboursement
173,79€ TTC

Lejrelet Tube 125



Lejrelet Wedge

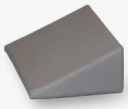

Code LPP 6245814 Coussins de série de positionnement, **STANDARD**, des hanches et des genoux, DHCare.

BASE

> Remboursement
129,58€ TTC

Lejrelet Rectangulaire



Code LPP 6245702 Coussins de série de positionnement, **MODULAIRE**, des hanches et des genoux, **BASE**, DHCare.

PLOT

> Remboursement
41,16€ TTC

Lejrelet Oval



Code LPP 6225094 Coussins de série de positionnement, **MODULAIRE**, des hanches et des genoux, **PLOT**, DHCare.

TALONS

> Remboursement
16,01€ TTC



Code LPPR : 6235543 - ESCARRES, ACC, COUSSIN DECHARGE DU TALON, COUDES OU GENOUX

Le(s) coussin(s) de positionnement plot(s) doivent être prescrits avec un coussin modulaire, base, (code lpp 6245702), et jusqu'à 4 plots maximum par prescription.

Caractéristiques techniques

		Dimensions	Poids	Garantie
5000000	Lejrelet Tube 125 Décubitus 30°	Ø 25 x L 125	2350 gr	2 ans
5000002	Lejrelet Wedge Plicature des genoux	H 15 x W 30 x L 50	550 gr	2 ans
5000021	Lejrelet Rectangulaire	H 15 x W 30 x L 50	800 gr	2 ans
5000009	Lejrelet Oval	H 10 x W 25 x L 40	350 gr	2 ans
060004	Maxxcare protège-talon	Taille Small	100 gr	2 ans
060001	Maxxcare protège-talon	Taille Standard	100 gr	2 ans
060003	Maxxcare protège-talon	Taille x-Large	100 gr	2 ans

Tel: +33 2 47 62 64 00
contactfr@dhcare.com
www.dhcare.fr

DHCare France SAS
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France

© 2026 Invacare International GmbH. Tous droits réservés. Toutes les informations citées sont considérées comme exactes au moment de l'impression. Invacare se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans consultation préalable. Aide techniques_FR_11092026