



matrx[®]MAC



MODULARER POSITIONIERUNGSRÜCKEN

Individuell anpassbar





matrx® MAC

Nach therapeutischen Maßstäben entwickelt

Matrx® MAC ist unser neuer Ansatz für eine maßgeschneiderte Positionierung: Ein neuer, anpassbarer Konturrücken mit einem optionalen HUG Kisseinsatz.

INDIVIDUELL ANGEPASST

Der Matrx MAC ist individuell konfigurierbar und so konzipiert, dass er den Bedürfnissen vieler verschiedener Körperformen und -größen gerecht wird. Er lässt sich flexibel an verschiedene Körperformen anpassen und kann auch nachträglich bei Veränderungen im Krankheitsverlauf modifiziert werden.

Matrx MAC ist eine neue Möglichkeit für individuelle Anpassung und Positionierungen.



PRÄZISION

Jedes Modell, das von unserem klinischen Experten-Team entwickelt wurde, zielt auf Effizienz, Qualität und eine präzise Passform ab. Kombinieren Sie aus unserem Portfolio an lateralen Stützen für eine maßgeschneiderte Passform.



ERGONOMISCHES DESIGN

Geformte Konturen und ein optionaler HUG-Kisseinsatz ermöglichen ein zusätzliches Einsinken und eine verbesserte Druckverteilung.



UNTERSTÜTZUNG

Basierend auf dem anatomisch geformten Matrx Elite E2-Rücken fördert der Matrx MAC eine gute Körperhaltung und eine verbesserte natürliche Sitzposition.

m Modular für individuelle Passform

Matrx® MAC ist eine modulare Lösung, die sich am besten für Rollstühle mit Kantelungsfunktion eignet. Er bietet austauschbare und beidseitig verwendbare Seitenpelotten, die je nach Bedarf kombiniert werden können. Somit ermöglicht Matrx MAC eine maßgeschneiderte Passform für Personen mit komplexeren Positionierungsanforderungen.

ANPASSUNG

3 Konturtiefen und asymmetrische Konturen





m Hilft bei der Korrektur leichter Skoliose

Ein posturaler Kollaps kann die Funktion der inneren Organe beeinträchtigen. Der Matrx MAC fördert eine natürlich ausgerichtete Wirbelsäule und Körperhaltung.



VERSTELLBARE BREITE UND HÖHE

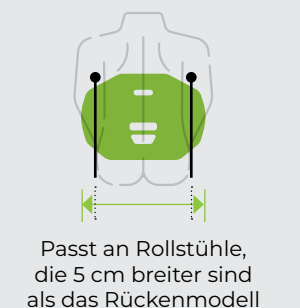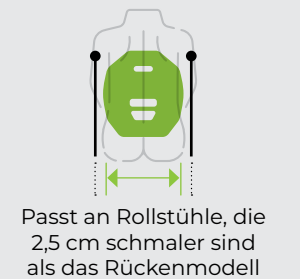

Wählen Sie Matrix HUG für fortgeschrittenen Komfort

Optionaler HUG-Kisseneinsatz, ausgestattet mit weicher, bequemer Stamina Fibre® für ein bestmögliches Einsinken

- Mikroklimakontrolle
- Hypoallergen
- Maschinenwaschbar & trocknergeeignet
- Formbeständig

Empfohlen für leichte Haltungsasymmetrien.

Jeder liebt ein weiches HUG-Kissen, so angenehm wie eine Umarmung!

matrx[®]HUG


Matrx[®] SHAPE ist eine optionale Ergänzung zu Matrx[®] MAC und ermöglicht eine noch gezieltere Anpassung für optimalen Kontakt zur Rückenstütze.

- Mehrere Schaumstoffquader ermöglichen eine individuelle Konfiguration
- Platz für bis zu 25 frei positionierbare Schaumstoffquader
- Geeignet für eine Vielzahl von Anpass- und Positionierungsrücken



matrx[®]SHAPE

OPTIONALER KISSENEINSATZ

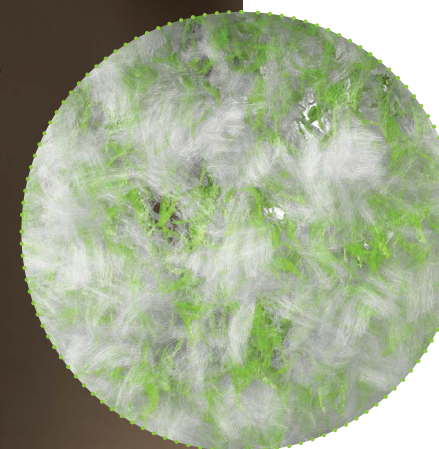

Stamina Fibre®



STANDARD



Doppelschichtiger Schaumstoff

Superweiche/feste HR-Schaumstoffschichten für maximale Unterstützung

OPTIONAL



HUG-Kissen

Weiche, anpassungsfähige Stamina Fibre® für bestmögliches Einsinken

m Ein Blick aufs Detail

Der Matrix® MAC verfügt über eine ergonomisch geformte Rückenschale, die auf dem bewährten Matrix® Elite E2 basiert, mit zusätzlicher Schulterblattunterstützung für Rollstühle mit Kantelungsfunktion.

KOPFSTÜTZEN-AUFNAHME

Heavy-Duty-Aufnahme inklusive

MITTELTEIL

Doppelschichtiger Schaumstoff oder HUG mit Stamina Fibre® (nicht abgebildet)

MONTAGE-WERKZEUG

Ermöglicht eine einfache Ausrichtung der Halterung und der seitlichen Pelotten während der Montage.



KOMBINIEREN & ANPASSEN

Invacare Matrix MAC ist mit austauschbaren, beidhändig verwendbaren Seitenpelotten ausgestattet, die individuell kombiniert werden können.

BREITENANPASSUNG

Die beidseitig verwendbaren, austauschbaren Seitenpelotten sind unabhängig voneinander in der Breite um 3 cm anpassbar.

TIEFENANPASSUNG

3 verschiedene Profile bieten 3 Konturtiefen.

HÖHENANPASSUNG

Die Seitenpelotten können unabhängig in der Höhe angepasst werden, selbst während der Nutzer im Rollstuhl sitzt.



Invacare Matrix Halterungen



EASYSET-HALTERUNG

Standard bei allen 46 - 56 cm hohen Positionierungsrücken. Schnellverschluss für schnelles Abnehmen und einfachen Transport.



EASYSET HALTERUNG HEAVY DUTY

Empfohlen für schwere Nutzer oder Nutzer mit einem hohem Muskeltonus.



SPLIT-HALTERUNG













Ermöglicht die Montage bei Rollstühlen mit festem Rückenbügel (Starrrahmen-Rollstühle). Schnellverschluss für schnelles Abnehmen und einfachen Transport.



FESTE MINISET-HALTERUNG

Fest montiert; erfordert Werkzeug zum Entfernen; Empfohlen bei Rollstühlen mit Kantelungsfunktion.

Rückengrößen

		BREITE				
		41cm	43cm	46cm	48cm	51cm
HÖHE	Passend für Sitzbreiten	39-46cm	41-48cm	43-51cm	46-53cm	48-56cm
	41cm					
	46cm					
	51cm					
	56cm					

Technische Daten

- Winkelverstellung 40°
- Tiefenverstellung 10 cm
- Seitliche Kontur 9, 15, 23 cm
- Seitliche Breitenverstellung 2,6 cm
- Seitliche Höhenverstellung 20 cm
- Bezug Reinigung 60°C
- Max. Benutzergewicht 136 kg
- Garantie 2 Jahre



● Invacare Matrix MAC abgebildet mit Matrix Loxx Kopfstütze in einem Invacare Rea Azalea.



Die Matrix® MAC-Rückenlehnen, die für den Transport eines Nutzers verwendet werden, sollten mit einer Kopfstütze ausgestattet sein und dürfen nur in Verbindung mit Rollstühlen verwendet werden, die den Leistungsanforderungen von RESNA WC19 oder ISO 7176-19 entsprechen.



Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Invacare AG
Neuhofweg 51
4147 Aesch BL
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

©2025 Invacare International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser Broschüre enthaltenen Informationen sind zur Zeit der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen korrekt. Invacare behält sich das Recht vor, Produkteigenschaften ohne vorherige Absprache zu ändern. MATRX BACK 07/2025 - 1653084