

Küschall®

K-SERIES



INDIVIDUELLE
POSITIONIERUNG
FÜR EIN AKTIVES
FAHRERLEBNIS



Küschall.com

INDIVIDUELL
ANPASSBAR



STARR UND
DYNAMISCH



K-SERIES

Die K-Series ist eine Stilikone, ein Vorreiter in der Konstruktion von Einrohrrahmen.

Das raffinierte, modulare Sitzsystem passt sich buchstäblich an deine Bedürfnisse an und die dynamische Aufmachung bietet dir eine hervorragende Fahrleistung, damit du gerne auf Achse bist. Worauf wartest du noch?





BEFREIE DEINE WELT VON GRENZEN


Mit modernster Technologie und eleganter Ästhetik bleibt die Küschall K-Series dem Küschall-Design von Leichtigkeit und Minimalismus treu. Dieser Stuhl verspricht Flexibilität und Freiheit, damit du mühelos die Welt entdecken kannst.





MODULARES SITZSYSTEM

Nicht zu sehen, aber mit großer Wirkung:
Wenn du das Sitzmodul nach vorne oder
hinten verstellst, beeinflusst dies das
Fahrgefühl enorm. Fünf Positionen stehen
dir dafür zur Verfügung. Es lässt sich leicht
im Nachhinein ändern, ohne dass dafür
Zusatzkomponenten nötig sind.

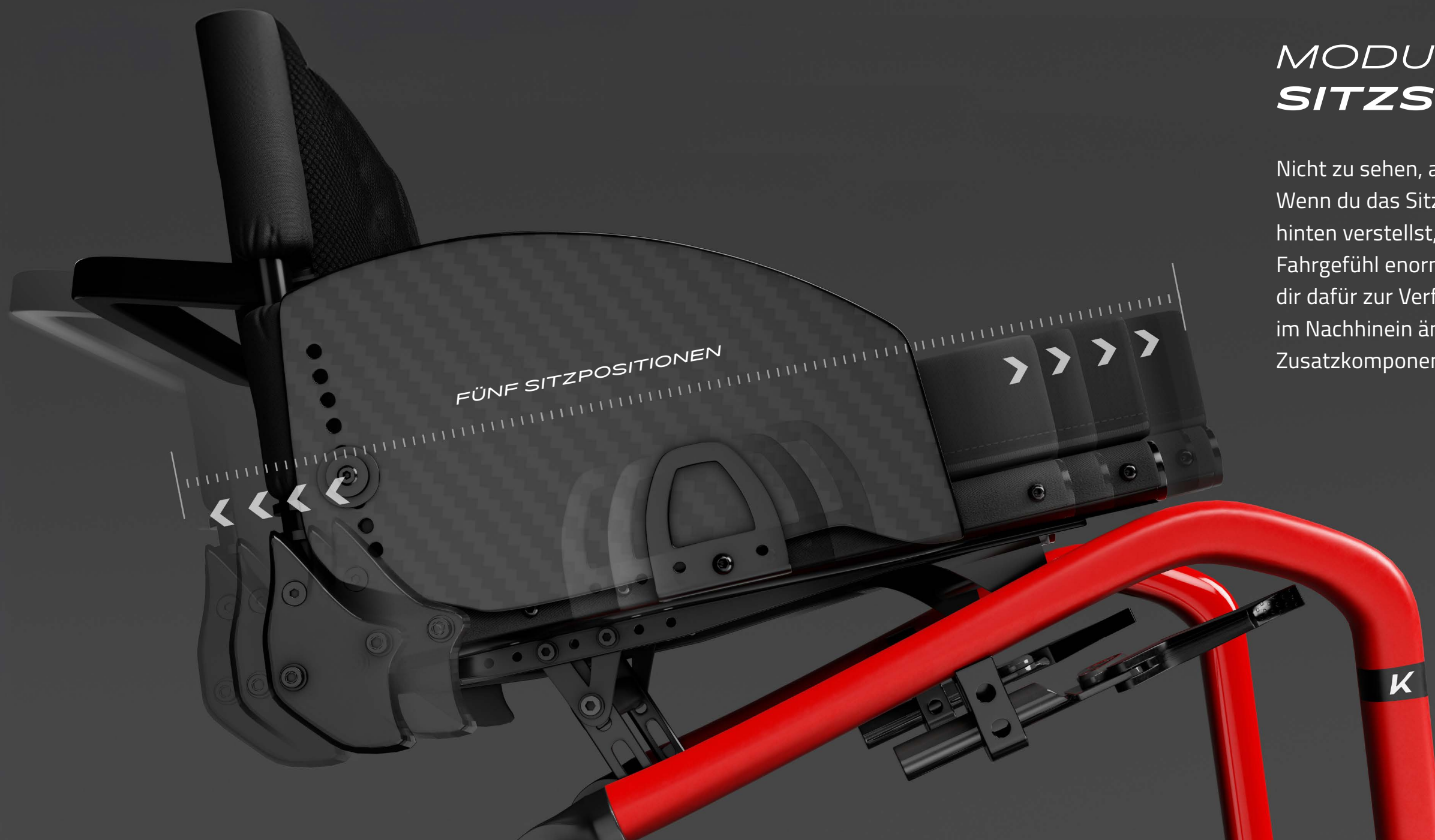



DYNAMISCHES FAHRVERHALTEN

Die Aufnahmen der Vorderradgabeln sind fest mit dem Rahmen verschweißt - das sorgt dafür, dass die Position der Vorderräder stets optimal ist. Zusätzlich steigert dies die Steifigkeit. Das Gesamtergebnis: eine starre Konstruktion für ein einzigartig dynamisches Fahrverhalten!



WIR STELLEN VOR: **K-SERIES CARBON**

Mehr Effizienz. Mehr Dynamik. Mehr Performance.


Die K-Series Carbon verbindet ikonisches Design mit den Vorteilen von Carbon – für maximale Kraftübertragung und ein außergewöhnlich direktes Fahrgefühl.



Hier scannen,
um zum Video
zu gelangen

Bewährtes minimalistisches und
modulares Design, mit Carbon veredelt.

C

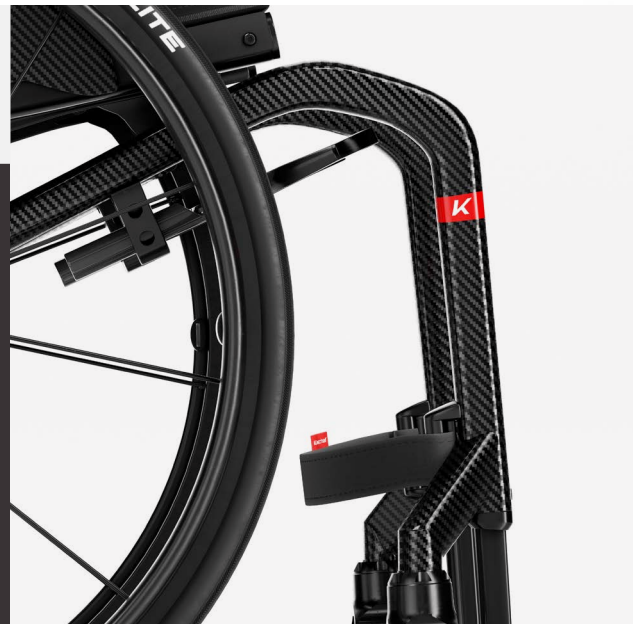

-290g*

*Reduziertes Gesamtgewicht im
Vergleich zur K-Series in Standard-
Aluminium.



Küschall®
K-SERIES





SCHAU GENAU HIN

RÜCKENBÜGEL

Beim Verladen zeigt sich der Vorteil: Der ergonomische Rückenbügel erleichtert das Anheben des Rollstuhls. Er ist niedriger positioniert, wodurch sich die K-Series ideal mit Invacare Matrix® Positionierungsrücken kombinieren lässt.

RÜCKEN

Der Rücken lässt sich mit sechs verschiedenen Winkeleinstellungen nach Belieben positionieren. Für den Transport kannst du ihn auf das Sitzmodul abklappen.

SITZMODUL

In der Küschall K-Series sitzt du mitten drin: Deinen Schwerpunkt kannst du auf fünf Positionen einstellen – je nachdem, wie aktiv das Fahrverhalten sein soll.

Küschall® |

OPTIONAL MIT LEICHTEM CARBONRAHMEN

Verbessert die Fahreigenschaften und verleiht dem Rollstuhl eine markante Optik.



HYDROGEFORMTER, KANTIGER VORDERRAHMEN

Die Kante ist perfekt zum Abstützen und Umsetzen. Zugleich sieht der Rollstuhl dadurch richtig gut und modern aus. Beim Rahmenwinkel kannst du zwischen 90° und 75° wählen.

LEICHTE AKTIV-BREMSE

Die Aluminiumbremse ist minimalistisch, leicht und wirkt präzise bis ins letzte Detail.

ADDUKTIONSRAHMEN

Der Adduktionsrahmen wird nach unten schmaler und unterstützt somit perfekt deine natürliche Beinhaltung.

FUSSBÜGEL


Minimalistisch, starr, cool: Der Fußbügel verleiht deinen Füßen einen sicheren Stand. Die Oberfläche ist abgeflacht und somit bequemer.



DEINE K-SERIES – DEIN STYLE!

1. WÄHLE DEINE RAHMENFARBE*

Standard-Farben

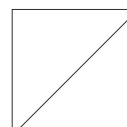

Verkehrs-
Weiß



Anthrazitgrau



Tiefschwarz



Karminrot



Verkehrsblau

Weitere Rahmenfarben*



Knallgelb



Schwarz-
Glanz



Silbergrau



Perlnachtblau



Rubinrot





Dynamite-
Orange



Waldgrün

*verlängerte Lieferzeit

2. WÄHLE DEIN RAHMENDESIGN

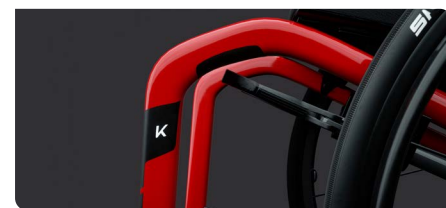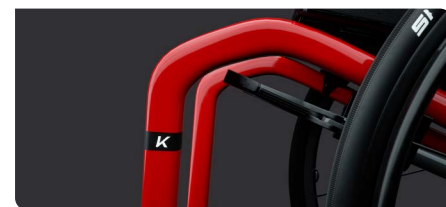

3. WÄHLE DEINE LOGO-FARBE



Rot



Schwarz



Hellgrau



Gold



Rot



Blau



Dunkelgrau



Schwarz

4. UNIQUE SERVICE

Erstelle Deinen individuellen Küschall-Rollstuhl von den Rädern an. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, denn der Rollstuhl passt sich Dir und Deinem Lebensstil an – mit maßgeschneiderten Lösungen und personalisiertem Design.

UNIQUE
Designed by you. Built by us.





TECHNISCHE DATEN

SITZBREITE

320 – 500 mm
in 20 mm Schritten



SITZTIEFE

350 – 525 mm
in 25 mm Schritten



UNTERSCHENKEL- LÄNGE

290 – 480 mm
in 10 mm Schritten



RÜCKENLEHNEN- HÖHE

270 – 480 mm
in 15 mm Schritten



RÜCKENLEHNEN- WINKEL

74° / 78° / 82° /
86° / 90° / 94°



SITZHÖHE

Vorn: 450 – 520 mm
Hinten: 390 – 490 mm
in 10 mm Schritten



RAHMENWINKEL

75° / 90°



GESAMTBREITE

ca. 490 - 805 mm



GESAMTLÄNGE

75° ca. 830
90° ca. 760



SCHWERPUNKT

5 Positionen



RADSTURZ

0° / 3° / 6°



GESAMTGEWICHT, LEER

ca. 7,5 kg



TRANSPORT GEWICHT

ca. 4,8 kg



MAX. NUTZER- GEWICHT

130 kg



CRASH TEST

Crash getestet gem.
ISO 7176-19



HMV-Nr.:
18.50.03.5011

Alle angegebenen Maße und Gewichte basieren auf einer Sitzbreite von 400 mm und Sitztiefe von 400 mm bei der leichtesten und kompaktesten Konfiguration. Gewichte und Maße können sich bei unterschiedlichen Konfigurationen ändern.

/ UNLIMIT YOUR WORLD

Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Invacare AG
Neuhofweg 51
4147 Aesch BL
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch