



## KOPFSTÜTZEN-SORTIMENT

Kopfstützen revolutioniert auf einem völlig neuen Level.





Bild: Invacare Matrix Elan Kopfstütze mit Standard-Polster



## Klinisches Design

Als weltweit führender Experte im Bereich Sitzen & Positionieren entwickeln wir Invacare Matrix®-Produkte mit innovativen Designs die stets auf klinische Funktionalität ausgerichtet sind.

### PRÄZISION



Jedes Modell wurde unter der Leitung von klinischem Fachpersonal entwickelt und zielt auf Effizienz, Qualität und eine präzise Passform ab.

### KOMFORT



Konturierte, austauschbare Polster mit optionalem HUG-Kisseneinsatz für bestmögliches Einsinken und ein Maximum an Komfort.

### UNTERSTÜTZUNG



Hochgradig anpassbare und anatomisch geformte Designs fördern eine verbesserte, natürliche Haltung zur Maximierung der Fahreigenschaften des Rollstuhls.




## Kopfstützen-Sortiment

Invacare Matrix®-Kopfstützen bieten eine maßgeschneiderte und effiziente Unterstützung, für maximale Funktionalität und somit verbesserte Lebensqualität.

Wir sind davon überzeugt, dass es essentiell ist, von Anfang an die richtige Unterstützung zu schaffen. Deshalb sind unsere Kopfstützen mit einer Vielzahl an hoch konfigurierbaren Halterungsmöglichkeiten erhältlich und mit einer großen Anzahl an stützenden und druckentlastenden Polstern kombinierbar.

## Einfach und intuitiv

Invacare Matrx<sup>®</sup> Loxx<sup>™</sup> ist eine einfache und intuitive Kopfstütze, die einen schlanken aber effektiven Halt ermöglicht. Mit vier Einstellpunkten bietet die Halterung eine Lösung, die für eine Vielzahl von Bedürfnissen geeignet ist.

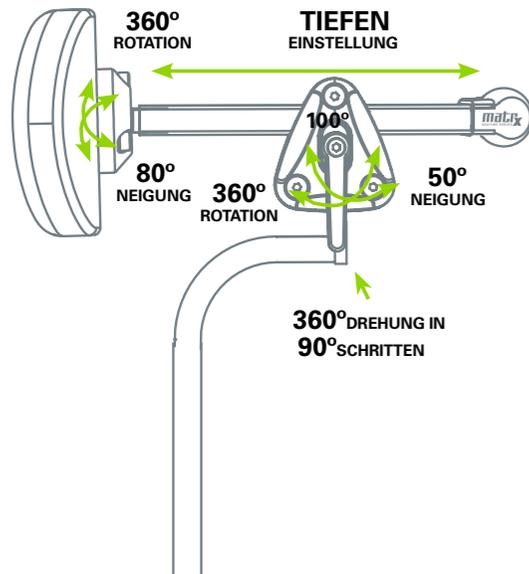

### EINFACHE EINSTELLUNG

Schaffen Sie auf Antrieb die richtige Unterstützung mit dem Verstellhebel, der eine einfache und intuitive Positionierungsänderung ermöglicht. Über den Drehknopf weiter unten kann die Kopfstütze in der Höhe verändert oder entfernt werden.



### SICHERER HALT

Das einzigartige, zum Patent angemeldete, Design ist crashgetestet und gewährleistet einen zuverlässigen und festen Halt.



### EINSTELLBAR

Leichte Kyphosen und asymmetrische Körperhaltungen können berücksichtigt werden, und unterstützen den Nutzer besser in alltäglichen Situationen.

## M Schauen Sie genauer hin



### OPTIMALE AUSRICHTUNG DES POLSTERS

Zwei Drehpunkte und eine Gleitschiene für eine optimale Polsterpositionierung.

### MEHRERE BEFESTIGUNGSPositionEN


Die im oberen Bereich gebogene vertikale Stütze ermöglicht seitlich und nach vorne versetzte Montagepositionen.

### VERBESSERTE SICHERHEIT

Die gut sichtbare grüne Schutzkappe dient als Stoßdämpfer für die Gleitschiene.

## Vielfach einstellbar

Invacare<sup>®</sup> Matrx<sup>®</sup> Elan ist eine kompakte und leichte Kopfstütze mit einer vielseitig einstellbaren Halterung, die maximalen Halt und Komfort bietet. Mit sechs Verstellpunkten ist sie unsere am besten anpassbare Kopfstütze und bietet eine optimale Lösung für die unterschiedlichsten Nutzeranforderungen.

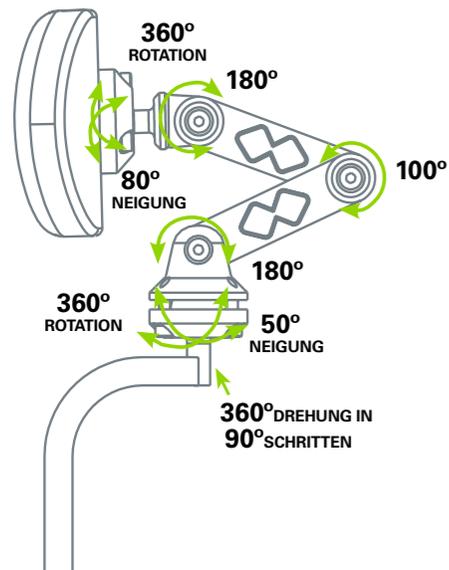

### VIELSEITIG

Die innovative Halterung der Elan Kopfstütze bietet zahlreiche Positionierungsmöglichkeiten für komplexere Bedürfnisse, einschließlich extremer Kyphosen und einer Wegschwenkfunktion für mühelose Transfers.



### STARKER HALT

Das crash-getestete Design besitzt eine innovative Verriegelungsfunktion, die eine hohe Stabilität und einen zuverlässigen Halt bietet.



### EINFACHE EINSTELLUNG

Schnelle Montage mit einem einzigen Inbusschlüssel. Alle weiteren Einstellungen und Positionierungsänderungen können dank der seitlichen Verstellhebel werkzeuglos erfolgen. Über den Drehknopf weiter unten kann die Kopfstütze in der Höhe verändert oder entfernt werden.



## Schauen Sie genauer hin



PREISGEKRÖNTES DESIGN

### ERWEITERTE HALTERUNG

Die Halterung mit einem zusätzlichen Gelenk ist für schwerwiegende Kyphose-Haltungen.

### 2 HALTER

Standard (380 mm) und Mini (280 mm) für die Versorgung erwachsener sowie pädiatrischer Nutzer geeignet.

### GEMOGENE VERTIKALE STÜTZE

Ermöglicht seitlich und nach vorne versetzte Montagepositionen.


# matrix® FLIPP

Die neue optionale Rückklappfunktion ist jetzt bei unseren Invacare® Matrix® Elan- und Matrix® Loxx-Kopfstützen erhältlich. Sie ermöglicht es, die Kopfstütze vorübergehend nach Hinten zu klappen, ohne die ursprünglichen Einstellungen zu verändern oder die Kopfstütze vom Rollstuhl zu entfernen.

Invacare Matrix® FLIPP erleichtert Pflegekräften tägliche Aufgaben wie Transfers, Körperpflege und Hygienemaßnahmen. Diese Funktion kann auch nützlich sein, wenn eine größere Kopfbeweglichkeit vorübergehend gewünscht ist.

## STRUKTURIERTER UND FARBLICH ABGESETZTER KNOPF

Bietet einen visuellen und haptischen Hinweis darauf, wo gedrückt werden muss, um die Verriegelung zu lösen. Kann mit einem Finger bedient werden.

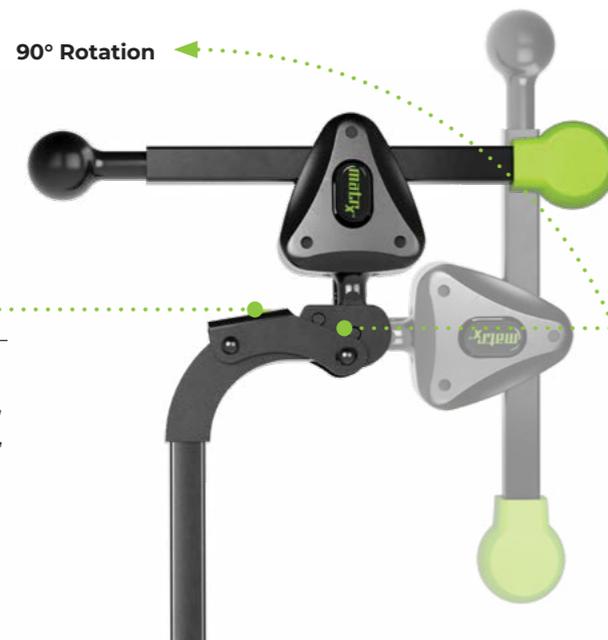

## SICHERHEITSVERSCHLUSS

Der Entriegelungsmechanismus wird deaktiviert, sobald das Kopfstützenpolster belastet wird, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.

NEU

## M Montage und Kompatibilität



## ADAPTEREINSÄTZE

Ermöglicht die Montage von Invacare Matrix®-Kopfstützen an unserer Flex3-Kopfstützenaufnahme.



## MONTAGEPLATTEN-KIT

Im Lieferumfang von Invacare® Matrix® Elan und Loxx™ ist ein Montageplatten-Kit mit einem ergonomischen, flachen Drehknopf enthalten. Damit können die Invacare® Matrix® Kopfstützen an den meisten festen Rückenlehnen befestigt werden – einschließlich der bekannten Invacare® Matrix® Elite E2-Reihe. Der Montageplattensatz enthält auch eine Unterlegscheibe, falls zusätzlicher Spielraum erforderlich ist.

## **m** Kopfstützen-Polster

### KOMFORTABEL

Ein Spezial-Schaumstoff mit doppelter Dichte sorgt für sehr gute Druckverteilung und ein angenehmes Einsinken. Der hochwertige, geformte Schaumstoff überlappt die Ränder der Trägerplatten für zusätzlichen Schutz.

### INDIVIDUELLE PASSFORM

Invacare® Matr<sup>x</sup>® Polster sind im Schnitt um die Hälfte leichter als herkömmliche Polster. Die Aluminiumplatten können individuell angepasst und in die gewünschte Form gebracht werden.

### EINFACHE HANDHABUNG

Die Bezüge sind aus feuchtigkeitsresistentem, atmungsaktivem Startex-Gewebe mit Reißverschluss gefertigt. Sie sind in zwei Versionen erhältlich: Standard- oder Hygienebezug.



### NACKEN-POLSTER

Das Nacken-Polster ermöglicht eine konturangepasste Unterstützung des Hinterkopfes und des Nackens. In zwei Größen verfügbar.



### STANDARD-POLSTER

Das ovale Standard-Polster ist in drei Größen verfügbar und kann für zusätzliche seitliche Unterstützung an die Kopfform des Nutzers angepasst werden.




### VIERPUNKT-POLSTER

Bietet 4 Stützpunkte für den Hinterkopf und den Schläfenbereich des Kopfes. Erhältlich in zwei Größen.

## matr<sup>x</sup> HUG

NEU

Maschinenwaschbare Kissenalternative zum Formschaum. Hergestellt mit Stamina-Fibre® für zusätzlichen Komfort, Atmungsaktivität und Mikroklimakontrolle. Optional erhältlich für das Standard-Polster.

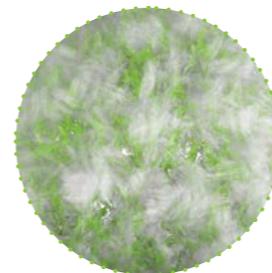

## **m** Optionen



### KOPFBAND

Die bequeme Stirnstütze aus Neopren lässt sich durch einfache Schlüsselbohrbefestigung leicht anlegen. Dank der rutschfesten Oberfläche in der Innenseite des Bandes sitzt es sicher.



## Technische Daten

### POLSTER

#### Standard-Polster

Klein 150x90mm  
Mittel 250x130mm  
Groß 360x130mm

#### Nacken-Polster

Klein 230x180mm  
Groß 310x200mm

#### Viepunkt-Polster

Klein 290mmx180mm  
Groß 280x260mm

### HALTERUNGEN

	Loxx	Elan Mini	Elan	Elan verlängert
 Kopfstützenhalter	380 mm	280 mm	380 mm	380 mm
 Tiefeneinstellung	115 mm	260 mm	260 mm	250 mm +76 mm
 seitlicher Einstellbereich	90° (50 mm)	90° (50 mm)	90° (50 mm)	90° (50 mm)
 Neigungsbereich Halterung	50°	50°	50°	50°
 Neigungsbereich Polster	80°	80°	80°	80°
 Neigung Verbindung	0°	180°+100°+180°	180°+100°+180°	180°+100°+180°
 Rotation	360°	360°	360°	360°

## matrx<sup>®</sup> LIBRA



Bei dem Anti-Dekubitus Sitzkissen Invacare Matrx Libra werden die Vorteile des ergonomisch geformten HR-Kissenschaums und der medizinischen Fluidauflage vereint. Durch das Kissen werden der bestmögliche Schutz vor Dekubitus bei gleichzeitig sehr guten Positionierungseigenschaften erreicht.

## matrx<sup>®</sup> MX2



Das Modell Invacare Matrx MX 2 ist ein sehr leichtes Rückensystem in attraktivem Design: Klare Kanten, trapezförmige Ausschnitte und die Carbon-Struktur machen den Rollstuhl damit zu einem echten Hingucker. Mit diesem Rückensystem erfahren Sie gleichmäßige Unterstützung im unteren Rumpf- und Beckenbereich.

## matrx<sup>®</sup> ELITE E2



Die Invacare Matrx Elite E2 Rückenserie wurde nach therapeutischen Maßstäben entwickelt und verleiht Sicherheit und mehr Freiheit in der Mobilität. Ausgestattet mit der branchenführenden CoolFlo-Schaumstofftechnologie sorgt der Rollstuhlrücken für eine ständige Luftzirkulation und ein angenehmes Sitzgefühl.

## matrx<sup>®</sup> PB



Der Invacare Matrx PB unterstützt den mittleren Rumpf und den unteren Schulterbereich. Der Nutzer wird dank der deutlichen Konturierung sehr gut positioniert. Er ist auch als Heavy Duty (HD) Ausführung für Personen mit bis zu 227 kg erhältlich.

## matrx<sup>®</sup> MAC



Matrx MAC ist eine modulare Lösung, die sich am besten für Rollstühle mit Kantelungsfunktion eignet. Er bietet austauschbare und beidseitig verwendbare Seitenpelotten, die je nach Bedarf kombiniert werden können, für eine maßgeschneiderte Passform bei komplexeren Positionierungsanforderungen.

## matrx<sup>®</sup> HUG



Optionaler HUG-Kisseneinsatz, ausgestattet mit weicher, bequemer Stamina Fibre<sup>®</sup> für ein bestmögliches Einsinken. Mikroklimakontrolle, hypoallergen, maschinenwaschbar, trocknergeeignet und formbeständig. Erhältlich für Matrc MAC Rücken und Matrx Kopfstützen.



\* Invacare® Matrix® Elan® und Invacare® Matrix® Loxx™  
Kopfstützen-Befestigungen haben den Crash-Test bestanden.  
Prüfung gemäß ISO7176-5 (2019) Rollstuhl-Sitzsysteme zur Verwendung in  
Kraftfahrzeugen und ISO 16840-4 (2009) Rollstuhlsitze - Teil 4: Sitzsysteme für die  
Verwendung in Fahrzeugen.



Invacare GmbH  
Am Achener Hof 8  
88316 Isny  
Deutschland  
Telefon +49 7562 700-0  
kontakt@invacare.com  
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH  
Herzog-Odilo-Straße 101  
5310 Mondsee  
Österreich  
Telefon +43 6232 553-50  
Fax +43 6232 553-54  
info-austria@invacare.com  
www.invacare.at

Invacare AG  
Neuhofweg 51  
4147 Aesch BL  
Schweiz  
Telefon +41 61 48770-80  
Fax +41 61 48770-81  
switzerland@invacare.com  
www.invacare.ch

©2024 Invacare International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser Broschüre enthaltenen Informationen sind zur Zeit der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen korrekt. Invacare behält sich das Recht vor, Produkteigenschaften ohne vorherige Absprache zu ändern. MATRIX RANGE 09/2024 - 1653169