

Action<sup>®3</sup>  
NG



A líder de mercado está  
ainda melhor!



# Conheça a famosa **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>**

---

A **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** é fácil de configurar e oferece uma vasta gama de opções e acessórios de compatibilidade cruzada que vão ao encontro das diferentes necessidades dos utilizadores.

Esta compatibilidade cruzada ao longo da família **Action** e outros modelos Invacare permite que os revendedores tenham poucos gastos com stock, além de poderem reutilizar e remodelar as peças de forma a ser funcional e atrativo para o utilizador.

- ▶ A cadeira mais leve neste segmento
- ▶ Estabilidade aumentada para uma condução mais suave
- ▶ Design melhorado para maior suporte



# 4

## CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

1

### Leve e transportável

▶ A **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** está mais leve que nunca e pode ficar ainda mais leve ao usar as forquetas e rodas mais leves que podem reduzir até 1.2kg o peso total da cadeira de rodas (versão **Action<sup>3</sup> Light**). Para complementar o baixo peso de transporte, a cadeira pode ter um encosto dobrável para que seja facilmente desmontada e encartada para fácil arrumação, mesmo em carros mais pequenos.

2

### Conforto e funcionalidade

▶ O mecanismo especial da cruzeta de encartar da **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** melhora a estabilidade e torna ainda mais fácil o encartar e desencartar. Estas características juntas com a nova alavanca de extração dos apoios de braço - para aumentar a funcionalidade dos apoios de braços, sendo mais fácil de os levantar - tornam a **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** uma boa escolha para o máximo conforto.



3

### Adaptável e modular

▶ A compatibilidade cruzada presente ao longo das cadeiras e acessórios da Família **Action** tornam cada cadeira adaptável e modular. Por esse motivo, a **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** está bem equipada para se adaptar às necessidades do utilizador ao longo do tempo, pois é fácil de renovar e tem acesso a uma vasta gama de opções de personalização.

4

### Personalizável

▶ Mais cores e um design melhorado do encosto trazem ainda mais oportunidades para os utilizadores personalizarem a cadeira. A nova tela ocupa todo o espaço dos tubos do encosto para conforto adicional e o encosto inclui agora um apoio lombar para dar ainda mais suporte aos utilizadores.

### ► Leveza

Com um peso total a partir de 13kg e um peso de transporte de 7.1kg (sem apoios de pernas, braços ou rodas traseiras), a **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** conjuga as principais necessidades de manobrabilidade, arrumação e transporte. Além disso, está disponível a versão **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Light** que está equipada de série com vários componentes como rodas traseiras ativas e

forquetas dianteiras ligeiras que tornam a cadeira mais ativa e mais leve.



### ► Encosto regulável em ângulo e rebatível

O design do encosto patenteado, ajustável em ângulo foi incorporado a partir da **Action<sup>5</sup>**, e permite que os ajustes sejam feitos com o utilizador sentado na cadeira de rodas. Além disso, a possibilidade de rebater o encosto reduz o tamanho total da cadeira para arrumação.



#### ▲ Protetores de roupa

O recorte dos protetores de roupa facilita a realização de exercícios de alívio de pressão, assim como nas transferências de e para a cadeira.



#### ▲ Apoios de braços rebatíveis

A alavanca de extração foi redesenhada e assegura um movimento suave quando o utilizador pretende rebater o apoio de braço.



#### ▲ Gancho de fixação para transporte

Um gancho brilhante e colorido permite a fixação da cadeira ao carro de forma simples e segura (opcional).



#### ▲ Apoios de pernas elevatórios com compensação

Os apoios de pernas elevatórios oferecem boa compensação, com a elevação por incrementos de 3°/5° (opcional).



#### ◀ Suporte para amputado

Ajustável em altura, ângulo e profundidade, o suporte para amputado também é rebatível (opcional).



#### ◀ 20 posições das rodas traseiras

A performance de condução é melhorada com a hipótese de ter 20 posições das rodas traseiras, de série.

## Características e opções ▾



### ◀ Invacare Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> versão Light

A versão nova **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Light** é a cadeira mais leve da gama **Action**. Oferece de série rodas traseiras ultraleves com pneus anti-furo, suporte de forquetas mais leves em alumínio, uma tela de encosto em nylon almofadado até 400mm, com punhos curtos e protetores de roupa. Peso total da cadeira 13kg!



### ◀ Versão trânsito

A versão de trânsito oferece alturas do assento de 46, 48,5 e 51cm com rodas traseiras de 12".



### ◀ Almofada envolvente do apoio de braço

Mais fina que a almofada hemi clássica, a almofada envolvente oferece melhor acesso aos aros motores enquanto permite um apoio do cotovelo mais confortável. Nota! Opção com custo adicional



### Encosto reclinável

Encosto reclinável por pistão de gás permite que os cuidadores ajustem facilmente a posição do encosto do utilizador num movimento contínuo.

## Opções ▾



▲ **Almofada de apoio de braço rotativa hemi, com apoio palmar**

A nova almofada de apoio de braço hemi rotativa a 360° é ideal para posicionamento em situações de hemiplegia e em combinação com propulsão com aro duplo. Estão disponíveis 3 tipos de apoios para melhor posicionamento do antebraço e mão.



▲ ① Curvo - apoio palmar, ② Pronação à esq. ou dt. e ③ Plano



▲ **Apoios de cabeça**

Apoio de pescoço (versão REA), apoio de cabeça ELAN com almofada para suporte occipital ou de 4 pontos estão disponíveis dependendo das necessidades do utilizador. Estes elementos podem ser todos aplicados no esticador e pode ser ajustada a altura ou profundidade e ângulo para assegurar a melhor posição para o utilizador.



◀ **Propulsão com aro duplo\***

Especificamente para uso hemiplégico, este aro com mecanismo de extração rápida torna a cadeira fácil de encartar.



◀ **Tipos de encosto**

Para além do encosto fixo (0° ou 7°), a **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** oferece 4 tipos diferentes de encostos, para satisfazer as necessidades dos utilizadores: ① dobrável; ② ajustável em ângulo (-15°/+15°); ③ reclinável por pistão (0°/30°)

## Opções ▼



### ▲ Opções de apoios de braços

① rebatível e destacável, almofada curta ou comprida (apoio de braço Nº2 na tabela PRP) ② rebatível, destacável e ajustável em altura, com almofada curta ou comprida (apoio de braço nº 3 na tabela PRP), ③/④/⑤ destacável e ajustável em altura, com almofada curta ou comprida (apoios de braço nº 1 ou 4 na tabela PRP) ⑥ apoio de braço destacável com almofada envolvente com suporte do cotovelo, ideal para casos hemiplegia (apoio de braço Nº 5 na tabela PRP) e ⑦ apoio de braço tubular (servido em conjunto com protetor lateral de roupa - disponível na versão Action 3 light)

200x30



125x30



150x30



### ▲ Rodas dianteiras

Disponíveis em 5", 6" e 8", pneu maciço ou pneumático, com várias opções de largura do pneu também disponíveis.



### ▲ Rodas anti-volteio

Oferece segurança extra e podem ser fixas ou removíveis



### ▲ Tabuleiro

Útil para apoio nas refeições e atividades de lazer como a leitura.



### ► Opções de almofadas

Escolha a partir da gama de almofadas Invacare que oferecem conforto básico (Classic Visco) até às almofadas de espuma de alta resiliência com secções de fluido (Matrx Libra) para utilizadores em risco de úlceras de pressão. Visite o nosso site e saiba mais.



### ▲ Encosto Matrx®

O **Matrx Elite** e o **Matrx Deep** podem ser adicionados como opção para garantir um melhor suporte postural da pélvis e tronco.



### ▲ Cinto pélvico BODYPOINT


O cinto pélvico Bodypoint garante uma boa estabilização da pélvis, aumentando o suporte postural com o máximo de conforto assegurado

## Dados técnicos ▼

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da [Invacare Portugal](http://www.invacare.com).

	Largura do assento ▼	Profundidade do assento ▼	Ângulo do assento ▼	Altura do assento ▼	Ângulo do encosto ▼	Altura do encosto ▼	Ângulo do chassis dianteiro ▼
<b>Auto-propulsão</b> <b>Action3 NG e</b> <b>Action3 NG Light</b>	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	325 - 510 mm	325 - 510 mm	80° / 0 - 80° / 90°
<b>Trânsito</b>	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 mm	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510 mm	380 - 460 mm	380 - 460 mm	80° / 0 - 80° / 90°
	Comprimento dos apoios de pernas ▼	Altura do apoio de braços ▼	Largura total ▼	Largura total encartada ▼	Comp. total incluindo apoios de pernas ▼	Comp. total sem os apoios de pernas ▼	Altura total ▼
<b>Auto-propulsão</b> <b>Action3 NG e</b> <b>Action3 NG Light</b>	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Seat width + 190 mm	295 mm	995 - 1170 mm	835 - 960 mm	820 - 1050 mm
<b>Trânsito</b>	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Seat width + 160 mm	260 mm	950 - 1050 mm	710 - 910 mm	920 - 1050 mm
	Max. inclinação ▼	Raio Viragem ▼	Peso max. utilizador ▼	Peso total desde ▼	Peso chassis desde ▼		
<b>Auto-propulsão</b> <b>Action3 NG e</b> <b>Action3 NG Light</b>	7°	870 mm	125 kg	13.0 kg	7.1 kg		
<b>Trânsito</b>	7°	870 mm	125 kg	13.5 kg	10.3 kg		

## Cores do chassis ▼

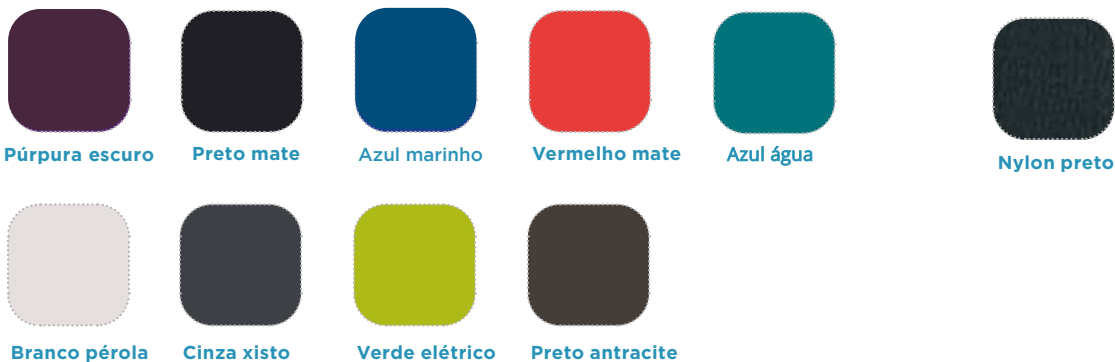

As cores reais podem variar das acima apresentadas.

Tel. : +351 225 193 360  
portugal@invacare.com  
www.invacare.pt

Invacare Portugal II  
Rua Estrada Velha, nº949  
4465-784 Leça do Balio  
Portugal

## Tela do encosto ▼

