

# ISA™

## Invacare Stand Assist



Design otimizado para transferências  
fáceis e seguras.

Suporte ajustável para os membros inferiores | Braço de elevação extensível |  
Pegas ergonômicas



Yes, you can.®

# A evolução nos elevadores de transferência verticais

O novo elevador Invacare Stand Assist (*ISA*) foi desenvolvido para ir ao encontro de vários utilizadores que precisam de ajuda durante a transferência mas que ainda possuem equilíbrio de tronco e tónus muscular nos membros inferiores, mesmo que fraco.

O *ISA* proporciona segurança, conforto e uma experiência mais agradável para o utilizador. É um produto para utilizadores com dificuldades de mobilidade e que necessitam de ajuda para se transferirem de uma superfície de apoio sentado para outra. É também indicado para acompanhar o utilizador ao W.C, realizar a higiene íntima e para a troca da fralda na posição vertical. (Com cesta de 2 pontos)

Para o cuidador, a facilidade de utilização do produto de apoio é um elemento fundamental, e por isso o novo *ISA* tem dimensões totais e peso reduzidos. Em muitos casos quem assiste o utilizador é cuidador informal, até pode ser um familiar e por isso a facilidade de uso é importante. A desmontagem do *ISA* pode ser feita sem recurso a ferramentas ficando fácil de transportar.



## Desenvolvido para oferecer a melhor experiência de transferência vertical para o utilizador e para o cuidador.

O *ISA* disponibiliza várias opções e acessórios para tornar o elevador o mais ergonómico possível.

### Melhorias no design para o utilizador

- ▶ **Pegas curvas e ergonómicas:** para se adaptar à posição natural da mão e do pulso.
- ▶ **Braço de elevação extensível - Telescolift :** diferentes regulações de posição para ir ao encontro das várias alturas dos utilizadores.
- ▶ **Suporte dos membros inferiores:** Regulável em altura para ir ao encontro dos diferentes tamanhos de utilizadores.  
O **Ergosupport**, com ajuste em ângulo adicional está disponível na versão **ISA<sup>X Plus</sup>**.
- ▶ **Plataforma para os pés:** Anti-deslizante, e com rebordo limitador.

### Melhorias no design para o cuidador

- ▶ **Barra de empurrar:** linhas e dimensões baseadas na altura média do cotovelo e largura entre ombros do cuidador típico, para assegurar uma manobra simples e confortável do elevador.
- ▶ **Pedal e alavanca para abertura de pernas:** superfície larga e aderente. Incorpora uma alavanca que acionada ao mesmo tempo que o pedal vai facilitar o fecho e a abertura das pernas.
- ▶ Abertura das pernas elétrica disponível nas versões **Plus** e **X Plus**.

**NOVAS**

## **CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS**

### **Braço de elevação extensível**

- ▶ O “**TelescoLift**” pode ser ajustado em 9 posições para diferentes alturas de utilizador. Oferece o máximo de flexibilidade.

### **Pegas ergonómicas**

- ▶ O design único adapta-se perfeitamente à forma natural da mão para uma preensão confortável e segura.

### **Suporte dos membros inferiores**

- ▶ O suporte dos membros inferiores é almofadado e permite 6 posições reguláveis em altura com opção de regulação em ângulo - **Ergosupport** - disponível na versão **ISA XPlus**, para conforto otimizado.

### **Características adicionais**

- ▶ **Plataforma para os pés:** Anti-deslizante, e com rebordo limitador. Recortada para permitir acesso facilitado ao vaso sanitário. Disponível em opção plataforma com posição subida ou rebaixada.
- ▶ **Alavanca e pedal para abertura das pernas:** ergonómicos para facilitar a abertura e fecho das pernas.
- ▶ **Faixa para as pernas:** Acessório almofadado para oferecer apoio aos membros inferiores e aumentar o conforto. Fácil de colocar, remover e higienizar. (Opcional)
- ▶ **Pernas curvilíneas:** design ergonómico para facilitar as manobras em torno de cadeiras mais largas, poltronas e sanitas.



## 3 características chave e benefícios



### ◀ Pegas ergonómicas Para posicionar as mãos de uma forma natural, confortável e intuitiva.

- Contorno especial com ângulo curvo, oferece uma posição mais natural para colocação da mão.
- Largura entre pegadas estudada para ir ao encontro da estatura média dos cuidadores e minimizar esforços.
- Material de toque suave para conforto durante a transferência.

**PATENT PENDING**



### ◀ Braço de elevação extensível - Telescolift Para adaptar o elevador à altura, condição física e preferência do utilizador

- 9 comprimentos reguláveis para servir vários tipos de utilizadores.
- Alavanca de fácil acesso com mecanismo de auto-bloqueio para uma regulação rápida e segura.
- Quando totalmente recolhido, o elevador fica muito compacto para fácil arrumação/armazenamento.



### ◀ Suporte dos membros inferiores Para acomodar os membros inferiores com o máximo de conforto

- Ajuste em altura simples das seis posições com apenas uma mão, sem necessidade de ferramentas.
- Almofadas em espuma suaves garantem conforto.
- Opção ErgoSupport **PATENT PENDING** com regulação em ângulo adicional para acompanhar os movimentos naturais dos membros inferiores para maior conforto (disponível na versão **X Plus**)

Conheça todas as características do ISA através dos vídeos disponíveis no nosso canal de YouTube

# Apresentamos a família **ISA**

## Uma gama de elevadores versátil para transferências ativas

O **ISA** tem quatro modelos base com diferentes capacidades de peso, dimensões e acessórios, desde o elevador mais simples ao mais avançado, tanto para utilização em ambiente domiciliário como institucional.



### **ISA**<sup>COMPACT</sup>

Muito compacto. Perfeito para ambientes com pouco espaço. Indicado para uso domiciliário.

### **ISA**<sup>STANDARD</sup>

Simples de uso. Adequado a ambientes domiciliários e institucionais.

### **ISA**<sup>PLUS</sup>

Transferências avançadas, fiáveis e seguras. Abertura das pernas elétrica.

### **ISA**<sup>XPLUS</sup>


Cuidados superiores para utilizadores com elevado peso e de estatura mais alta. Indicado para ambientes institucionais. Abertura das pernas elétrica e Ergosupport.

<b>Peso máximo de utilizador</b>	140kg	160kg	180kg	200kg
<b>Altura utilizador recomendada</b>	1400-1800mm	1500-1900mm	1400-1900mm	1400-2000mm

As configurações estão disponíveis para ir ao encontro das necessidades do utilizador e cuidador, como a abertura de pernas mecânica ou elétrica, o suporte de membros inferiores fixo ou com angulação, plataformas para os pés variadas.

### Acessórios disponíveis:

- ▶ Dois modelos de cestas com 2 ou 4 pontos de fixação à escolha. Cesta de 2 pontos para transferências verticais e de 4 pontos para transferências semi-sentadas.
- ▶ Faixa de pernas para maior estabilidade e segurança do utilizador.
- ▶ Proteções para as pernas (incluídas de série nas versões **ISA<sup>PLUS</sup>** e **ISA<sup>XPLUS</sup>**)

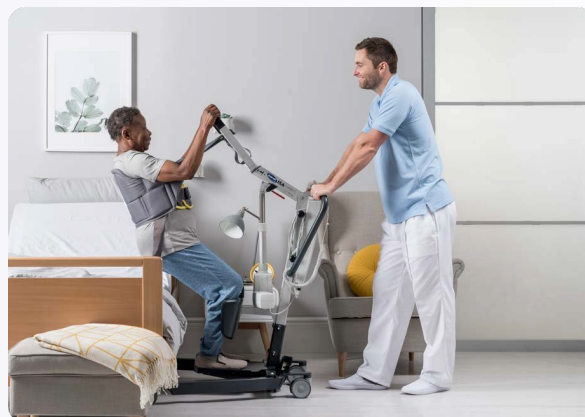

## Dados técnicos ▼

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Todas as medidas foram tiradas com rodízios de 100 mm, tamanho intermédio da plataforma de pés e utilizador com 80 kg.  
Para rodízios de 75 mm (versão COMPACT), reduza as medidas em 15 mm.  
Todas as medidas foram tiradas com uma tolerância de +/- 3%.




Peso máximo de utilizador ▼



Comprimento da base ▼



Largura da base ▼

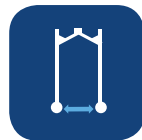

Largura interior com as pernas fechadas ▼



Largura interior com as pernas abertas ▼



Raio de viragem ▼

<b>ISA<sup>COMPACT</sup></b>	140 kg	925 mm	535 mm	405 mm	735 mm	1060 mm
<b>ISA<sup>STANDARD</sup></b>	160 kg	1080 mm	635 mm	495 mm	960 mm	1260 mm
<b>ISA<sup>PLUS</sup></b>	180 kg	1220 mm	640 mm	480 mm	1020 mm	1400 mm
<b>ISA<sup>XPLUS</sup></b>	200 kg	1280 mm	640 mm	480 mm	1020 mm	1430 mm



Peso total de produto ▼




Altura máxima (com o braço de elevação baixado / levantado) ▼



Regulação em altura (com o braço de elevação baixado / levantado) ▼



Distância do chão ▼

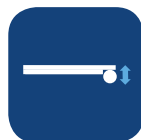

Altura das pernas\* ▼



Velocidade de elevação ▼



Capacidade da bateria (elevações por carregamento)\*\* ▼

<b>ISA<sup>COMPACT</sup></b>	43 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82
<b>ISA<sup>STANDARD</sup></b>	48 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82
<b>ISA<sup>PLUS</sup></b>	49 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82
<b>ISA<sup>XPLUS</sup></b>	52 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82

\* Com proteções de 5mm

\*\* Com a bateria carregada entre os 50% a 100%

## Cor do chassis ▼



**Cinza claro:**  
Mastro, barra e braço de elevação

RAL: 7035

Nota: As cores podem variar ligeiramente das apresentadas acima.



**Cinza antracite:**  
base, pernas e barra de empurrar

RAL: 7016



## Dados regulamentares ▼

**Tel: 225 193 360**  
marketing.pt@invacare.com  
www.invacare.pt

Invacare Portugal  
Rua da Estrada Velha, 949  
4465-784 Leça do Balio



**Yes, you can.®**