

Essential Touch

Vendbar og trykkavlastende skummadrass

Nøkkelhullsformede utskjæringer i ulike anatomiske soner - for økt komfort og optimal trykkavlastning.



En komfortabel investering

For forebygging av trykksår



Yes, you can.®

En komfortabel investering



Profilering på begge sider

- Madrassen har tosidig profilering og kan vendes og brukes på begge sider. Dette bidrar til å øke produktets levetid.

1



Høy komfort

- Utskjæringene i skummet gjør at brukeren synker godt ned i madrassen som igjen bidrar til økt komfort.
- De identiske utskjæringene på begge sidene av madrassen gjør at madrassen kan snus inni trekket og brukes på begge sider. Dette bidrar igjen til økt levetid på madrassen.
- Slitesterkt inkontinenstrekk med 2 robuste håndtak, samt glidelås på 3 sider, bidrar til enklere håndtering ved bruk, inspeksjon og vask.

2



Redusert shear og friksjon

- De unike utskjæringene i skummet bidrar til redusert shear og friksjon ved reposisjonering i seng.
- Vannresistent inkontinenstrekk i polyuretan og flerveis stretch bidrar til redusert shear og friksjon, og der igjen økt komfort for bruker.
- Passer godt for ulike pleiemiljøer.


3



God trykfordeling

- De nøkkelhullsformede utskjæringene gir skumfirkanten som beveger seg uavhengig av hverandre.
- De unikt utskårede skumfirkantene gjør at brukeren synker godt ned i madrassen og omslutes av det komfortable og trykfordelende skummet.
- Ulike anatomiske soner med små utskjæringer i fot- og hodeende, og større skumfirkantener omkring rygg og sete, bidrar til best mulig trykfordeling- og avlastning for den sengeliggende brukeren.

På anbud med NAV

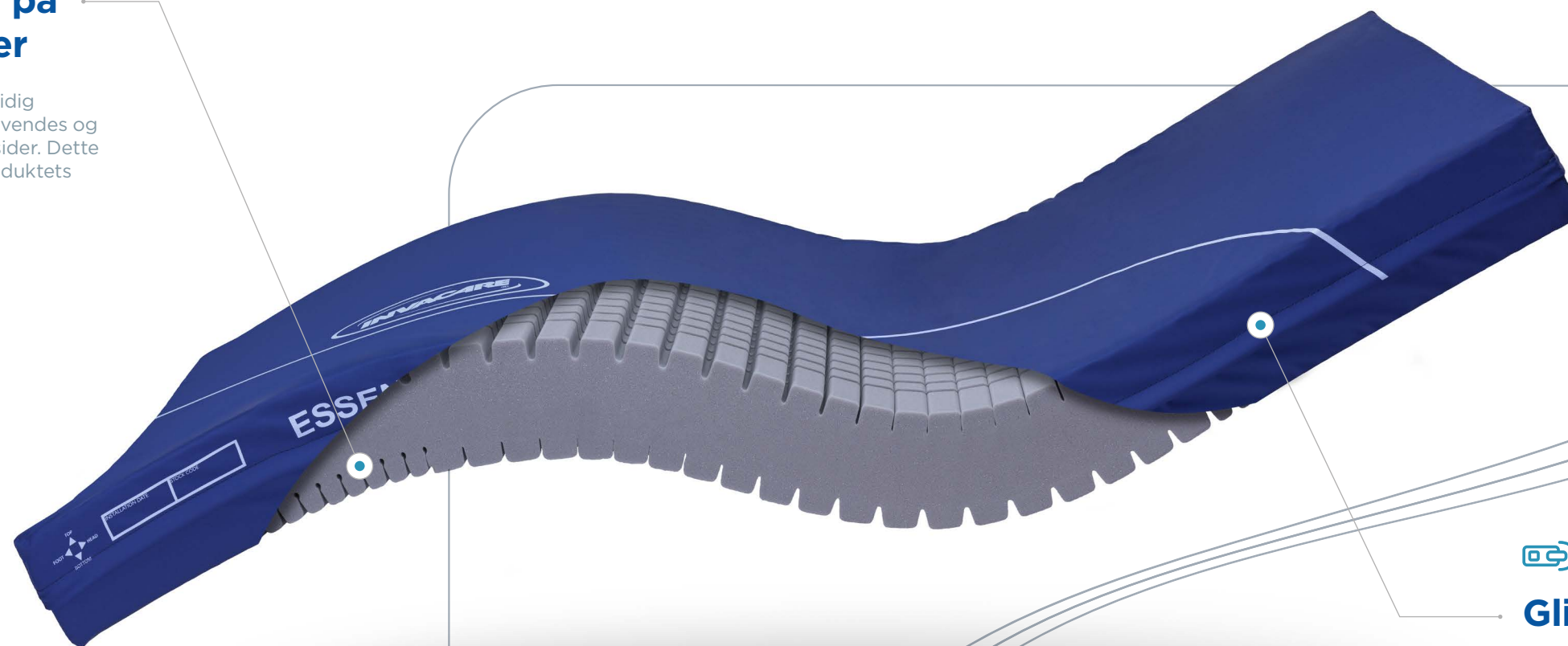

Glidelås på tre sider

- 3-sidig glidelås gjør det enkelt å undersøke madrassen og fjerne trekket for vask. Den gode og kraftige dryppkanten over glidelåsen beskytter i tillegg mot væskeinntrenging.

Tekniske data ▼



Tilgjengelige størrelser ▼



Maksimal brukervekt ▼



Maksimal vasketemperatur på trekk ▼

200 × 83 × 15 cm

200 × 88 × 15 cm

200 × 90 × 15 cm

200 × 103 × 15 cm

200 × 118 × 15 cm


På anbud
med NAV

150 kg

95°

Artikkelnummer ▼	HMS-nummer ▼	Størrelse ▼	Beskrivelse ▼
1631831	313849	88 x 200 x 15 cm	Essential Touch skummadrass, med polyuretanbelagt inkotrekk
1631830		83 x 200 x 15 cm	Essential Touch skummadrass, med polyuretanbelagt inkotrekk
1631885		90 x 200 x 15 cm	Essential Touch skummadrass, med polyuretanbelagt inkotrekk

Maxxcare Pro Evolution hælvavlaster tilgjengelig som tilbehør

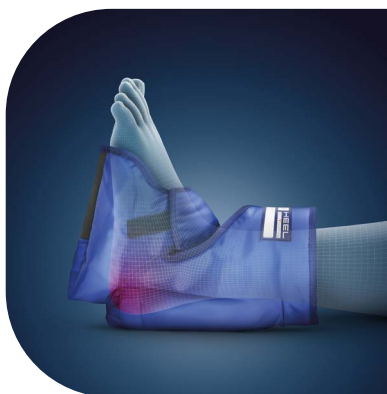

Maxxcare Pro Evolution
hælvavlaster gir 100 %
avlastning. Enkelt og effektivt.

Maxxcare®

Artikkel- nummer ▼	HMS- numbers ▼	Størrelse ▼	Materiale ▼
060004	301470	S	Luftceller (Vicair SmartCells)
1578539	202746	Standard (M-L)	Luftceller (Vicair SmartCells)
060003	269681	XL	Luftceller (Vicair SmartCells)

Manufactured to: BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match and BS EN 7177: Crib Source 5

God sykepleie er essensielt i behandlingen av trykksår. Essential Touch trykkavlastende madrass kan bidra positivt inn i en målrettet behandlingsplan som har til hensikt å forebygge eller behandle trykksår - i kombinasjon med relevant utdanning, kliniske vurderinger og aktive handlinger som alle er grunnleggende faktorer i forebyggingen av trykksår. En rekke ulike vurderingsskalaer kan brukes som formelle metoder for å vurdere risikoen for utviklingen av trykksår, og bør brukes i kombinasjon med en uformell vurdering (sykepleievurdering) som en del av en helhetlig og individualisert plan.

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®



© 2025 Invacare International GmbH. All rights reserved. All informasjon er korrekt på trykkesidspunkt. Invacare forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon. NO - 03/25