

Dacapo Top

Trykkavlastende overmadrass



Dacapo Top

Komfort, kvalitet og forebygging



Yes, you can.®

Oppdag vår Dacapo-serie

Et omfattende utvalg av
trykkfordelende skummadrasser

I over 20 år har vårt brede utvalg av trykkfordelende madrasser bidratt med komfort og støtte til de som er utsatt for trykksår.

Designet med klinisk innsikt og ekspertise, i kombinasjon med vår designinnovasjon, representerer Dacapo et komplett utvalg av madrasser med avlastende egenskaper og løsninger.



Excel



Ecogreen



Top


På anbud
med NAV



Top Pro



Ampla

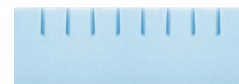


Dacapo Kid



Trykkfordeling

Alle våre kliniske madrasser bidrar med effektiv trykkfordeling uansett hvordan pasienten ligger eller sitter i sengen.

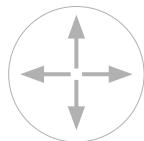

Redusert shear og friksjon


Vårt flerveis stretchstoff bidrar til å redusere shear og friksjon.



Mikroklimahåndtering

Skumstrukturer med god lufting sikrer optimal mikroklimahåndtering.

“Utviklet for å
tilby optimal
avlastning og
trykkfordeling”

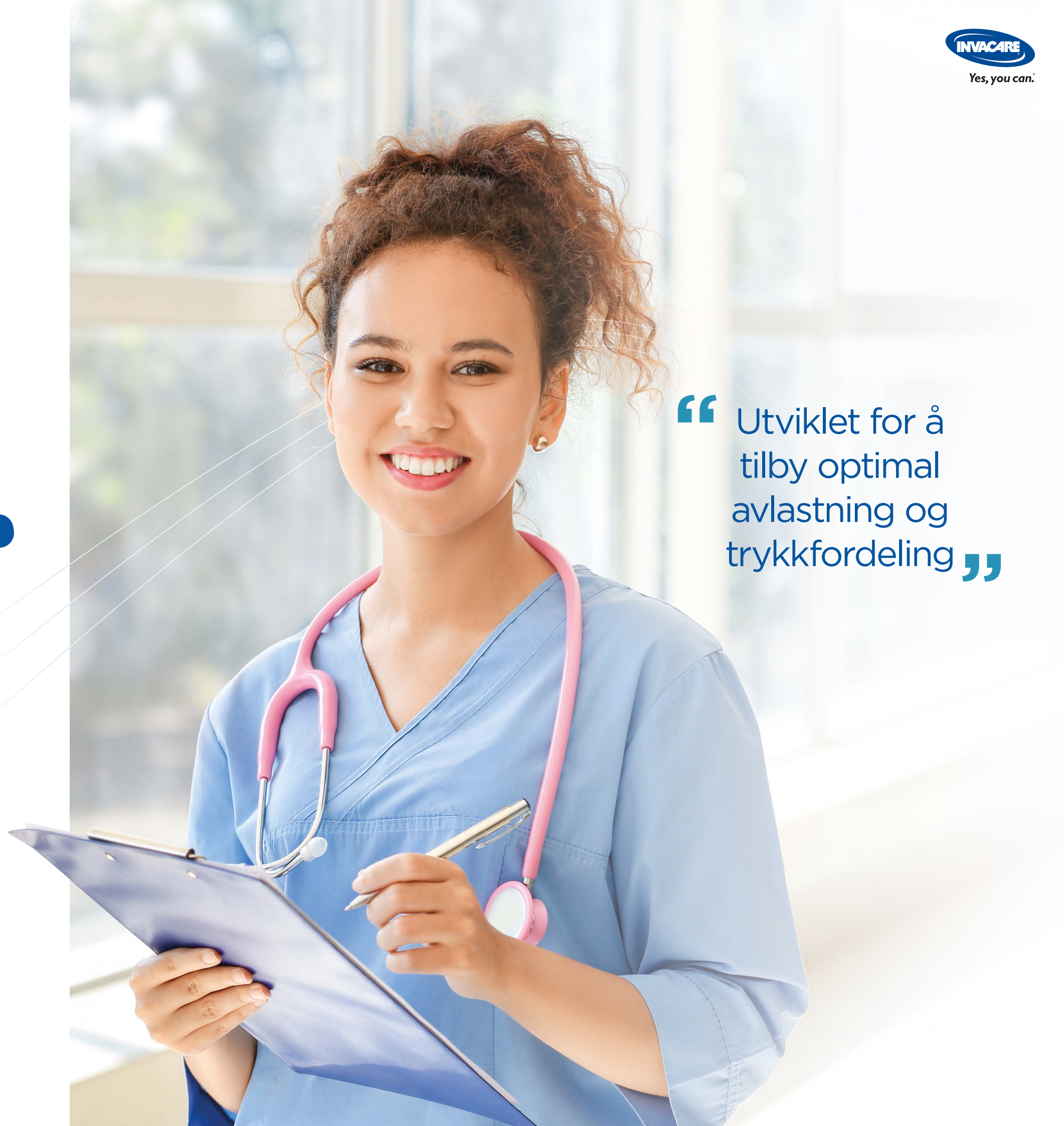


Trykkfordeling

I Invacare bruker vi standardisert trykkartleggingsteknologi for å informere og øke forståelsen for effektiviteten av trykkfordeling på våre ulike madrasser

Vi er trygge på at hver eneste madrassmodell har gjennomgått grundige analyser og tester. I tillegg til trykkartleggingen gjennomfører vi uavhengige holdbarhetstester, cytotoxisitetstesting*, branntesting og akselert aldring.




Vi kan derfor forsikre deg om at alle våre kliniske madrasser er kvalitetssikret og gir optimal komfort og støtte til pasienten

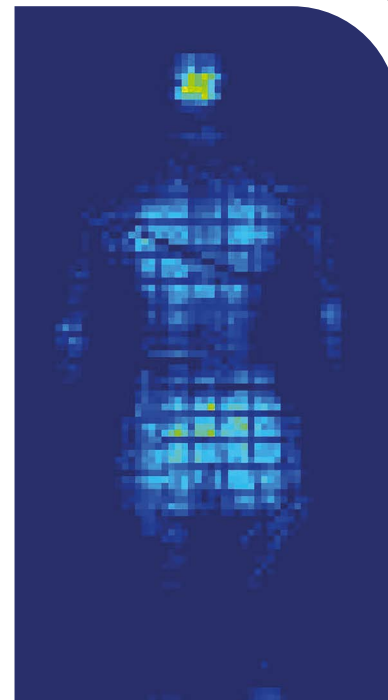

Bildet over viser Dacapo Excel med pasient i ryggleie



Egenskaper du kan forvente av en Dacapo-madrass:

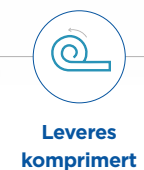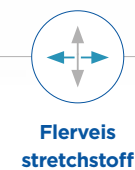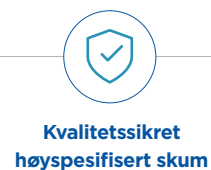

*Et stoffs evne til å skade celler eller vev

Dacapo Top

Overmadrassen Dacapo Top er laget av høykvalitets- og viskoelastisk skum og gir økt støtte når den brukes i kombinasjon med en underliggende skummadrass.

3. plass i Delkontrakt 1

På anbud med NAV

Det temperatursmarte skummet tilpasser seg pasientens temperatur og kroppskontur. Med en åpen cellestruktur er skummet godt ventilert og reduserer oppbygningen av varme og fuktighet for effektiv mikroklimahåndtering.



› **Elastiske bånd**
i hvert hjørne sikrer en fast posisjonering til madrassen under.

Med vårt flerveis elastiske og pustende trekk tilbyr Dacapo Top en avansert overmadrass for Dacapo Basic-madrasser.



› **Støtter opptil 130 kg** kroppsvekt.



› **Den åpne cellestrukturen** håndterer varme og kroppsfuktighet.



› **Skjult glidelås** hindrer væskeinntrenging og gir enkel tilgang ved inspeksjon og rengjøring.

Kvalitetssikret



Vi sikrer at alle våre kliniske madrasser leverer optimal kvalitet. I tillegg til trykkartlegging, inkluderer vår testing uavhengig holdbarhetstesting, cytotoksitetstesting, branntesting og akselerert aldring.

Tekniske data

For mer informasjon om produktet, inkludert brukermanual, besøk vår hjemmeside [invacare.no](https://www.invacare.no)



Bredde



Høyde



Lengde



Vekt



Brukervekt



Vasketemperatur

Dacapo
Top

På anbud
med NAV

85 - 90 - 120 cm

7 cm

200 cm

5 - 7.5 kg

130 kg

95 °C

Artikkel- nummer	HMS- nummer	Størrelse	Beskrivelse
60131581	23581	85x200x7 cm	Viskoelastisk skummadrass med polyuretanbelagt inkotrekk
60131578	191115	90x200x7 cm	
60131583	191107	120x200x7 cm	

Maxxcare Pro Evolution hælavlaster



Les mer om Maxxcare

Maxxcare®

Artikkel- nummer	HMS- nummer	Størrelse	Materiale
060004	301470	S	Luftceller (Vicair SmartCells)
1578539	202746	Standard (M-L)	Luftceller (Vicair SmartCells)
060003	269681	XL	Luftceller (Vicair SmartCells)

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®