


Dyna-Form[®] Static Air HZ

Matelas Hybride mousse-Air non motorisable

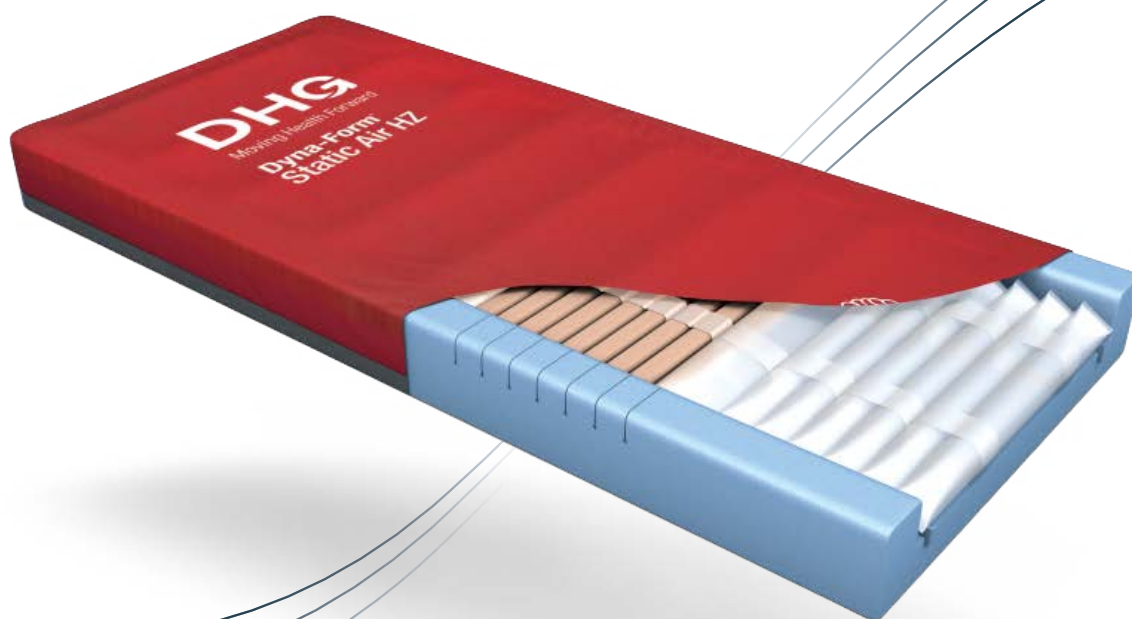

Innovation et Prévention

pour les patients les plus à risque



Matelas hybride innovant breveté 4 zones permettant d'apporter un maximum de prévention tout en assurant le confort du patient



Indications thérapeutiques

- > Prévention : Risque Moyen à Très élevé
- > Patient alité plus de 10 heures, qui se mobilise seul avec difficulté, sans artériopathie.
- > Aide au traitement d'escarre(s) jusqu'au stade 4 associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.



Technologie unique brevetée

- > Cellules uniques avec mousse avec découpes courtes ou longues suivant la zone d'appui positionné à l'intérieur d'une cellule air et permettant ainsi d'avoir redistribution continue des pressions et répartition des pressions via l'immersion dans le support pour permettre une prévention et un accompagnement pour les patients les plus à risque.
- > Zone Talon 100% air breveté avec ajustement de la zone d'appui automatique.
- > Conception avec Base en U de portance ferme afin de faciliter et d'accompagner les patients lors de la sortie de lit.



Confort

- > Gestion de la zone talon avec Système de débit d'air réactif (RAS™) breveté : un système de valves qui s'adapte automatiquement au poids et aux mouvements du patient.
- > Matelas 4 zones : Zone tête avec 100% mousse, Zone Dos avec découpe courte pour suivre les mouvements des lits médicaux et limiter les risques de friction, Zone sacrée avec découpe large pour augmenter l'immersion et réduire les points d'appui et zone talon 100% air.
- > un confort de sommeil lié à la qualité et souplesse de la mousse tout en bénéficiant des avantages de l'air avec redistribution continue.



Performance

- > Une base de 16 études cliniques ayant démontrée une efficacité supérieure de 20 % à celle d'un matelas en mousse haut de gamme, avec un poids maximum allant jusqu'à 254 kg.
- > Tous les composants sont interchangeables et remplaçables ce qui optimise la durée de vie du produit.
- > Housse perméable à la vapeur, extensible dans les 4 dimensions, coutures soudées par haute fréquence et une protection par rabat à fermeture éclair conforme aux normes les plus strictes en matière de contrôle des infections.

Caractéristiques techniques ▼



Hauteur ▼

15 cm



Largeurs ▼

88 cm
120 cm



Longueur ▼

200 cm



Poids patient
Maximum ▼

254 kg



Poids Net ▼

10 kg
10,5 kg



Mousse HR ▼

Bleu 38–40kg/m³
Portance Ferme –
200 Newtons
Rose 38–40kg/m³
Portance souple –
120 Newtons



Garantie ▼

5 ans

Manufactured to: BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match and BS 7177 (Ignition Source 5)

Essential nursing care is pivotal in pressure injury management. This mattress may positively contribute to the outcome of a pressure injury prevention plan that includes education, clinical judgment and action planning based on vulnerability, which are fundamental factors in the prevention of pressure injuries. A range of assessment scales can be used as a formal method of assessing risk from pressure injury development, and should be used in conjunction with an informal assessment (informed nursing judgement) as part of a comprehensive and individualised plan.

Tel: +33 2 47 62 64 00
contactfr@dhcare.com
www.dhcare.fr

DHCare France SAS
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France

