

# ErgoMove™ -Teknologi

SELVSTENDIGHET | FRIKSJONSFOREBYGGENDE | AKTIV SITTESTILLING

## Vi introduserer NordBed ErgoMove™-teknologi

ErgoMove-teknologien har blitt utviklet for å gi brukeren aktiv sittestilling med rygglenstilbakeføring ved hjelp av et tastetrykk. I aktiv sittestilling kan brukeren enkelt spise, drikke og lese, samtidig som trykkfordelingen oppretholdes.



Løfteinnstillingene sikrer at brukeren forblir i den samme posisjonen og motvirker friksjon og forskyvning, som forhindrer at liggesår utvikles.

- ▶ Når brukeren er plassert riktig på liggeflaten, sikrer det at bekkenet ligger stabilt og er riktig plassert for å forhindre glidning mens liggeflaten justeres.
- ▶ Liggeflatene er tilpasset i samsvar med kroppens ergonomi, med de naturlige bevegelsepunktene plassert ved hoften og knærne. I kombinasjon med den automatiske ryggtilbakeføringen, gjør dette at madrassen ikke beveger seg og faren for trykksår reduseres når kroppen løftes opp til aktiv sittestilling.
- ▶ Teknologien gjør at pleieren alene kan hjelpe brukeren til å bytte liggestilling. Liggeflatene er optimalisert i forhold til antropometriske målinger, som gjør at flatene kan tilpasses de fleste voksne brukere.

Kunnskapsdatabase


## Kliniske fortrinn

- ▶ Gir brukeren aktiv sittestilling
- ▶ Delte liggeflater reduserer skyv-, friksjons- og kompresjonsskader.
- ▶ Brukeren forblir i den samme stillingen og forhindrer bevegelse og friksjon.



## Fordelene med aktiv sittestilling

- 1** Gjør det enklere å føre bena rundt og ut
- 2** Økt omfordeler av trykk
- 3** Forenkler pleiernes arbeid
- 4** Gir brukeren større frihet til å spise, drikke og lese.

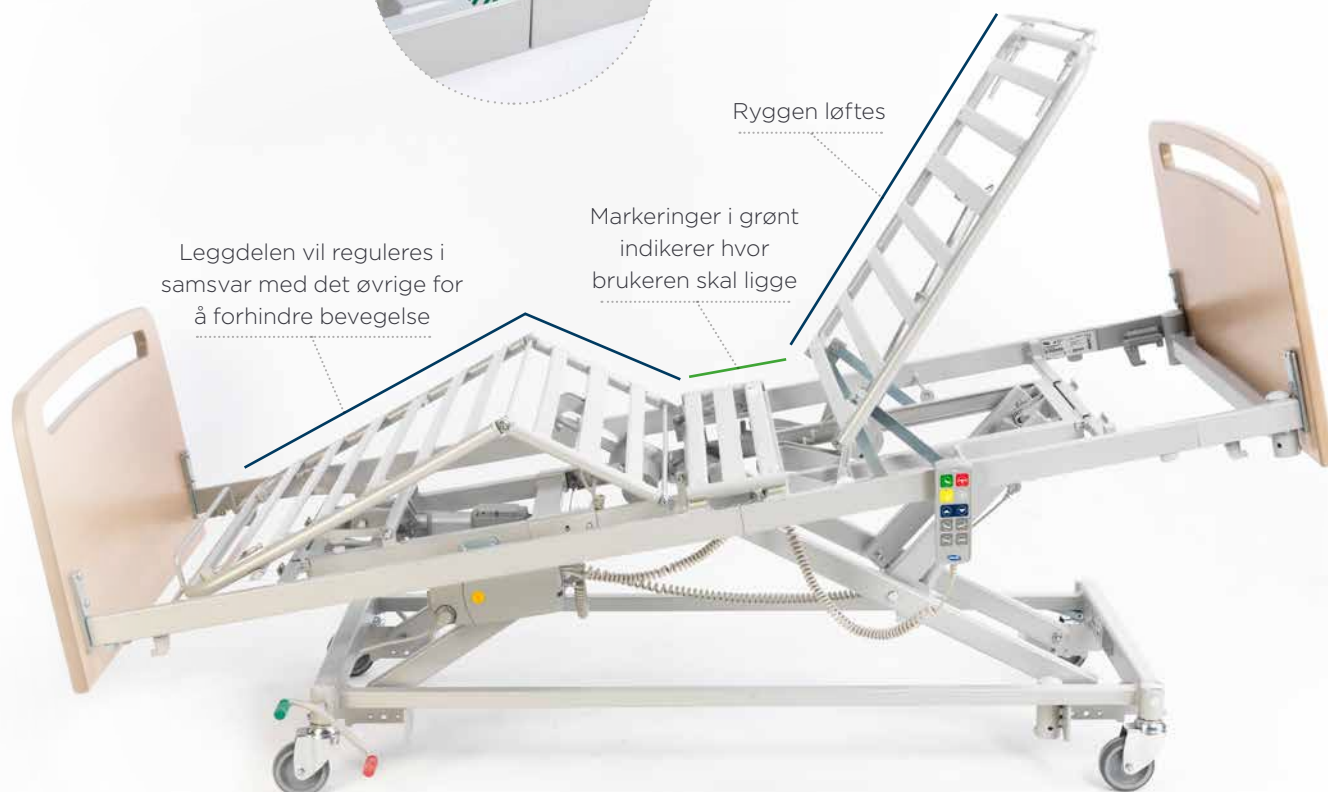

Anti-trendelenburg -innstillingen sikrer en aktiv sittestilling for brukeren.

