

# **Essential** Touch

*Høj kvalitets skummadras*



En effektiv løsning, der sikrer høj  
komfort og redistribution af tryk



Yes, you can.

Invacare **Essential Touch** madrassen er en høj kvalitets trykredistribuerende skummadras beregnet til hjemmeplejen og institutioner. Madrassens profilerede overflader sikrer en kosteffektiv redistribuering af trykket og tilbyder optimal komfort til borgere med lav - høj risiko for at udvikle tryksår.

### Effektiv forebyggelse af tryksår

- ▶ Skummets overflade består, på begge sider, af en serie nøglehuls-opskårede felter. Felterne bevæger sig individuelt og fordeler på denne måde vægten så der skabes effektiv tryk-redistribution og optimal komfort for borgeren

### Inkontinensbetræk

- ▶ Betrækket er udført i flervejsstrækbart, væsketæt polyuretan materiale. Dette gør betrækket strækbart og særligt holdbart hvilket reducerer shear og friktionskræfter. Betrækkets hvide inderside gør det muligt at konstatere, om betrækket er gennemhullet og evt ikke længere er væsketæt og skummet dermed er kontamineret.



### Vend og rotér

- ▶ Idet skummet, på begge sider består af nøglehuls-opskårede felter, kan madrassen vendes og roteres efter behov, hvorved madrassens levetid forlænges



### Afdækket lynlås på 3 sider

- ▶ Letter af og på-montering i forbindelse med rengøring



### Design

- ▶ **Essential Touch** er forsynet med et strækbart betræk og et tryk der tilfører madrassen et moderne udtryk.


## Tekniske data ▼

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk).



Bredde ▼

830, 880, 1030,  
1800 mm

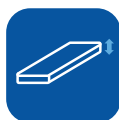

Højde ▼

150 mm



Længde ▼

2000 mm



Vægt ▼

14 - 20 kg



Max brugervægt ▼

150 kg



Rengøring ▼

95 °C

Madrassen er produceret i overensstemmelse med:

- European Standard: BS EN 597-1 Cig
- European Standard: BS EN 597-2
- BS7177:1996 Crib 5.

*Essentiel pleje i henhold til EPUAP/NPUAP's anbefalinger, er afgørende for forebyggelsen af tryksår. Denne madras bidrager positivt til plejeplanens tryksårforebyggende tiltag. Uddannelse, klinisk vurdering og procedureorienteret planlægning, baseret på den enkelte borgers behov, er væsentlige faktorer i tryksårforebyggelsen.*

*Vægtfylde skum er ca 40 kg/m<sup>3</sup>*

Tlf.: 3690 0000  
Fax: 3690 0001  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Danmark



Yes, you can.®

