

FDX[®]



**Forhjulsdrevet, stærk og
retningsstabil**



Invacare **FDX** er en kvik og attraktiv el-kørestol i et smart design.

FDX er en forhjulsdrevet, sikker og stabil el-kørestol, der tilbyder brugeren høj ydeevne og fantastiske køreegenskaber.

FDX er fleksibel og kan let tilpasses efter ønsker og behov med forskellige sædesystemer, i forhold til styring og med løsninger fra det store tilbehørsprogram.



Moderne og praktisk design

FDX har et moderne og praktisk design med kompakte dimensioner, såsom lille venderadius og totalbredde. **FDX** er let at manøvrere, både ved høje og lave hastigheder. Det moderne design giver god plads til placering af fødderne og det er let at finde en korrekt og komfortabel siddestilling.

G-Trac - "næsten som at køre på skinner"

Kørsel på ujævnt underlag eller i udendørs terræn kan ofte være en udfordring, hvor der hele tiden skal korrigeres for ujævnhederne. **G-Trac** fungerer nærmest som et kompas og sikrer, at **FDX** kører sikkert med stor retningsstabilitet i den ønskede retning - "næsten som at køre på skinner". Med **G-Trac** kan der ganske uproblematisk køres i kurver, på ujævnt underlag og i alle former for udendørs terræn.

Individuel tilpasning

FDX tilbyder et bredt udvalg af individuelle tilpasningsmuligheder. **FDX** kan fx leveres med stroppryg, fast ryg eller støb, samt et bredt udvalg af armlæn og benstøtter. Styresystemet kan leveres med standard joystick, alternativ styring og/eller ledsagerstyring.

Egenskaber og tilbehør



Kompakte dimensioner

Smart design med kompakte dimensioner gør det let at manøvrere rundt på lidt plads.



Centermonteret benstøtte

God plads til fødderne, ideel for positionering i en afslappet og komfortabel siddestilling.



Sidemonteret benstøtte

Manuel eller elektrisk justerbare i forskellige udgaver.



Sædesystemer

FDX kan leveres med forskellige sædesystemer, herunder børne- og juniorsæder, der kan justeres efter behov.

Egenskaber og tilbehør



Elektrisk hejs og kip

Med el-hejs kan sædehøjden tilpasses i hverdagen, samt sikre en hensigtsmæssig arbejds højde for hjælpere m.v. i plejesituationer. El-kippet sikrer, at tyngdepunktet holdes over centrum af el-kørestolens base og minimerer risiko for uheld.



Bagerste swing-arme

Medfører god affjedring og kontakt til underlaget, selv ifm. kørsel over forhindringer.

C-profil

Modulite er forsynet med c-profil på siderne, der gør det muligt at justere sædedybde og armlæn, frem og tilbage, trinløst og uafhængigt af hinanden. C-profilen giver også mulighed for at montere fx lårstyr, hoftestyr og div. tilbehør.



Servicevenlighed

Modulopbygget og servicevenligt design med let adgang til batterier og elektronik.







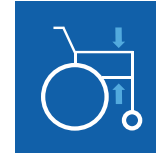


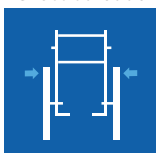





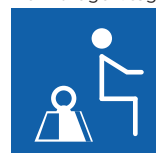
Rygsystemer








Vælg mellem et bredt udvalg af sædesystemer, rygge, armlæn og benstøtter i mange størrelser.

Tekniske data

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.

	Sædebredde	Sædedybde	Rygvinkel	Ryghøjde	Totalhøjde	Sædehøjde fra gulv	Armlænsenhøjde
Modulite™	 380 - 530 mm ^{1,2}	 410 - 510 mm	 90° - 120°	 480, 540, 560 mm ²	 1010 - 1170 mm ⁵	 420 - 720 mm ^{3,4}	 245 - 310/ 295 - 360 mm

	Chassisbredde	Længde på benstøtte	Tilt	Totallængde inkl. benstøtte	Totallængde uden benstøtte	Vægt	Max. brugervægt
Modulite™	 640 mm ⁹	 290 - 460 mm ⁷	 0 - 30° ⁶	 1250 mm ⁸	 1070 mm	 140 kg ⁵	 136 kg

	Batterikapacitet	Vendediameter	Max. højde på forhindringer	Max. hældning	Batterikapacitet	Kørestrækning	Hastighed
Modulite™	 60 Ah (C20)	 1400 mm	 60 mm	 8° / 14%	 2 x 250 W ⁸ 2 x 340 W ⁹	 32 km ¹⁰	 10 km/t



Invacare® **Modulite™**



1. Sædebredden kan udvides med 50 mm ved at flytte armlæneene udad
2. Andre mål kan leveres på forespørgsel
3. Højere sædehøjde en muligt
4. Målt fra gulv til sædeplade
5. Afhængig af konfigurationen
6. Større tilt kan leveres på forespørgsel
7. Målt fra fodplade til sædeplade
8. Afhængig af sædeenhedens placering
9. Bredde på hjulbase
10. I henhold til ISO 7176-4:2008

Chassisfarve

Sølv (standard)



NB! Andre farver kan bestilles efter aftale.

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Danmark

