


Flo-Shape





Trykfordelende standard pude -
velegnet til komfortkørestole

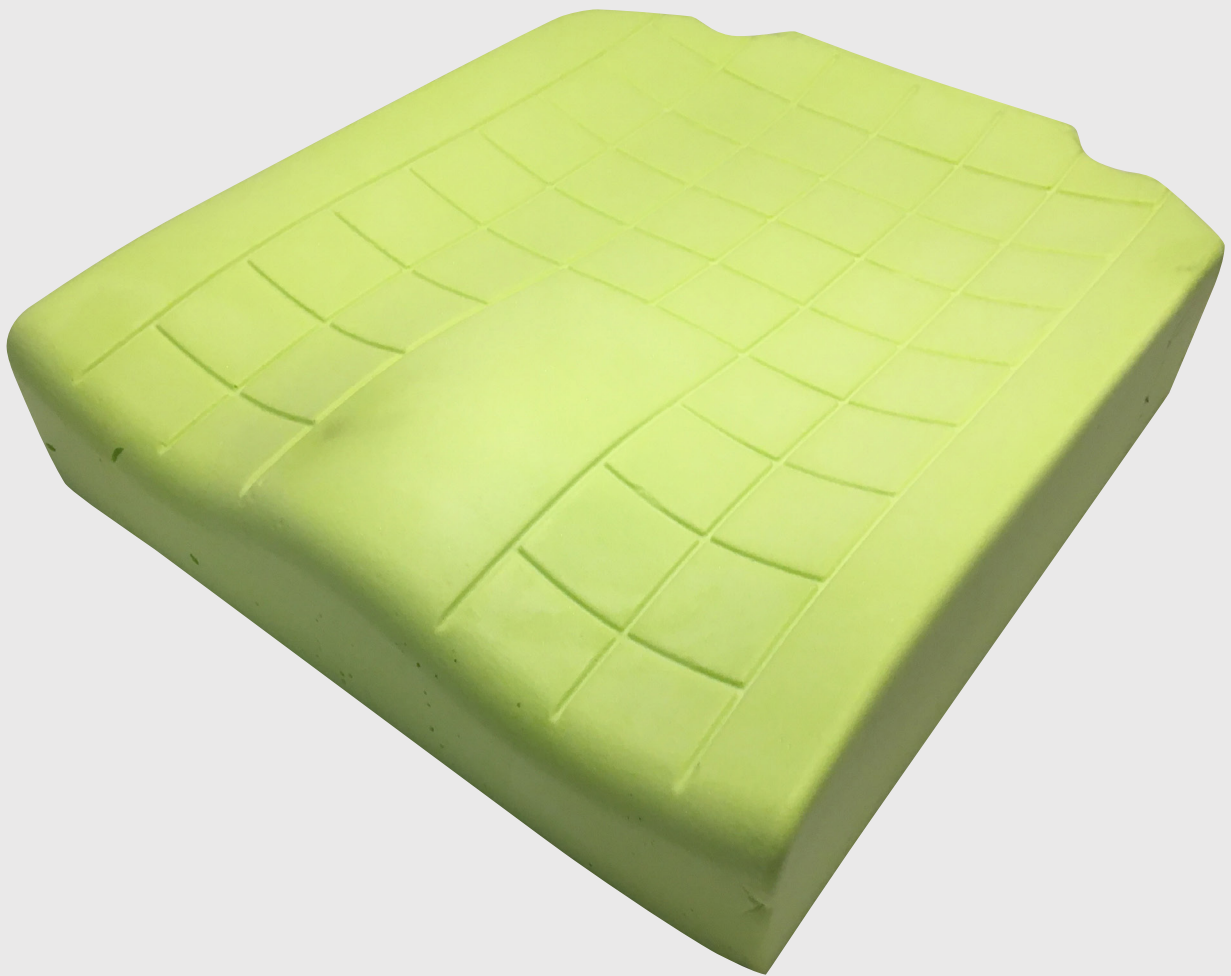

Invacare **Flo-Shape** er 10 cm høj og giver aflastning til brugere i lavrisikogruppen for at udvikle tryksår. **Flo-Shape** er samtidig let positionerende.

Flo-Shape er velegnet som standardpude/tilbehør til Invacare komfortkørestole, og kan købes som reservedel.

Formen på **Flo-Shape** er, som i **Flo-tech Contour Visco**, konturformet, støttende og med en opskæring i lave profiler. Den profilerede overflade reducerer overfladespændinger, hvorved puden i langt højere grad følger kroppens former og derved giver en god trykfordeling.

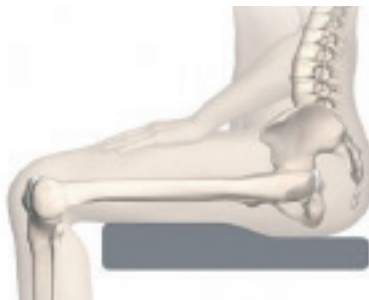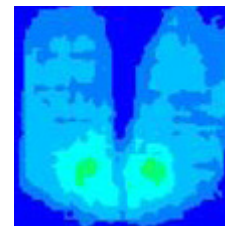

Den anatomiske udformning af **Flo-Shape**






- giver behagelig støtte til lår og tuber, modvirker tendensen til, at brugeren glider fremad på sædet, og modvirker således shear og friktion
- giver en stabil siddeflade, der understøtter en god positionering af bækkenet og lår. Dette gør **Flo-Shape** egnet til brugere med for eksempel en neurologisk tilstand.

Fakta om **Flo-Shape**

- Skummet i Flo-Shape er højelastisk latexskum med en mere åben cellestruktur end koldskum
- Anatomisk formet
- Komfortabel, stabil og trykfordelende
- Åndbart, blødt og strækbart Aero betræk
- Alternativt sort, åndbart inkontinensbetræk eller sort plys
- Flere bredder og en dybde, der passer til dybdejusterbare sæder
- Passer til Invacare komfortkørestole SB 33, 35, 40, 45 og 50 cm
- Max brugervægt 152 kg




Tekniske data

Antal størrelser	Vægt	Max brugervægt	Rengøring betræk	
				
5	1,38 kg	152 kg	60°	

Farve

Sort

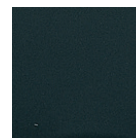

Skum Farve: grøn
Densitet (kg / m): 65 - 75
Hårdhed (N): 150
Utmattning: Mycket tålig

Fremstillet i forhold til følgende Europæiske standarder:
EN 597 - 1 & 2
BS 7176: 1995 crib 5

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
2605 Brøndby
Denmark

