

L'innovazione apre la strada alla flessibilità

Invacare **Fox** vanta innovazioni e migliorie tecniche in grado di semplificare la quotidianità dei suoi utilizzatori. E' dotata di una seduta regolabile in base alle diverse necessità degli utenti e il suo asse anteriore oscillante e la posizione ottimizzata della batteria assicurano una trazione eccellente anche in caso di utilizzo in ambienti esterni.

- Compatta ed efficiente
- Veloce da smontare e richiudere
- Regolazioni Semplici
- Sistema di controllo Simply Smart LiNX



LiNX®

INVACARE
Yes, you can.®



Compatta ed efficiente

Invacare **Fox** è stata progettata per massimizzare l'indipendenza degli utilizzatori nelle loro attività quotidiane. Oltre a soddisfare le esigenze pratiche in termini di mobilità, **Fox** è allo stesso tempo molto confortevole e sicura. Grazie agli efficienti motori, infatti, questa carrozzina rappresenta la scelta ideale per tutti quegli utilizzatori alla ricerca di un ausilio agile e compatto e che desiderano maggior libertà di guida, per poter sperimentare ogni giorno nuovi itinerari.

Veloce da smontare e richiudere


In caso di necessità, **Fox** può essere chiusa e smontata in modo facile e veloce. Azionando una leva a sgancio rapido posta frontalmente, la seduta si stacca dalla base e resta bloccata in posizione. La carrozzina, da chiusa, può essere inclinata manualmente e movimentata, rendendo quindi le operazioni di trasporto estremamente facili e agevoli.

Regolazione semplice

Invacare **Fox** è facile da regolare e si adatta alle specifiche esigenze di ogni utilizzatore. L'utente può modificare a piacere la lunghezza del passo, da corto a lungo o viceversa, sulla base di particolari esigenze di stabilità. Tali modifiche di impostazione vengono memorizzate e recuperate ove richiesto.

Sistema di controllo Simply Smart LiNX

LiNX è il nuovo sistema di controllo Invacare, frutto di perspicaci intuizioni e capace di far sperimentare, nel tempo, esperienze di guida rivoluzionarie. Grazie alla modularità che lo contraddistingue, questo lungimirante sistema di controllo è agevolmente potenziabile e personalizzabile per rispondere alle mutevoli esigenze degli utilizzatori. La carrozzina **Fox** è stata progettata per semplificare la vita di quanti sono costretti ogni giorno su una carrozzina. Oggi, infatti, grazie al Sistema **LiNX**, l'interazione utente-carrozzina viene ulteriormente potenziata, rendendo l'esperienza di guida più sicura e senza sorprese. Caratteristiche principali:

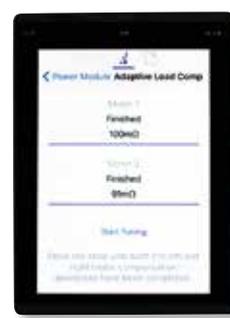

Sistema avanzato di controllo

I comandi **LiNX** sono ergonomici e assolutamente facili e intuitivi. E' disponibile anche un doppio comando per l'assistente per consentire a quest'ultimo di godere di un'esperienza di guida sicura e affidabile.

Programmazione e diagnostica in tempo reale

Grazie alle funzionalità wireless di **LiNX**, la programmazione è più veloce e facile. I professionisti possono collegarsi al controller della carrozzina **Fox** via Bluetooth per aggiornamenti alle impostazioni di programmazione o manutenzione, o per accedere in tempo reale alle funzioni di diagnostica (telemetria).

CARATTERISTICHE & OPZIONI



Telaio pieghevole

Meccanismo studiato per una migliore distribuzione dei pesi e una riduzione dello stress meccanico.



Ancoraggio a 4 punti

L'attenzione al dettaglio in fase di progettazione prevede ganci saldati al telaio a prova di crash-test.



5 regolazioni della seduta

La seduta di *Invacare Fox* è estremamente flessibile e può essere regolata in 5 modi diversi. L'altezza, l'angolazione, la larghezza, la profondità e l'inclinazione dello schienale possono essere adattati in funzione delle specifiche necessità di ogni utilizzatore.



Ruote posteriori con cerchi in alluminio

Su richiesta si possono scegliere i cerchi delle ruote posteriori in alluminio, da abbinare alle ruote anteriori in argento metallizzato.



Schienale abbattibile

Grazie alla funzione "memory", lo schienale, una volta riaperto, ritorna nella posizione personalizzata.



Passo corto o lungo

Il design modulare garantisce un'estrema facilità e flessibilità per le operazioni di movimentazione e installazione. E' possibile passare dall'impostazione con passo corto a lungo o viceversa, senza la necessità di integrare componenti aggiuntivi.



Gruppo batteria

Elegante gruppo batteria, unico nel suo genere e facile da smontare, in grado di accogliere vari formati di batteria.



Dispositivo salicordolo

Il salicordolo, in caso di utilizzo, può essere facilmente bloccato posteriormente grazie ad un particolare meccanismo fornito di serie.



Bloccaggio ruote anteriori

Il bloccaggio delle ruote anteriori agevola le operazioni di chiusura della carrozzina e facilita il trasporto su rampe.



Poggiatesta

Poggiatesta e poggianuca della serie Rea® sono disponibili come optional.



Supporto per bombola di ossigeno

Disponibile come optional. Compatibile con bombole dalle dimensioni standard.

Dati tecnici


							
Fox	350 ¹ , 400, 450, 500 ² mm	400, 430, 460, 490 mm	480 / 510 ³ mm	490 / 570 mm	230 - 280 mm 205 - 255 ¹ mm	350 - 450 mm	0, 2, 4, 6, 8°
							
Fox	85, 95, 105, 115°	590 ⁴ mm	1010-1120 ⁵ mm	1015 / 1045 ⁵ mm	540 x 590 x 540 mm ⁴ Dimensione da chiusa	ca. 79 kg ⁵	127 kg
							
Fox	ca. 34, 40, 50 Ah	1600 / 1630 ⁵ mm	60, 100 mm ⁶	10,5% / 6°	2 x 200 W	6 km/h 8 km/h	up to 40 km ⁷

- 1/ Con braccioli curvati internamente
- 2/ Mediante regolazione dei braccioli
- 3/ Senza cuscino a 4° di basculamento (450 / 480 mm a 0° di basculamento)
- 4/ Base motrice
- 5/ A seconda della configurazione
- 6/ Con salicordolo

- 7/ In conformità a ISO 7176-4:
- 8/ Conforme alla direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS (2011/65/CE).
- 9/ Conforme alla normativa in materia di Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione all'uso di sostanze chimiche.



Colori carenatura

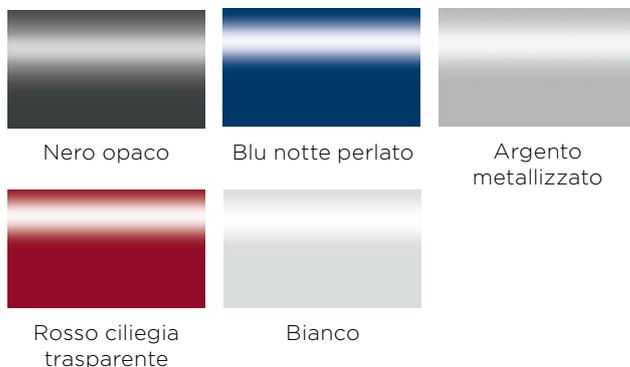

Il nome, il marchio e i loghi LiNX sono marchi commerciali registrati di proprietà di Dynamic Controls; l'utilizzo degli stessi da parte di Invacare è regolato da contratto di licenza.

Prima di procedere all'acquisto, in caso di necessità di maggiori informazioni in merito a questo modello di carrozzina, si rimanda al sito www.invacare.eu.com.

Per informazioni in merito agli utilizzatori tipici, all'uso consentito, alle eventuali regolazioni o per riferimenti di trasporto, si rimanda al manuale d'uso del prodotto.

Soddisfa i requisiti della norma ISO 7176-19



QRcode per accedere al sito internet **LiNX**

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy
Tel.: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

© 2016 Invacare International Srl
All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.

Fox - IT - 11/2016



Yes, you can.®