

Flo-tech[®] Contour ***Visco^{NG}***



Former seg etter brukerens kropp



Yes, you can.®

Invacare **Flo-tech Contour Visco^{NG}** er en anatomisk utformet skumpute i 100 % viskoelastisk materiale. Puten har utmerkede trykkfordelingsegenskaper for økt komfort og stabilisering av bekkenet. Putens utforming og profil gir lav høyde - noe som er praktisk når brukeren skal bruke føttene til å sparke seg frem eller når rullestolen kjøres inn til et bord.


Putens bakre utforming

- Gir ekstra støtte bak bekkenet for optimal bekkenposisjonering. Putens bakre utforming passer perfekt under ryggstøtten på stolen og fyller gapet som normalt sett oppstår ved bruk av vanlige sitteputer med rektangulær passform i bakkant. Putens utforming maksimerer brukerens kontakt med overflaten og bidrar til forbedret trykkfordeling og økt hudbeskyttelse.



Skrå profil i front

- Putens profilering i forkant gir mindre konflikt mellom pute og legg, samtidig som kneleddet får et større arbeidsområde. Dette gir flere muligheter for posisjonering av føttene og bedre forutsetninger for å sparke seg frem ved hjelp av bena.

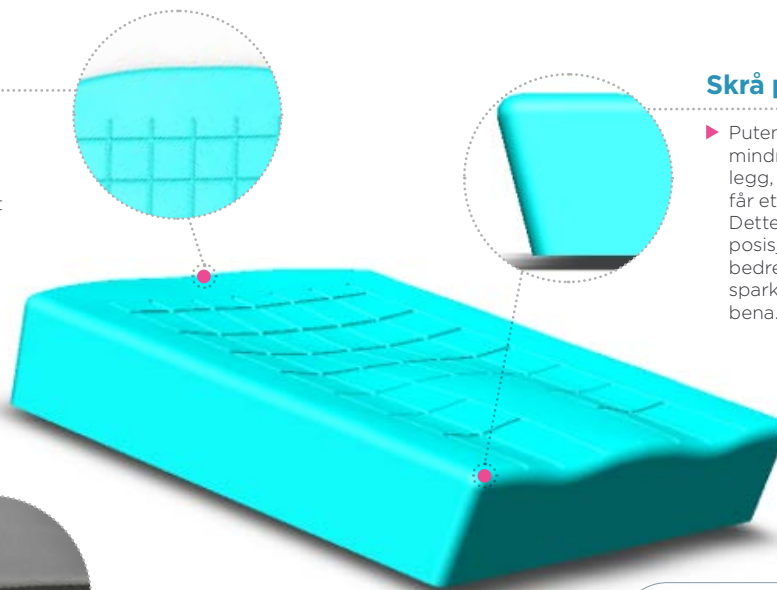

På anbud med NAV

2. plass i delkontrakt 3

- **Flo-tech Contour Visco^{NG}** er produsert i viskoelastisk skum, noe som gir brukeren mulighet til å synke ned i skummaterialet. På denne måten tilpasser puten seg til brukerens kroppsform, kontaktflaten blir større og trykkfordelingen blir bedre.

Flo-tech Contour Visco^{NG} leveres i flere bredde-/dybdekombinasjoner med ulik vektkapasitet. Dette for å best mulig imøtekomme den enkelte brukers behov. Puten kommer med to elastiske inkontinestrekk soem enkelt kan tas av for vedlikehold og rengjøring. Den sklisikre undersiden av trekket sørger for at puten forblir på plass, samtidig som det praktiseke bærehåndtaket gjør det enkelt å flytte puten mellom ulike stoler.

Tekniske data ▼

	Bredde ▼	Dybde ▼	Høyde ▼	Høyde ▼	Produktets totalvekt ▼	Maksimal brukervekt ▼	Maksimal vasketemperatur ▼	
Flo-tech Contour Visco^{NG}	355 mm 380 mm 405 mm 430 mm 455 mm 480 mm 505 mm	405 mm 430 mm 455 mm 530 mm	A=100mm B=100mm	100mm	1.3kg	140Kg*	90°	

Puten er produsert i henhold til EN1021-1 Cig og EN1021-2 Match

* Puter med setebredde 380 og 405 mm - minimum brukervekt: 40 kg
Puter med setebredde 430 mm og over - minimum brukervekt: 60 kg

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.

Dybde i cm	Bredde i cm						
	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5
40,5		300582	300585	300588	300591	300594	300597
		1632351	1632354	1632357	1632360	1632363	1632366
43		300583	300586	300589	300592	300595	300598
		1632352	1632355	1632358	1632361	1632364	1632367
45,5		300584	300587	300590	300593	300596	300599
		1632353	1632356	1632359	1632362	1632365	1632368
53	300600		300601		300602		300603
	1632369		1632370		1632371		1631222

HMS-nummer
Artikkelnummer Invacare

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®