

Flo-tech[®] Contour Visco



Origineel concept!



Yes, you can.

Het Invacare **Flo-tech Contour Visco** kussen heeft een hoge dichtheid en is temperatuur gevoelig, zodat het zich vormt naar het lichaam van de gebruiker. Dit biedt buitengewoon veel comfort en vermindert drukpunten. Dit low profile kussen is ideaal voor gebruik in een stoel en een rolstoel en maakt zijwaartse transfers eenvoudig.

Eigenschappen en opties



Waterdichte en waterafstotende zitbekleding

Uitgerust met bevestigingsgordel.

Verkrijgbaar in drie verschillende

Gebruikersgewichten: Soft (tot 32 kg), Medium (tot 51 kg) en Firm (tot 100 kg). Vanwege de maatvoering bijzonder geschikt voor kinderen.



Verkrijgbaar in 4 verschillende

gebruikersgewichten: Soft, Medium, Firm en Very Firm.

Traagschuim kussen voor maximaal lichaamscontact

De temperatuurgevoelige foam vormt zich naar de gebruikers lichaam, maximaliseert het contactgebied, biedt comfort en minimaliseert drukpunten.

Anatomisch gevormd traagschuim zitkussen met ingebouwde abductor en een rasterpatroon voor luchtcirculatie & vermindering van schuifkrachten.

Technische gegevens


Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.nl.

Verskillende maten	Hoogte	Gewicht	Max. gebruikers gewicht ¹	Reiniging
Een range van 51 maten	120 mm	1.6 kg	127 kg	80°

Geproduceerd naar Europese standaard: BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match, en BS 7176 (Crib 5)

1. Vermelde max. gebruikers gewicht is vermeld, uitgaande van een keuze voor een kussen met de juiste breedte en diepte voor de gebruiker.

Kleuren

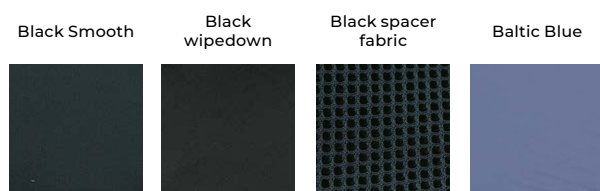

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland



Yes, you can.