

Flo-tech[®] Image



Stabiliteit en preventie



Yes, you can.

Het **Flo-tech Image** kussen bestaat uit een visco gelzakje bovenop een dichte foambasis. Het ontwerp van de foambasis is gevormd om een goede positie van de dijen en een stabiele zithouding te garanderen. Het verzonken heupgedeelte wordt opgevuld met een gelzak en biedt zo een grotere en betere contactzone. Voor gebruikers met een hoog decubitusrisico. Dit lage kussen is ideaal voor zowel gebruik in een rolstoel als in een gewone stoel.

Eigenschappen en opties



Vochtbestendige hoes

Hoes is multi-stretch, waterafstotend en ademend. Hoes is anti-slip met draagbeugel.



Verkrijgbaar in 23 maten

De Invacare **Flo-tech Image** is verkrijgbaar in een range van 23 maten, van 36 x 33 tot 46 x 41 cm.



Zakje met vloeibare gel

Laat een betere verdeling van de drukpunten toe. Zak met compartimenten om de stabiliteit van het bekken te behouden.



Antibacteriële Ultra Fresh™ behandeling

Beperkt de toename van bacteriën en maakt de foam meer bestand tegen geuren en schimmels.

Een combinatie van slimline voorgevormd foam en vloeibare gel

Anatomisch gevormd foamkussen met ingebouwde abductor en rasterpatroon voor luchtcirculatie. De Invacare **Flo-tech Image** combineert het voordeel van een voorgevormd foam bovenlaag met een grote gelzak voor het gebied van de zitbeenderen waardoor schuif- en wrijfkrachten tot een minimum worden beperkt. Voor gebruikers met een hoog tot zeer hoog decubitusrisico.

Technische gegevens


Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.nl.

Verschillende maten	Hoogte	Gewicht	Max. gebruikers gewicht ¹	Reiniging
				
Flo-tech Image Een range van 50 maten	78 mm	1.82 kg	140 kg	80°

Geproduceerd naar Europese standaard: BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match, en BS 7176 (Crib 5)

1. Vermelde max. gebruikers gewicht is vermeld, uitgaande van een keuze voor een kussen met de juiste breedte en diepte voor de gebruiker.

Kleuren

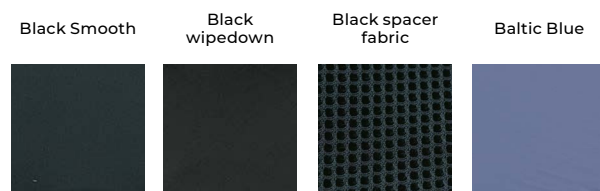

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland



Yes, you can.®