


Flo-tech[®] Lite



Voorgevormd kussen voor
exceptioneel comfort en een
verbeterde zithouding

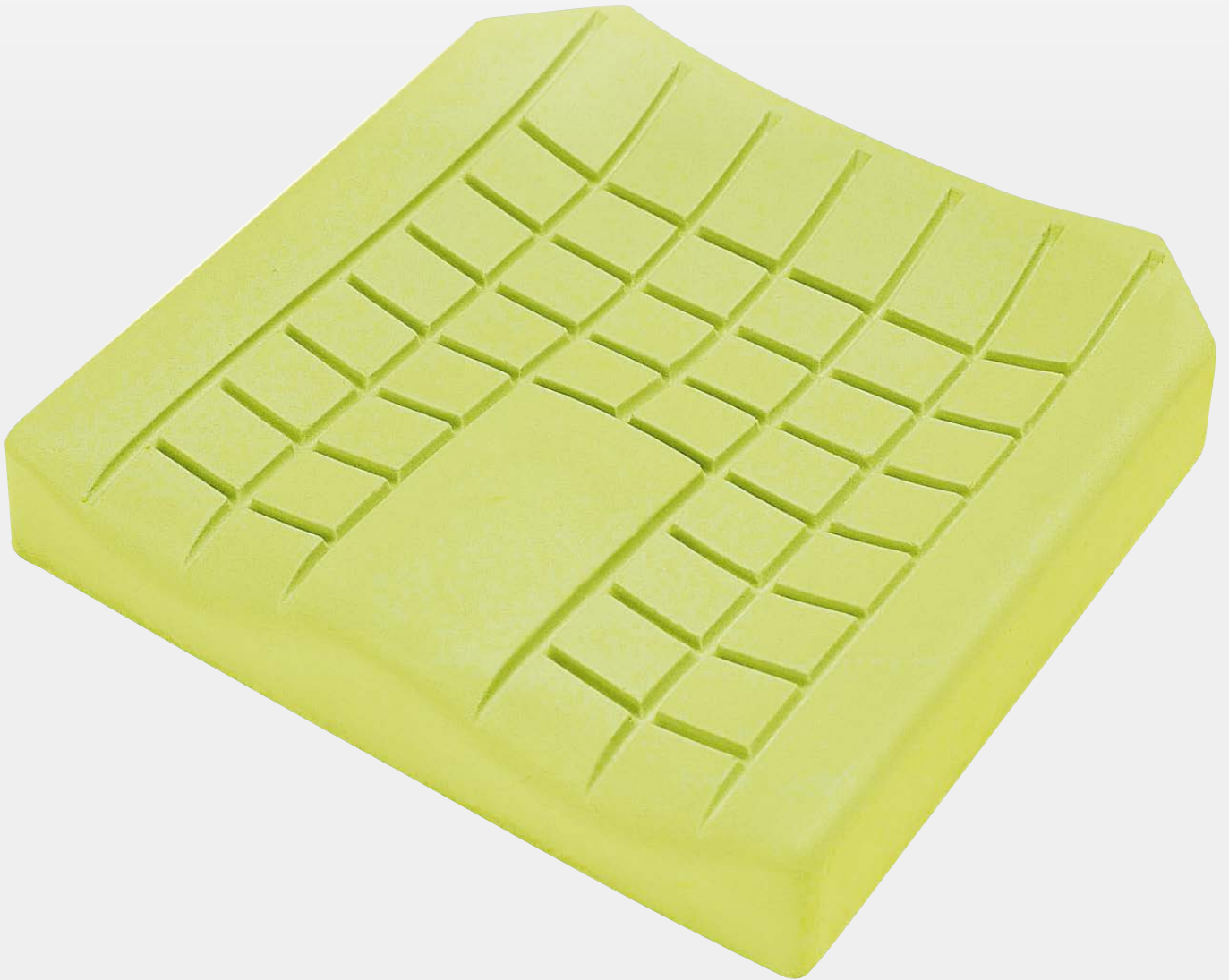

Yes, you can.

Het Invacare **Flo-tech Lite** zitkussen is een voorgevormd kussen dat zeer geschikt is voor gebruikers met een laag risico op het vormen van decubitus en voor hen die vooral comfort zoeken.

Het voorgevormde zitoppervlak biedt verbeterde stabiliteit en houdingondersteuning. Met maten vanaf 25 x 25 cm is het **Flo-tech Lite** kussen ook zeer geschikt voor kinderen.

Eigenschappen en opties



Vochtbestendige hoes

Hoes is multi-stretch, waterafstotend en ademend. Hoes is anti-slip met draagbeugel.



Verkrijgbaar in 61 maten

De Invacare Flo-tech Lite is verkrijgbaar in een range van 61 maten, van 25 x 25 cm tot 48 x 53 cm (zie maattabel voor details).



Zitting stabilisator

Voor correcte plaatsing van het kussen.



Antibacteriële Ultra-fresh™ behandeling

Beperkt de toename van bacteriën en maakt de foam beter bestand tegen geuren en schimmels.

Foam basis gemaakt van hoogwaardig, veerkrachtig, voorgevormd foam

Het hoogwaardige, veerkrachtige foam is volgens uniek recept geproduceerd en biedt drukverlagende eigenschappen en een lange levensduur. De gietvorm zorgt voor een 3D vorm die niet gemaakt kan worden van gesneden schuim. De abductieklos aan de voorzijde van het kussen scheidt de dijen, bevordert een goede houding en laat lucht circuleren.

Voorgevormd zitoppervlak

Biedt verbeterde stabiliteit en houding ondersteuning. Geeft ook een betere gewichtsverdeling in vergelijking met een plat oppervlak. De geprofileerde bovenlaag van het kussen zorgt ervoor dat er licht bewogen kan worden terwijl schuif- en wrijfkrachten verminderen.

Technische gegevens

Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.nl.

Verskillende maten	Hoogte	Gewicht	Max. gebruikers gewicht ¹	Reiniging
Flo-tech Lite Een range van 61 maten	78 mm	1.5 kg	127 kg	80°

Geproduceerd naar Europese standaard: BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match, en BS 7176 (Crib 5)

1. Vermelde max. gebruikers gewicht is vermeld, uitgaande van een keuze voor een kussen met de juiste breedte en diepte voor de gebruiker.

Kleuren

Black Smooth	Black wipedown	Black spacer fabric	Baltic Blue

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland



Yes, you can.®