

# ***Flo-tech<sup>®</sup> Solution***



Slimline kussen met uniek  
gelzak systeem



Yes, you can.

Het Invacare **Flo-tech Solution** kussen combineert een dun, voorgevormd kussen met een dubbele laag gelzakken in het gebied rondom de zitbeenderen. De compartimenten van de gelzak en de unieke voorgevormde foam vorm vergroten het ondersteunings oppervlak. Dit biedt een optimale bescherming voor gebruikers met een zeer hoog risico op decubitus en hen bij wie al huidschade is geconstateerd.

## Eigenschappen en opties



### Vochtbestendige hoës

Hoes is multi-stretch, waterafstotend en ademend. Hoes is anti-slip met draagbeugel.

### Verkrijgbaar in 44 maten

De Invacare **Flo-tech Solution** is verkrijgbaar in een range van 44 maten, van 38 x 41 tot 51 x 46 cm (zie maattabel voor details).

### Invacare Flo-tech Deep Solution optie

Optie van 10 cm diep foam is ook verkrijgbaar in 12 maten (zie maattabel voor details).

### Antibacteriële Ultra Fresh™ behandeling

Beperkt de toename van bacteriën en maakt de foam beter bestand tegen geuren en schimmels.

## Slimline voorgevormde foam basis met grote gelzak die de gehele oppervlakte van het kussen beslaat

Het contact gebied van de gebruiker met het foam kussen is beschermd omdat de gelzak de druk verspreidt. De extra laag gel zit onder het gebied van de zitbeenderen om drukverlichting te geven in dat gebied, waarmee dit kussen zeer geschikt is voor gebruikers met een zeer hoog risico op decubitus.

## Slimline voorgevormd kussen

Sommige gebruikers geven de voorkeur aan een slimline kussen, omdat dat beter bij hun dagelijkse routine past. Het laag geprofileerde kussen is met name handig bij het maken van zijdelingse transfers. Met ingebouwde abductor en rasterpatroon voor luchtcirculatie.

## Technische gegevens


Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op [www.invacare.nl](http://www.invacare.nl).

| Verschillende maten                                                                 | Hoogte                                                                              | Gewicht                                                                             | Max. gebruikers gewicht <sup>1</sup>                                                | Reiniging                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Een range van 44 maten                                                              | 78 mm                                                                               | 3.08 kg                                                                             | 140 kg                                                                              | 80°                                                                                  |

Geproduceerd naar Europese standaard: BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match, en BS 7176 (Crib 5)

1. Vermelde max. gebruikers gewicht is vermeld, uitgaande van een keuze voor een kussen met de juiste breedte en diepte voor de gebruiker.

## Kleuren

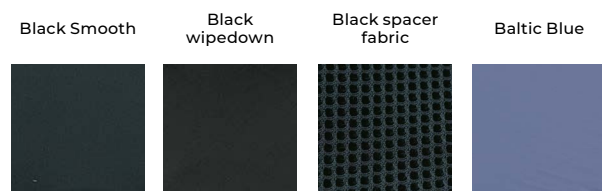

**Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57**  
 Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58  
[nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com)  
[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

Invacare B.V.  
 Galvanistraat 14-3  
 6716 AE Ede  
 Nederland



**Yes, you can.®**