

Küschall®
CHAMPION



UNLIMIT YOUR WORLD

Hos Kuschall tror vi på, at alt er muligt, når man virkelig ønsker det. Kuschall Champion kørestolen giver dig ubegrænsede muligheder for at opleve verden og udvide din horisont. **Unlimit your world.**

KÜSCHALL CHAMPION

Kuschall Champion er en unik kørestol, der giver brugeren køreegenskaber som i en stiv fastrammekørestol samtidig med muligheden for at kunne sammeklappe kørestolen, fx i forbindelse med transport. Champion er den ultimative kombination af moderne flot design med den bedste stabilitet og de optimale køreegenskaber. Champion kan desuden konfigureres med optionen "SK" (Schweizer Kniv), der gør stolen så kompakt, at den kan medtages i en rygsæk. Kuschall Champion er den perfekte rejsekammerat til nye eventyr.

HYDROFORM

Styrke, lethed og stivhed. Den nye designteknologi med den hydroformstøbte ramme på Champion øger stivheden og forbedrer derved køreegenskaberne. Den hydroforme forramme skaber et ergonomisk greb tæt ved sæderammen, der er særlig fordelagtig for brugeren under forflytninger. Det ikoniske design gør Champion elegant og diskret på samme tid - perfekt til den aktive bruger, som stiller store krav til sin aktive kørestol.

HYDROFORM FORRAMME

■ Det hydroforme design giver en stærk konstruktion med en helt stiv forramme, hvilket sikrer de mest optimale køreegenskaber.

AKTIV LETVÆGTSBREMSE

■ Den aktive letvægtsbremse er fremstillet i 100% aluminium og designet, så den matcher de moderne linjer på det hydroforme chassis - lav vægt, let betjening og optimal sikkerhed.

SUPER KOMPAKT

■ Champion bliver endnu mere kompakt ved at benytte optionen "SK" (Schweizer Kniv). Champion "SK" er ekstra sammenklappelig, og så kompakt, at den kan transporteres i en rygsæk.



Küschall® CHAMPION

CARBOLIFE DRIVRINGE

- De innovative Curve L drivringe giver brugeren mulighed for at køre med mindst mulig anstrengelse og med stabilt håndled.

FOLDE-MEKANISME

- Den unikke foldemekanisme gør Champions køreegenskaber suveræne i forhold til andre foldbare kørestole. Det smarte design gør, at brugeren let kan folde kørestol og ryglæn sammen i én bevægelse.

JUSTERINGS- MULIGHEDER

- Champion er udviklet med utallige, enkle justeringsmuligheder, der gør det let at tilpasse eller ændre balancepunktet og sædehøjden til brugerens krav.

RETNINGSSTABIL KØRSEL

- Den enkle og intuitive indstilling af forhjulet sikrer, at køreretningen holdes stabil.

EGENSKABER

UNIK

Champion har en helt unik opbygning, der gør det enkelt at tilpasse og konfigurere kørestolen nøjagtigt efter brugerens behov, også hvis behovet ændres. Balancepunktet på Champion kan indstilles i 9 forskellige sædepositioner, og ved samme beslag kan sædehøjden tilpasses trinløst.



HYBRID

Den fantastiske foldemekanisme er medvirkende til, at Champion har helt overlegne køreegenskaber, der kan sammenlignes med en fastrammekørestol. Resultatet er en perfekt konstrueret hybridkørestol: En aktiv, foldbar kørestol med stivhed og stabilitet som en fastrammekørestol.



SUPER KOMPAKT

Med et let greb kan kørestolen hurtigt foldes sammen til en kompakt og let enhed - ideel ved transport eller på rejse. SK (Schweizer kniv) optionen gør Champion yderligere super kompakt, da man ved et enkelt klik og uden værktøj kan folde forrammen og forhjul ind under kørestolen.




HYDRO-FORMET FORRAMME

Den nyeste teknologi indenfor fremstilling af kørestole er hydroforming, hvilket gør Champion kørestolen endnu stærkere. Den hydroformede frontramme giver et behageligt og ergonomisk greb til støtte for brugeren under repositionering eller ved forflytninger. Derudover sikrer det stærke design maksimal stivhed og dermed de bedste køreegenskaber.



PERSONLIGE VALG

1 STANDARDFARVER

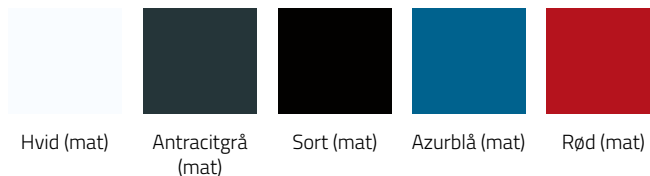

SPECIALFARVER*




* 10 dages ekstra leveringstid ved valg af specialfarve







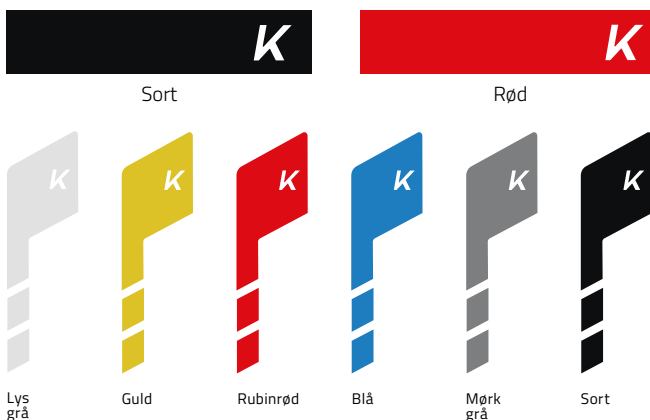








2 VÆLG LOGODESIGN



3 VÆLG PRINTFARVE



TEKNISKE DATA

SÆDE- BREDDE 360 - 480 mm interval 20 mm 	SÆDE- DYBDE 340 - 480 mm interval 20 mm 	UNDERBENS- LÆNGDE 320 - 500 mm trinløs justerbar 	RYG- HØJDE 300 - 465 mm interval 15 mm 	RYG- VINKEL 76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94° 
SÆDE- HØJDE For: 450 - 540 mm Bag: 390 - 480 mm 	RAMME- VINKEL 75° / 90° Lige eller V-formet 	BALANCE- PUNKT 9 positioner 	CAMBRING 0° / 1° / 3° 	TOTAL- LÆNGDE 75° ca. 930 mm 90° ca. 830 mm 
TOTAL- BREDDE SB + 160 - 240 mm 	TOTALBREDDE FOLDET Ca. 280 - 340 mm 	TOTAL- VÆGT Ca. 9.2 kg 	TRANSPORT- VÆGT Ca. 6.7 kg 	MAX BRUGERVÆGT 120 kg 

Alle mål- og vægtangivelser er baseret på sædebrede 400 mm og sædedybde 400 mm i den letteste og mest kompakte konfiguration. Vægt og mål kan ændres med forskellige konfigurationer af kørestolen. For yderligere information, se brugermanualen på vores hjemmeside.

K

UNLIMIT YOUR WORLD

Tlf.: +45 36 90 00 00
www.invacare.dk
denmark@invacare.com

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
2605 Brøndby
Danmark

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world og Champion er et registreret varemærke. Vi har gjort os mange anstrengelser for at sikre, at indholdet af denne brochure er fuldstændig opdateret, når den bliver sendt til trykning. Da der til stadighed vil blive forbedret på produkterne, forbeholder Invacare International GmbH sig ret til at tilpasse de enkelte modeller.

© Juli 2023, Invacare International GmbH. All rights reserved. DK - 1659367