

Küschall® K-SERIES



UNLIMIT YOUR WORLD*

En Küschall, pensamos que nada es imposible. La silla K-Series le ofrece una solución para mejorar su calidad de vida, incrementar su autonomía y alcanzar sus metas. **Unlimit your world.**

KÜSCHALL K-SERIES

La icónica K-Series modular es toda una referencia en el segmento de sillas rígidas con chasis monotubo. El módulo de asiento versátil es único y puede ser modificado sin esfuerzo, y de forma independiente del chasis. Además es totalmente ajustable para adaptarse a la perfección a sus exigencias.

HIDROFORMADO

La parte delantera del chasis hidroformado de la K-Series le brinda un diseño totalmente nuevo. Esa tecnología puntera ofrece más rigidez y robustez para unos resultados de conducción optimizados. Sus líneas y su diseño convierten la K-Series en un modelo icónico e intemporal.

* Su mundo no tiene límite

PARTE DELANTERA DEL CHASIS HIDROFORMADA

- Curvatura de chasis ergonómica, facilita el reposicionamiento y las transferencias del usuario. Ángulos de chasis disponibles: 90° y 75°.

FRENO ACTIVO LIGERO

- El nuevo freno de aluminio consta de un diseño depurado y ligero. Es muy efectivo y se activa con poca fuerza.

PARTE DELANTERA DEL CHASIS INCURVADA (ADUCCIÓN)

- La parte delantera del chasis incurvada permite una mayor sujeción de los miembros inferiores con un diseño único.

REPOSAPIÉS

- Nuevo diseño más moderno con tubos planos que reducen los puntos de presión y mejoran el confort y la estabilidad de los miembros inferiores.



Küschall® K-SERIES

BARRA TENSORA DE RESPALDO

- Diseño ergonómico que facilita las transferencias al coche. Más espacio entre el tapizado y la barra (100 mm) para mayor compatibilidad con respaldos Matrix.

RESPALDO

- Respaldo abatible sobre el asiento. Regulable en ángulo en 6 posiciones para adaptarse a las necesidades de cada paciente.

MÓDULO DE ASIENTO

- Es el corazón de la silla K-series: el módulo de asiento consta de 5 posiciones de centro de gravedad para conseguir una posición más o menos activa.

SOPORTE DE HORQUILLA

- Nuevo perfil de tubo en aluminio soldado al chasis. Diseño en adecuación con la nueva estética de la gama.

HORQUILLA

- Diseño moderno con rodamientos integrados para mayor protección contra la suciedad. Mantenimiento facilitado.

CARACTERÍSTICAS PERSONALIZACIÓN

CLAVES

EMBLEMÁTICA

Gracias a su chasis minimalista y abierto así como su diseño ligero, la K-Series le da la posibilidad de disfrutar de sus actividades cotidianas profesionales o de ocio.





MÓDULO DE ASIENTO

El ajuste del centro de gravedad escondido debajo del módulo de asiento ofrece 5 posiciones diferentes. El centro de gravedad de la silla puede ser fácilmente modificado, sin necesidad de pedir componentes adicionales.

DINÁMICO

El chasis conserva siempre una geometría perfecta con respecto al suelo. No hace falta realizar ningún ajuste en el chasis. Las ruedas permanecen siempre en la misma posición con respecto al chasis. Una concepción que proporciona mucha rigidez para unos resultados de desplazamiento óptimos.

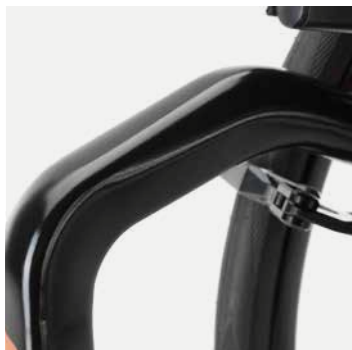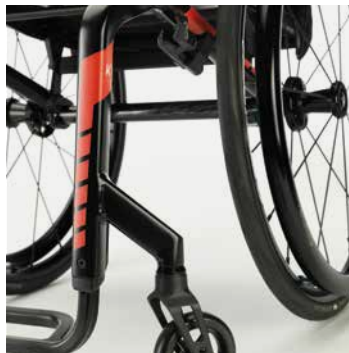

PARTE DELANTERA DEL CHASIS HIDROFORMADA

La nueva tecnología del hidroformado le confiere aun más carácter a la K-Series: un look emblemático con líneas depuradas y ergonómicas reconocibles entre todos los modelos. Todavía más rígida y robusta, la K-Series le ofrece una experiencia de conducción mejor que nunca.


1 ELEGIR EL COLOR DE CHASIS



Blanco puro



Gris antracita



Negro espacial



Rojo Carmin



Azul Celeste

2 ELEGIR EL TIPO DE CALCOMANIA



3 ELEGIR EL COLOR DE CALCOMANIA



Rojo



Negro



Gris claro



Dorado



Rojo



Azul



Gris oscuro



Negro

DATOS TÉCNICOS

ANCHURA DE ASIENTO

320 – 500 mm
Incrementos de 20 mm



PROFUNDIDAD DE ASIENTO

350 – 525 mm
Incrementos de 25 mm



LARGO DE PIERNA (UL)

290 – 480 mm
Incrementos de 10 mm



ALTURA DE RESPALDO

270 – 480 mm
Incrementos de 15 mm



ÁNGULO DE RESPALDO

74° / 78° / 82° /
86° / 90° / 94°



ALTURA DE ASIENTO

Delantera: 450 – 520 mm
Trasera: 390 – 490 mm
Incrementos de 10 mm



ÁNGULO DE CHASIS

75° / 90°
Chasis en V o incurvado
(aducción)



ANCHURA TOTAL *

Anchora de asiento + 170 mm



LONGITUD TOTAL

Chasis 75°: aprox. 830 - 1055 mm
Chasis 90°: aprox. 760 - 985 mm



POSICIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD

80 mm / 95 mm / 110 mm /
125 mm / 140 mm



CAÍDA

0° / 3° / 6°



PESO TOTAL

aprox. 7.8 kg



PESO DE TRANSPORTE

aprox.. 5.1 kg



PESO MAX. USUARIO

130 kg



PRUEBA DE CHOQUE

Conforme normativa ISO
7176-19



Todas las medidas contenidas en este catálogo corresponden a un ancho y una profundidad de asiento de 400 mm en la configuración más ligera y compacta posible. El peso y las medidas varían en función de la configuración que se elija para cada modelo. En caso de duda, consulte con nuestro Departamento de Atención al Cliente o nuestra página web: www.invacare.es

* Caída 0°. Con protectores desmontables el ancho total incrementa 20 mm en total (ver tarifa)



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Invacare IBERIA
Tel. (34) 900 992 841
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Esta silla de ruedas es una ayuda a la movilidad dirigida a personas con discapacidad. Este dispositivo médico consta de marcado CE. Por favor, leer atentamente el manual de usuario antes de usar la silla.

Küschall es una marca registrada. Todos los datos contenidos en esta publicación se suponen correctos en el momento de la impresión. küschall se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.

© Junio 2019, Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. ES