

AQUATEC®

Hygiene

Dusj - bading - toalett



Optimale løsninger for personlig pleie

Ergonomisk, allsidig og enkel å manøvrere



Yes, you can.®

Innholdsfortegnelse

Dusj

Aquatec Ocean Ergo serien

Ergonomiske forbedringer og enda flere tilpasningsmuligheter

s. 5

Nye egenskaper

s. 6 - 7

Ocean Ergo – serie

s. 8

Tekniske data

s. 9

Tilbehør og tilpasninger

s. 10 - 12

Kompatibilitet

s. 13

Bad

Aquatec Orca badekarheis

Aquatec Orca badekarheis for sittende posisjon

s. 14 - 16

Tilbehør Aquatec Orca badekarheis

s. 17 - 18

Tekniske data

s. 19

Tilbehør

Aquatec Dreiskive / Disk

s. 20 - 21

Toalett

H440 Omega Eco

s. 22 - 23



AQUATEC®

Ocean Ergo

Et avansert sortiment med dusj- og toalettstoler



Optimale løsninger for personlig pleie

Ergonomisk, allsidig og enkel å manøvrere

INVACARE
Yes, you can.

Ergonomiske forbedringer og enda flere tilpasningsmuligheter

Vårt nyeste Aquatec Ocean Ergo-sortiment er spesielt designet for å gi støtte og hjelp ved forflytning og stell på baderommet.

Fra standard-modeller til modeller med drivhjul eller mer avanserte modeller med vippefunksjon. Ocean Ergo-serien byr på et fleksibelt utvalg av dusjstoler som tilbyr personlige pleieløsninger for et bredt spekter av behov.

I samarbeid med ledende terapeuter er designmålet vårt fokusert på ergonomi og brukerens livsstil og velvære.

Alle modellene i Ocean Ergo-serien er optimalisert med nytt design for å oppnå økt sikkerhet, komfort og støtte.

Enten den personlige pleieløsningen er selvstendig eller med hjelp av en pleier, gir våre avanserte stoler en verdig løsning.

Tilt-in-space-modeller gir ekstra støtte i sitteposisjoner.

Ocean VIP Ergo og Ocean Dual VIP Ergo har en setevinkel på 5° til 40° med en integrert vektskiftmekanisme som sikrer optimal stabilitet.

Ocean Dual VIP Ergo er multifunksjonell da den både har setetilt og justerbar rygg. Setet og ryggstøtten kan vinkles og åpnes opp mellom 5° og 35° i en enkel og jevn justering på grunn av den lette rammen.

5° - 35°



NYE egenskaper

Forbedret armlen

- Nye armlen gir økt støtte og komfort for brukeren. De nye og valgfrie armlenputene gir brukere en mykere overflate og hvilestilling. Armlenet har også en brukervennlig og valgfri integrert sikkerhetslås.



Redusert setehøyde

- Rammen kan senkes ekstra lavt for å imøtekomme ulike høydebehov og for å fremme trygge og selvstendige forflytninger.



Tilt-stopp-funksjon

- En valgfri funksjon som er enkel å montere og som forhindrer at rammen tilter forover forbi 0°. Dette sikrer at rammen forblir horisontal i forhold til bakken og er et hjelpemiddel for de som blir heist inn/ut av stolen.



Ergonomisk nakkestøtteholder

- Med flere aksejusteringer gir den ergonomiske nakkestøtteholderen svært god postural støtte for hode-/nakkeregionen. Justeringer gjøres raskt og enkelt ved å enkelt rotere de integrerte håndskruene for å oppnå riktig posisjon for den individuelle brukeren.



Innovativt ergonomisk seteplate

- Konturformet design oppmuntrer til en mer oppreist sittestilling for økt uavhengighet og komfort.
- Designet etter avtrykk etterlatt av bruker.
- En 5° setetilt løfter knærne i en naturlig knebøystilling ved toalettbesøk
- Forflytningshjelpemidler i front tillater brukeren å posisjonere seg selv inn i en behagelig posisjon.



Svært konfigurierbar

- Tilgjengelig med et bredt utvalg av posisjonerings-, toalett- og setetilbehør, som kan brukes til å støtte et bredt spekter av tilstander og posisjoneringsbehov.



Meget stabil

- Økt stabilitet med ramme i rustfritt stål for ekstra sikkerhet og trygghet.



Enkel å håndtere

- Gir et lite fotavtrykk og en optimalisert hjulbase gjør det lettere å manøvrere i små rom.
- Enkel demontering for transport og lagring.

Vi presenterer vår nyeste Ocean Ergo-serie

Oppdag hele serien nedenfor, inkludert valgfritt tilbehør til individuelle behov.



Ocean Ergo
En standard pleierdrevet modell
Art. nr.: 1643741
HMS-nr.: 269542
Inkluderer myksete, bekkenholder og bekken

Ocean Ergo XL
En standard bariatrisk pleierdrevet modell med maksimal brukervekt på 180 kg
Art.nr.: 1643742



Ocean 24" Ergo
Standard modell for brukerdrevet kjøring
Art. nr.: 1650146
HMS-nr.: 297749
Inkluderer myksete, bekkenholder og bekken



Ocean 24" Ergo XL
En standard bariatrisk modell for brukerdrevet kjøring med maksimal brukervekt på 180 kg

Ocean VIP Ergo
Stol med manuell setetilt designet for brukere som har behov for litt mer assistanse med posisjonering når de sitter i stolen
Art. nr.: 1643743
HMS-nr.: 269836
Inkluderer myksete, bekkenholder og bekken

Ocean Dual VIP Ergo
Stol med manuell setetilt og ryggregulering designet for brukere som har et større behov for assistanse med posisjonering når de sitter i stolen
Art. nr.: 1644843

Tekniske data



Setebredde ▼



Setedybde ▼



Total bredde ▼



Total dybde ▼



Bredde mellom armene ▼

Ocean Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	905 mm	475 mm
Ocean Ergo XL	480 mm	480 mm	645 mm	905 mm	555 mm
Ocean 24" Ergo	480 mm	480 mm	670 mm	1050 mm	475 mm
Ocean 24" Ergo XL	480 mm	480 mm	670 mm	1050 mm	555 mm
Ocean VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm
Ocean Dual VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm



Setehøyde ▼



Tilt setevinkel ▼



Tilt ryggvinkel ▼



Vekt ▼



Maks. brukervekt ▼

Ocean Ergo	440 – 600 mm	-	-	17 kg	150 kg
Ocean Ergo XL	440 – 600 mm	-	-	18 kg	180 kg
Ocean 24" Ergo	440 – 600 mm	-	-	23 kg	150 kg
Ocean 24" Ergo XL	475 – 600 mm	-	-	24 kg	180 kg
Ocean VIP Ergo	475 – 600 mm	-5° - 40°	-	23.5 kg	150 kg
Ocean Dual VIP Ergo	475 – 600 mm	-5° - 40°	5° - 35°	28.3 kg	150 kg



Ramme farge

For mer informasjon, brukermanualer og tilbehørsbrosjyre, se www.invacare.no



Tilbehør og tilpasninger

Ocean Ergo-serien tilbyr avanserte løsninger innen dusjstoler, og er designet for å gi brukeren høy grad av tilpasningsmuligheter med konfigurerbarhet som standard. For ytterligere tilpasning av dusjstolen vil vårt nyeste tilbehørssortiment gi ekstra komfort, støtte og sikkerhet.



Fotplater

- > Vinkelregulerbare, oppfellbare fotplater med justerbare hælband
- > Krever ingen verktøy

Benstøtter

- > Høydejusterbare, utsvingbare og avtagbare benstøtter
- > Krever ingen verktøy

Armlener

- > Ergonomiske, oppfellbare armlener som kan justeres i to ulike høyder

Setehøyde

- > Setehøyden kan justeres mellom 440 mm og 600 mm* eller 475 mm og 600 mm**
- * Ocean Ergo, Ergo XL og 24"
- ** Ocean Ergo 24" Ergo XL og VIP
- > Krever ingen verktøy

Tilbehør

Sete og ryggstøtte

Myksete

Mykt sete i PU-skum med nøkkelhull gir ekstra komfort og trykkavlastning. Også tilgjengelig med mindre åpning. Enkel å tilpasse og rengjøre.

Myk ileggspute

Myksetet kan anvendes med eller uten ileggsputen. Tilgjengelig som standardversjon eller mindre versjon.

Ergonomisk myksete

Ekstra mykt sete i viskoelastisk skum, designet for økt pelvisstabilitet og bedre posisjonering. Egner seg godt til de med følsom og tynn hud

Vendbart myksete

Utsparing som kan benyttes alle 4 retninger.

Heldekkende myksete

Gir ekstra komfort når toalettfunksjonen ikke er i bruk.

Fast, avtagbar rygg

Solid ryggstøtte som bidrar til en stabil og oppreist posisjon. Enkel å rengjøre.

Padding til armlene

Gir forbedret støtte og komfort for brukeren (ikke for XL-armlener)

XL rygg

Øker bredden mellom armlenene med 80mm. Kan benyttes til standard Ocean Ergo-modeller.

Bredere XL armlen

Øker avstanden mellom armlenene med 40 mm på hver side

Myk ryggpute

For ytterligere stabilitet og komfort. Kan også bidra til enklere posisjonering av mindre brukere.

Komfort ryggtrekk

Et alternativ til standard ryggstøtte med et mykere materiale for økt komfort.

Vicair hygienepute

Vicair hygienepute er en trykkavlastende pute som med sine fire seksjoner gir store tilpasningsmuligheter. Vicair hygienepute er tilgjengelig i størrelse 48x45x8 cm og er designet for å passe Ocean Ergo-serien. Puten kan maskinvaskes.

Tilbehør

Sikkerhet

Sikkerhetsbøyle

Ekstra sikkerhet for brukere som lener seg fremover.

Sikkerhetslås for armlen

Låser armlenen i vertikal eller horisontal posisjon.

Tippesikring

Gir ekstra sikkerhet ved urolige brukere

Tilt-stopp

Sikrer at rammen forblir i horisontal posisjon når brukeren heises inn/ut av stolen.

Posisjonering

Sikkerhetsbelter

For sikker posisjonering. Kan justeres individuelt og er enkel å montere. Kan monteres som både hoftebelte og brystbelte. Kan maskinvaskes.

Sidestøtte

Justerbar i høyden via tre ulike innstillinger på ryggstøtten. Brede sideputer som gir komfort og effektiv trykkomfordeling og som kan dybdejusteres.

Multijusterbar nakkestøtteholder

Muliggjør flerveisjustering av nakkestøtten for bedre posisjonering av hode/ nakke. Leveres uten nakkepute.

Ergonomisk hode- og nakkestøtte

Gir god støtte og posisjonering av hodet. Nakkestøtten vist på bildet.

Toalettbesøk

Vinkelregulerbar benstøtte

Høyde- og vinkelregulerbar benstøtte med polstret leggpute for ekstra komfort. Fotplate inkludert.

Amputasjonsstøtte

Leveres uten fotplate

Sprutskjerm

Passer til myksetet med standard og smalere åpning. Enkelt å feste.

Bekkenholder med lokk

Ergonomisk håndtak gjør det enklere å trekke ut bekkenet fra holderen. Målemuligheter på innsiden. Integrert lokkholder.

Kompabilitet

Det meste av tilbehøret er kompatibelt med alle Ocean Ergo-modellene

✓ Kompatibel
x Ikke kompatibel
+ Inkludert

	Artikkel-nr.	HMS-nr.	Ocean Ergo	Ocean 24" Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean 24" Ergo XL	Ocean VIP Ergo	Ocean Dual VIP Ergo
Myksete	AP1603142	288941	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Myk ileggspute	AP1603143	291088	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Myksete med mindre ovalt hull	AP1603145	269899	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ileggspute for smalere myksete	AP1603152	269900	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sprutskjerm	AP1603155	291089	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heldekkende myksete	AP1603154	291090	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomisk myksete	AP60121311	291091	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vendbart myksete	1544469	199703	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sikkerhetsbøyle 2.0	AP60123732	297779	✓	✓	x	x	✓	✓
Sikkerhetsbøyle 2.0 XL (kun til armlen 2.0)	AP60123771	-	x	x	✓	✓	x	x
Sikkerhetsbøyle XL (kun til XL med gamle armlen)	1470078	097889	x	x	✓	✓	x	x
Brystbelte	1470081	097878	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hoftebelte	1470082	097877	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XL rygg	AP1604015	-	✓	✓	+	+	x	x
Fast, avtagbar rygg	1575299	210938	✓	✓	x	x	✓	✓
Myk ryggpute	1558769	199705	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Padding til armlen (1 pad: kun for armlen 2.0)	AP1643748	297753	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Armlen XL	1470086	097875	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sikkerhetslås for armlen XL	1470077	097885	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sikkerhetslås for armlen 2.0	AP1643760	297770	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24" hjulsett komplett	16379	025123	✓	+	✓	+	x	x
Amputasjonsstøtte, høyre	AP1643573	297751	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Amputasjonsstøtte, venstre	AP1643574	297752	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vinkelregulerbar benstøtte med fotplate, høyre	AP1643543	267756	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vinkelregulerbar benstøtte med fotplate, venstre	AP1643572	297757	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sidestøtte	1535077	199694	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multijusterbar nakkestøtteholder	AP1531613	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hodestøtte	1531465	199696	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nakkestøtte	1531608	199695	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bekkenholder med lokk	10230	25119	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bekkenfeste	AP1602078	269898	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tippesikring, front og bak (Ergo VIP-modeller)	AP1603992	-	x	x	x	x	✓	✓
Tippesikring, front (Ocean Ergo)	AP1601986	297783	✓	✓	✓	✓	x	x
Komfort ryggtrekk VIP Ergo	AP1603606	-	x	x	x	x	✓	✓
Komfort ryggtrekk Ocean Ergo	AP1604136	297774	✓	✓	x	x	x	x
Komfort ryggtrekk Ocean Ergo XL	AP1604016	-	x	x	✓	✓	x	x
Tilt-stopp skruesett	AP60129156	-	x	x	x	x	✓	✓

AQUATEC®

Orca

Badekarheis til alle typer badekar



Yes, you can.

Nyt et sikkert bad med Aquatec Orca badekarheis for sittende posisjon

enkelt og med kun ett tastetrykk. Den stabile, robuste rammen med forsterkede sakser og forsterket base gir høy sikkerhet. Den høye ryggen er formet for å gi nakken støtte, og bidrar til å gjøre badet komfortabelt.

- > Vedlikeholdsfri aktuator, kraftig men stillestående
- > Den ergonomisk utformede ryggen kan foldes opp og ned med én hånd
- > Rygg kan senkes til 40°
- > Den ergonomiske håndkontrollen flyter i vannet
- > Dersom batterikapasiteten i håndkontrollen er for lav, blokkeres muligheten for å senke badekarheisen
- > Avtagbar dekkmatte som kan maskinvaskes
- > Ny bunnplate med bærehåndtak gjør håndteringen enkel
- > Patenterte sugekopper som løsner lett fra badekaret
- > Praktisk holder for håndkontroll på ryggen
- > Dreneringshull i bunnplaten forenkler rengjøringen
- > Bredt sortiment av tilbehør for individuell tilpasning



PÅ ANBUD
MED NAV

Postvinner
Delkontrakt
9

Hovedprodukt (standardkonfigurasjon)

Aquatec Orca badekarheis inkl dekkmatte og lader.

Artikkel nr: 1573864

HMS nr: 211366



Badekarheis i drift


1

2

3

Tilbehør Aquatec Orca badekarheis**Vinkelregulerbare sideplater**

Individuelt justerbare sidevanger for sikker sittestilling.

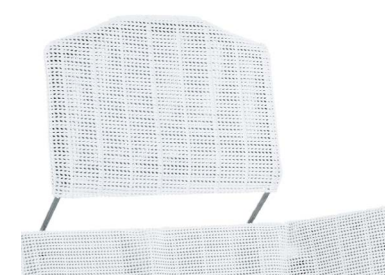Art nr: **1573970** Hvit til **Orca** (når bestilt sammen med heisen)Art nr: **1471623** Hvit til **Orca** (ved ettermontering)**Høydejusterbar hodestøtte**

For sikker støtte av hode-og nakkeområdet. Anbefales sammen med spesial rygg. Alle delene for montering av hodestøtten er inkludert.

Art.nr.: **15461** Hvit, til alle **Orca**HMS-nr.: **199075****Bryst- og hoftebelte**

i mykt og hudvennlig materiale.

Art. nr.: **1528702** til **Orca**HMS-nr.: **211367****Abduksjonskloss**


Forhindrer glidning fra seteoverflaten. Til alle batteridrevne badekarheiser.

Art. nr.: **1525932** Blå (Ø 70 mm)HMS-nr.: **199069**Art. nr.: **1525933** Blå (Ø 120 mm)HMS-nr.: **199068****Høydeadapter**

Øker sittehøyden med 20, 40, og 60 mm. For alle batteridrevne badekarheiser.

Art. nr.: **15170** Høydeadapter 20 mm (4 stk i pakken) inkl. ombygningssettHMS-nr.: **109172**Art. nr.: **14694** Høydeadapter 20 mm (4 stk i pakken) uten ombygningssett

Tilbehør Aquatec Orca badekarheis

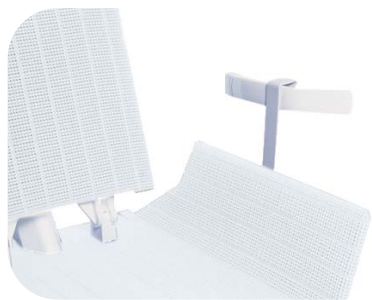

Sideplateavleder

Brukes for å gjøre sideplatene smalere slik at heisen kan passere hindringer.

Art. nr.: **15309** Til alle batteridrevne badekarheiser

HMS-nr.: **163185**



Transportbag med hjul

Hendig bag til transport av badeheisen.

Art. nr.: **14586AQT** Bag til badeheis



> Vennligst fyll inn ønsket mål ved bestilling


Spesialtilpassede sideklaffer

Forenkler overføring fra heisen.

Art. nr.: **1574239** Sideklaffer (par), inkludert hvitt trekk, til **Orca** (når bestilt sammen med heisen)

Art. nr.: **1471606** Sideklaff, uten trekk, til **Orca / Orca F** (ved ettermontering)

HMS-nr.: **199081**

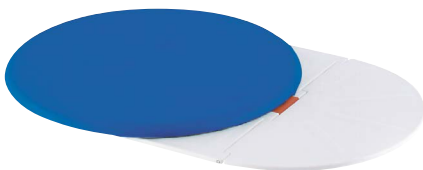

Aquatec Trans



Glideplate som forenkler forflytning inn og ut av badekaret.

Art. nr.: **4.03.002** Roterende forflytning, blå

HMS-nr.: **142889**

Tekniske data

Produkt ▼	Aquatec Orca ▼	Aquatec Orca F ▼	Aquatec Orca XL ▼
Badekarheis med dekkmatte	1573864 HMS-nr.: 211366	1471071	1573685 HMS-nr.: 211365
Dimensjoner ▼			
Setebredde uten sidestøtte	375 mm	375 mm	375 mm
Setebredde med sidestøtte	715 mm* (A)	715 mm (A)	715 mm (A)
Setedybde	590 mm (B)	590 mm (B)	590 mm (B)
Setehøyde maks	420 mm (C)	420 mm (C)	420 mm (C)
Setehøyde min	60 mm	60 mm	60 mm
Ryggbredde	360 mm (D)	360 mm (D)	360 mm (D)
Rygghøyde	665 mm (E)	665 mm (E)	665 mm (E)
Total dybde (oppreist rygg)	650 mm (F)	690 mm (F)	650 mm (F)
Total dybde (tilbakelent rygg)	920 mm	–	920 mm
Total høyde med rygg	1075 mm (G)	1075 mm (G)	1075 mm (G)
Baseområde	580 x 285 mm	580 x 285 mm	580 x 285 mm
Tykkelse dekkmatte	3 mm	3 mm	3 mm
Annen info ▼			
Total vekt uten håndkontroll	10,8 kg	11,4 kg	11,6 kg
Total vekt uten batteripakke	–	–	–
Vekt, sete	6,6 kg	7,2 kg	7,4 kg
Vekt, rygg	4,2 kg	4,2 kg	4,2 kg
Vekt, håndkontroll	0.4 kg	0.4 kg	0.4 kg
Vekt, batteripakke	–	–	–
Brukervekt	140 kg	140 kg	170 kg
Rygg kan senkes til	40°	–	40°
Farge	Hvit	Hvit	Hvit

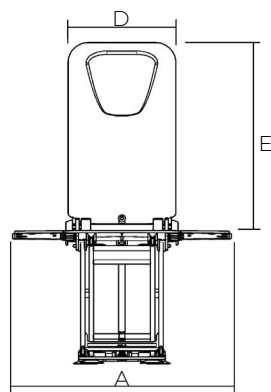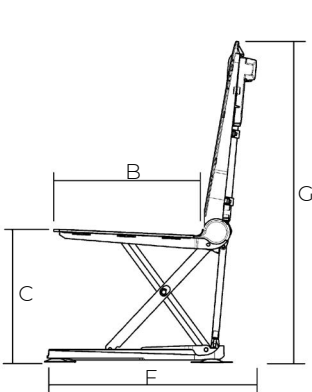

AQUATEC®

Dreieskive



En liten hjelper for å snurre til riktig posisjon



Yes, you can.

Aquatec Dreieskive

- Ekstra stor sitteflate
- Dreieplatens rotasjonsfunksjon aktiveres når brukerens vekt kommer på platen
- Sitteflaten roterer og glir enkelt til de ulike posisjonene
- Overflaten på setet er myk mot huden og enkel å rengjøre
- Kan kombineres med badekarheis *Aquatec Orca*

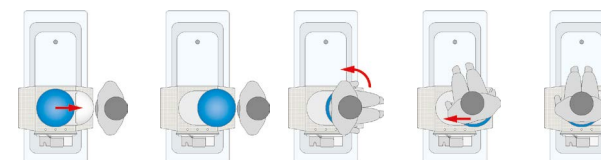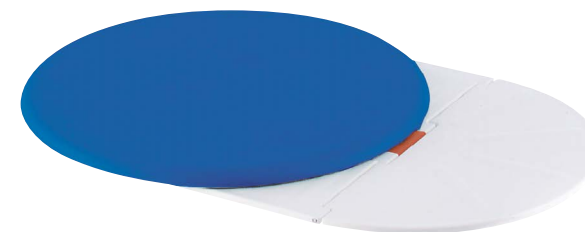

Aquatec Disk

- Ekstra stor sitteflate
- Dreieplaten roterer lett
- Sitteflaten på roterende setet er myk mot huden, i tillegg er den lettstelt og enkel å rengjøre
- Ved å sette sammen **Disk**, dusjkrakken **Dot** og en adapter får du raskt en dusjkrakk med roterende sete.



Aquatec Step

- Stabil ramme
- Føtter med anti-skli materiale
- Anti-skli, avtakbart trekk, maskinvaskes

Tekniske data

Produkt ▼	Aquatec Trans ▼	Aquatec Disk ▼	Aquatec Step ▼
Roterende forflytning, blå	4.03.002		
Roterende forflytning, grå	4.03.008		
Roterende disk, blå		4.02.002	
Roterende disk, grå		4.02.008	
Step, blå			3.00.002
Step, hvit			3.00.001
Dimensjoner ▼			
Diameter	365 mm	365 mm	–
Lengde	530 mm	–	400 mm
Bredde	–	–	300 mm
Høyde	25 mm	25 mm	165 mm
Annen info ▼			
Vekt	2.2 kg	1.6 kg	1.5 kg
Maks brukervekt	140 kg	140 kg	150 kg
Farge	Blå, grå	Blå, grå	Blå, grå

H440 Omega Eco

På anbud med NAV



Invacare **H440 Omega Eco** er rett valg dersom du vil kombinere funksjon, komfort og design. Den er enkel å regulere i høyden, har en komfortabel innleggsplate for setet som er praktisk i bruk og et moderne design som passer godt inn både hjemme og på institusjoner.

Invacare **Omega Eco H440** har en toalettbøtte som enkelt kan fjernes ovenfra.

Toalettstolen kan også brukes over vanlige toaletter for ekstra støtte. Det moderne og lette designet sørger for at toalettstolen passer godt inn i ethvert bomiljø og gir støtte der det trengs.


Egenskaper

- Høydejusterbar fra 40,5 cm til 58,5 cm
- Enkel håndtering både av innleggsplaten for setet og toalettbøtten
- Stolen er enkel å rengjøre
- Høy maksimal brukervekt: 140 kg
- Kan enkelt plasseres over standardtoaletter.

PÅ ANBUD
MED NAV

Tekniske data

H440 Omega Eco ▼	
Toalettstol – minstebestilling 5 stk	1542903
HMS nr	243288
Mål ▼	
Setebredde	450 mm (A)
Setedybde	430 mm (B)
Setehøyde	405 - 585 mm (C)
Total bredde	580 mm (D)
Total dybde	530 mm (E)
Total høyde	790 - 970 mm (F)
Høyde til armlener	620 - 800 mm (G)
Høyde opp til nedre setekant:	
Med holder for toalettbøtte	335 - 515 mm
Uten holder for toalettbøtte	345 - 525 mm
Høyde fra gulv til seteplate	405 - 585 mm
Bredde mellom armlener	470 mm
Bredde, intimhull i seteplate	200 mm
Dybde, intimhull i seteplate	255 mm
Annen informasjon ▼	
Maks brukervekt	140 kg
Vekt	7,5 kg
Farge	Lavendelblå

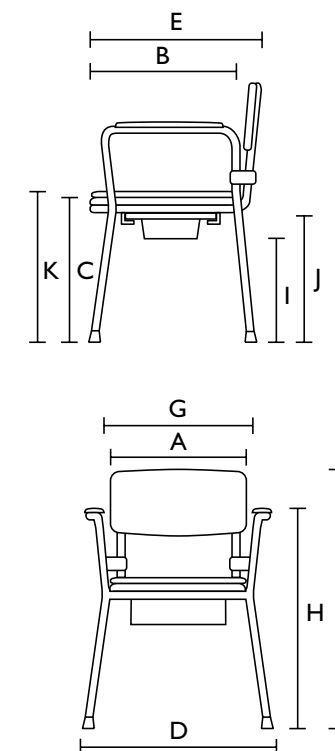

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®