



Invacare® | **iPortal2™**

Ny teknologi - nye muligheder...

Trusted Solutions,
Passionate People



Med **iPortal** åbner der sig en helt ny verden for el-kørestolsbrugere med nedsat eller ingen håndfunktion.

iPortal gør det muligt at styre iPhone, iPad og iPod Touch ved hjælp af den elektriske kørestols joystickstyring eller med hovedstyring. Dette betyder, at brugeren nu kan anvende sit joystick til at ringe op, modtage opkald, SMS'e, e-maile, høre og læse bøger, anvende talemaskinefunktioner og meget, meget mere.

Med **iPortal** får langt flere el-kørestolsbrugere mulighed for at være i kontakt med omverdenen, hvor som helst og når som helst.



iPortal™



At flytte grænser

iPortal er udviklet med udgangspunkt i el-kørestolsbrugerens menneskelige behov. **iPortal** giver mulighed for større frihed, sikkerhed og selvværd. Udviklingen af nye apps går stærkt, og flere kommer til dag for dag. **iPortal** giver mulighed for at flytte grænser og det er så op til brugeren at bestemme, hvor langt de skal flyttes.

Uanede muligheder

iPortal giver mulighed for:

- telefonopkald
- SMS/MMS
- e-mail
- skrive noter
- apps fx talebeskeder
- styre eksterne enheder fx TV & Radio
- surfe på Internettet
- afspille musik, læse e-bøger og meget mere...


Egenskaber



Frihed og uafhængighed

iPortal giver fuld kontrol over din Apple iPhone, iPad og iPod Touch. Med **iPortal** kan du telefonere, sende SMS, e-maile, spille musik, høre eller læse bøger, surfe på Internettet, se nyheder, vejret eller reklamer, holde kontakt med vennerne og meget mere.

Der er uanede muligheder for via Internettet at hente forskellige former for apps til almen brug og apps målrettet specielt til handikappede brugere fx. Text to speech, handikapparkering og omgivelseskontrol.

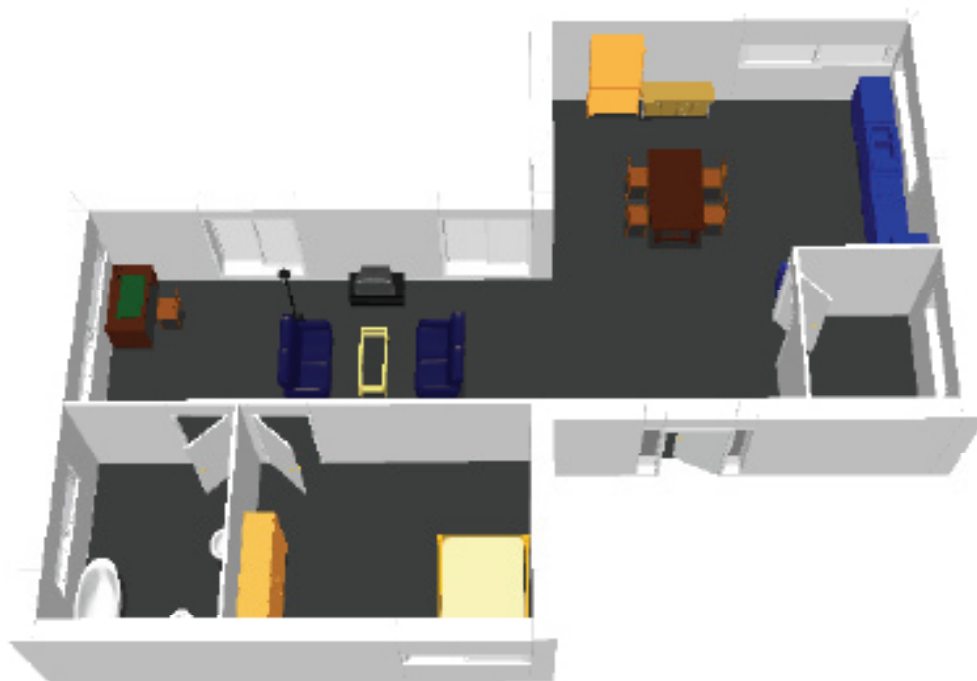

Mulighed for omgivelseskontrol

Det giver frihed selv at kunne skifte kanal på tv'et, på radioen eller skrue op og ned for lydstyrken. Det er muligt at hente apps til din iDevice på Internettet til at kontrollere ex. døre, lys, tv, hifi, vinduer, gardiner og aircondition.

Bemærk at iDevice kommunikerer via Bluetooth[®] (lyd) og for at kunne kommunikere med infrarød enheder (lys) som tv og hifi typisk anvender, skal der monteres en eller anden form for konverter mellem de 2 enheder.

iPortal kan kombineres med en Invacare løsning til omgivelseskontrol til kontrol af ex. tv, hifi og lys.



Bluetooth[®]

iPortal og iDevice kommunikerer trådløst via Bluetooth[®]. **iPortal** er forsynet med 2 stk. USB udgange, der gør det muligt at lade din iDevice samt yderligere en enhed.

Monteringen bestemmes af type af iDevice og efter brugerens ønsker og behov.



Sædeindstillinger

I SEATING-mode vises med blink og fremhævelse hvilken el-funktion, der ændres på.



Instrumentbord

I DRIVE-mode vises køreprofil, hastighed og kompasretning (når disse funktioner er understøttet af iDevice).



El-kørestolens styresystem

iPortal kan monteres på de fleste Invacare el-kørestole. **iPortal** kan monteres på el-kørestole med styresystemerne Dynamic Controls DX og DX2, der begge er modulopbyggede systemer, der er lette at arbejde med. Alternative styreformere og løsninger foretages let med standard komponenter fra det store program. DX2 har mange muligheder for individuel tilpasning af køre-, el- og sædefunktioner, samt tilslutning af tilbehør og ekstraudstyr. Hvad angår iDevice fungerer **iPortal** sammen med iPhone 3GS og nyere, iPod Touch 4 og nyere og med iPad.

Alternative styreformere



Mini og eksterne joystick

Der er mulighed for at kontrollere **iPortal** med forskellige former for eksterne joystick.



Hovedstyring

Der er mulighed for at kontrollere **iPortal** med hovedstyring.



Fodstyring

Der er mulighed for at kontrollere **iPortal** med fodstyring.

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark

Trusted Solutions,
Passionate People

