

# ISA™

## Invacare Stand Assist



Optimerad design för bekväma förflyttningar

Underbensstöd | Förlängningsbar lyftarm | Ergonomiska handtag



# En evolution inom uppresningslyftar

Vår nya, mångsidiga uppresningslyft, Invacare Stand Assist har designats för personer som kan belasta benen och behöver viss hjälp i samband med förflyttning. Nya Invacare Stand Assist erbjuder säkerhet, komfort och en bekväm förflyttning.

**ISA** är hjälpmedlet för den som till viss del är självständig men i behov av viss assistans.

Som vårdgivare är användarvänlighet viktigt, därför har nya **ISA** en **minskad, rundad bas** och **lägre produktvikt**. I bland kan vårdgivaren vara en familjemedlem och därför är användarvänlighet extra viktigt. Uppresningslyften kan dessutom demonteras utan verktyg för smidig transport.



## Designad för att erbjuda den bästa förflyttningen för brukare och vårdare

**ISA** har många valmöjligheter och tillbehör för att kunna anpassa lyftens ergonomi till brukarens kroppsform och mått.

### Design för brukare

- ▶ **Ergonomiska handtag:** för att passa handen och handledens naturliga form och position.
- ▶ **Förlängningsbar lyftarm:** olika längdinställningar för att passa olika kroppslängder.
- ▶ **Underbensstöd:** många höjdinställningar för att passa olika underbensmått.
- ▶ **Fotplatta:** olika modeller upp till fotstorlek upp till 48.

### Design för vårdare

- ▶ **Körhandtag:** form och dimension baserad på genomsnittsarmbågens höjd och skuldervidd för att garantera smidighet och enkelhet vid manövrering.

**NYA**

**EXKLUSIVA  
FUNKTIONER**

## Förlängningsbar lyftarm

- ▶ **TelescoLift** kan anpassas i nio olika steg för olika långa brukare och erbjuder därigenom **maximal flexibilitet**.

## Ergonomiska handtag

- ▶ Den unika designen är anpassad till handens naturliga form för ett **säkert grepp**.

## Underbensstöd

- ▶ Underbensstödet kan ställas in i sex olika höjder och erbjuder möjlighet till svängbar **ErgoSupport** för **optimal komfort**.

## Ytterligare funktioner

- ▶ **Fotplatta:** tre olika höjdställningar med borttagbart hälstopp, avrundad form för toalettbesök.
- ▶ **Körhandtag och fotpedal:** ergonomisk form för enklare hantering av lyften.
- ▶ **Krokar för lyftselen:** flexibla och säkra krokar för snabb och enkel applicering av selen.
- ▶ **Vadband:** polstrade som tillbehör för extra komfort. Enkla att byta och tvätta.
- ▶ **Rundade ben:** ergonomisk form för enkel manövrering runt stolar och toaletter.



## 3 nyckelfunktioner och fördelar



### ◀ Ergonomiska handtag För naturlig, bekväm och intuitiv positionering av händerna

- Speciell greppvänlig form som erbjuder handen en mer naturlig position.
- Anpassad vidd för den genomsnittliga axelbredden för minsta kraftansträngning.
- Mjukt material för bekvämt grepp under förflyttningen.



### ◀ Förlängningsbar lyftarm PATENT PENDING Anpassar lyften till brukarens längd, tillstånd och önskemål

- En flexibel lyft med nio längdinställningar för att passa olika användare.
- Lättåtkomlig spak med självlåsningsmekanik för ett snabbt och säkert lyft.
- Lägsta positionen gör lyften kompakt och möjliggör enkel förvaring.



### ◀ Underbensstöd PATENT PENDING Stödjer underbenen med maximal komfort

- Enkel enhandsjustering med sex positioner, inga verktyg behövs.
- Mjuka skumkuddar som enkelt kan bytas ut vid behov.
- Erbjuder även möjlighet till ErgoSupport, som följer den naturliga underbensrörelsen för optimal komfort.

# Introduktion av **ISA** familjen

## Ett mångsidigt utbud av uppresningslyftar för aktiva förflyttningar

ISA har fyra grundmodeller med olika brukarvikt, dimensioner och tillbehör, från enkla till mer avancerade lyftar för både hemsjukvård och vårdboenden.



### ISA<sup>COMPACT</sup>

Perfekt i miljöer med begränsat utrymme

Max belastning  
(max SWL) 140kg

Brukarlängd  
(rek. intervall) 140-180cm

### ISA<sup>STANDARD</sup>

Många valmöjligheter för hög flexibilitet

160kg

150-190cm

### ISA<sup>PLUS</sup>

Avancerade, tillförlitliga och säkra förflyttningar

180kg

140-190cm

### ISA<sup>XPLUS</sup>

Utvecklad för extra tunga brukare

200kg

140-200cm

Ett stort utbud av konfigurationer finns tillgängliga för att möta vårdarens och brukarens behov, så som mekanisk eller elektrisk brenspridning, fast eller svängande underbensstöd, olika höjder på fotplattan och olika elektronik.

### Tillbehör:

- ▶ Två olika uppresningsselar, en med och en utan benstöd
- ▶ Vadband för ökad stabilitet
- ▶ Skydd till lyftens ben
- ▶ Benspridningshandtag
- ▶ Elektronik: extra batteri, vägggladdare, mjukvara



## Tekniska data ▼

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex manualer finns på vår hemsida [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Alla mått är med 100 mm hjul, medelstor fotplatta och en användare som väger 80 kg.  
För 75 mm hjul (COMPACT), minska höjdmåtten med 15 mm. Alla mått har en tolerans på +/-3%.




SWL ▼



Längd ▼



Bredd ▼

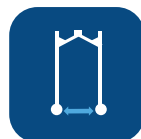

Invändig bredd  
stängda ben ▼



Invändig bredd  
öppna ben ▼



Svängradie ▼

	SWL ▼	Längd ▼	Bredd ▼	Invändig bredd stängda ben ▼	Invändig bredd öppna ben ▼	Svängradie ▼
<b>ISA<sup>COMPACT</sup></b>	140 kg	925 mm	535 mm	405 mm	735 mm	1060 mm
<b>ISA<sup>STANDARD</sup></b>	160 kg	1080 mm	635 mm	495 mm	960 mm	1260 mm
<b>ISA<sup>PLUS</sup></b>	180 kg	1220 mm	640 mm	480 mm	1020 mm	1400 mm
<b>ISA<sup>XPLUS</sup></b>	200 kg	1280 mm	640 mm	480 mm	1020 mm	1430 mm



Produktvikt  
▼



Maxhöjd (med  
lyftarmen i  
kortaste/längsta  
läget) ▼



Lyftintervall  
(med lyftarmen  
i kortaste/  
längsta läget) ▼



Frigång ▼



Benhöjd\* ▼



Lyfthastighet  
▼



Antal lyft per  
laddning)\*\* ▼

	Produktvikt ▼	Maxhöjd (med lyftarmen i kortaste/längsta läget) ▼	Lyftintervall (med lyftarmen i kortaste/ längsta läget) ▼	Frigång ▼	Benhöjd* ▼	Lyfthastighet ▼	Antal lyft per laddning)** ▼
<b>ISA<sup>COMPACT</sup></b>	43 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82
<b>ISA<sup>STANDARD</sup></b>	48 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82
<b>ISA<sup>PLUS</sup></b>	49 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82
<b>ISA<sup>XPLUS</sup></b>	52 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82

\* Med 5 mm skydd  
\*\* Vid batteriladdning mellan 100% to 50%

## Färg ▼



**Ljusgrå:**  
mast, bom och  
lyftarm  
RAL: 7035



**Anthracitgrå:**  
bas, ben och  
körhandtag  
RAL: 7016

Vänligen notera att färgerna kan variera  
något från de som visas ovan..

## Regulatoriska data ▼



**Kundservice: 08-761 70 90**  
Fax 08-761 81 08  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
Box 66 - 163 91 Spånga  
Sweden



**Yes, you can.®**

© 2019 Invacare International GmbH. Alla rättigheter är reserverade för Invacare. Invacare reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tryck. All information är korrekt vid tiden för tryckning. ISA - SE - 03/2019

