

rea | Azalea Base



COMPATIBILE
matrx
HEALTHCARE SOLUTIONS



La base da esterni personalizzabile per unità posturali

Utilizzando il telaio della carrozzina basculante *Rea Azalea*, è stata creata *Rea Azalea Base*: la base di sostegno da esterni capace di accogliere i sistemi di postura adeguati alla situazione evolutiva dell'utente. Rimangono presenti le caratteristiche funzionali della *Azalea*, ma con la possibilità di applicare unità posturali o gusci sia per il tronco che per il bacino, oltre a poter personalizzare la struttura con gli accessori ed optional previsti per una carrozzina posturale configurata.






Seduta adattabile

I tubi dello schienale sono volutamente tondi in maniera da permettere l'aggancio di svariati sistemi di postura per il tronco; lo schienale può reclinare fino a 30° tramite un sistema meccanico (madrevite) o pneumatico. La base del sedile è predisposta per il fissaggio di sedute modulari o di un sedile rigido.

Seduta regolabile

La seduta è regolabile in larghezza (attraverso i braccioli) e profondità. Gli agganci dei portapedane sono anch'essi regolabili in profondità ed in larghezza.

Caratteristiche e optional

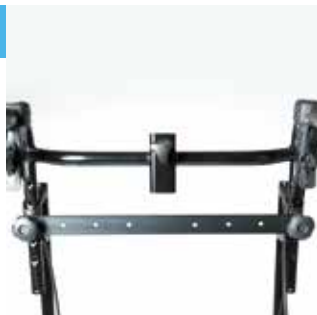

Barra per cintura a pettorina
Serve per fissare diversi tipi di cinture a bretellaggio (optional).



Base rigida inclinata di 5°
Può essere montata per aumentare il basculamento o per dare una pendenza negativa all seduta (optional).



Esempio di applicazioni possibili

Rea Azalea Base in combinazione con un sistema di postura tronco-bacino non Invacare.

Per gli altri accessori disponibili su *Rea Azalea Base*, consultare la brochure **"Opzioni / Accessori Rea"**.

Dati tecnici

Rea Azalea Base	340 / 390 / 440 / 490 mm (+ 50 / 100 mm ¹)	380 - 450 mm ² 430 - 500 mm	400 / 450 mm	600 mm ² / 700 mm	240 - 360 mm (se previsti)	330 - 500 mm (se previsti)	-1° - 23° ² 1° - 25° ¹	
Rea Azalea Base	-3° - +30°	L + 220 mm	900 - 1300 mm	950 - 1020 mm	20 kg	Max 135 kg	Peso di trasporto: 15 kg	
	1/ versione Transit (16") 2/ Misure per versione <i>Rea Azalea Base Minor</i> 3/ versione autospinta (22/24")							
Rea Azalea Base	Crash-tested ISO 7176-19							
<i>Rea Azalea Base</i> risponde alla ISO 1776-19. Attenzione alle limitazioni che si applicano agli accessori. Per ulteriori informazioni sulla destinazione d'uso, le regolazioni ed il trasporto, fare riferimento al manuale d'uso del prodotto. Sul sito internet www.invacare.it sono disponibili altre informazioni propedeutiche alla scelta dell'ausilio.								

Colore telaio



Codici NT (configurazione standard):
18.09.39.006 + 18.09.39.103 + /.133 + codici ISO aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: 87834/R

CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITÀ FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.
PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

