



reddot award 2014  
winner

Invacare® | **Colibri®**

Colorato, sicuro e facile da guidare



Il nuovo *Invacare Colibri* è uno scooter compatto, veloce, colorato. Smontabile e dal design accattivante è pensato per coloro che ricercano indipendenza e stile.

Grazie all'innovativo sistema *Invacare LiteLock™*, lo scooter può essere facilmente smontato senza l'uso di attrezzi e riposto nel bagagliaio di qualsiasi auto. Le sue dimensioni ridotte garantiscono grande manovrabilità in spazi ristretti. Ecco perché *Invacare Colibri* è perfetto in tutte le situazioni!

Con un set di 5 colori intercambiabili potrai personalizzare il look del tuo scooter in qualsiasi momento.

## Sistema LiteLock - grande facilità di smontaggio e montaggio

Il sistema *LiteLock™*, unico nel suo genere, si aziona automaticamente una volta che le batterie sono state rimosse, permettendo così di scomporre lo scooter in due parti senza l'utilizzo di attrezzi. La parte frontale può essere facilmente piegata e caricata nel bagagliaio dell'auto assieme alle altre parti. Il successivo riassetto dello scooter sarà altrettanto semplice e sicuro.

## Carenature colorate intercambiabili - resistenti e facili da cambiare

*Invacare Colibri* è uno scooter dal design accattivante grazie alle carenature colorate intercambiabili. Le carenature rimangono sempre al loro posto grazie al sistema di aggancio "Clip-on" e possono essere facilmente sostituite con altre di altri colori ogni volta che vuoi.

## Caratteristiche e Optional



### Facilmente smontabile

Meno di un minuto è tutto ciò che serve per smontare e caricare in auto *Invacare Colibri*.



### Ruote più grandi e batteria più potente (optional)

Potrete percorrere distanze maggiori anche su strade accidentate e ricaricare le batterie direttamente dallo scooter o a parte.



### Comfort ai massimi livelli

La seduta imbottita e morbida offre grande comfort di guida. Su richiesta è possibile ordinare anche il sedile ammortizzato.


## Dati tecnici

Consultate il nostro sito per avere maggiori informazioni e usate il nostro configuratore per conoscere nel dettaglio il vostro scooter.

	Larghezza schienale	Profondità seduta	Altezza seduta da terra	Altezza schienale	Ingombro laterale	Altezza max ostacoli superabili	Pendenza max di sicurezza	Capacità motore
<i>Invacare Colibri</i>	465 mm	400 mm	370 - 420 mm	385 mm	505 mm	40 mm <sup>2</sup> / 45 mm <sup>3</sup>	6° / 10.5%	200 W
	Autonomia	Velocità max	Lunghezza totale	Peso da vuoto	Peso max utilizzatore	Capacità batteria	Diametro di sterzata	
<i>Invacare Colibri</i>	Up to 16 km	8 km/h	1010 mm	44 kg <sup>1</sup> (12 Ah) 49 kg <sup>1</sup> (18 Ah)	136 kg	2 x 12 Ah 2 x 18 Ah	2200 mm	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peso dell'elemento più pesante: 15,6 kg</li> <li>2. con ruote piccole (200 x 50 mm)</li> <li>3. con ruote grandi (210 x 65 mm)</li> </ol>

## Colori carenatura

Blu Zaffiro    Rosso Rubino    Verde Giada    Bianco Marmo    Diamond Silver

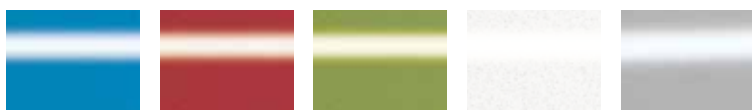

Tel.: +39 0445 380059  
Fax: +39 0445 380034  
www.invacare.it  
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.  
Via dei Pini, 62 - 36016  
THIENE (VI) - Italy

Nr. Repertorio DM: 1760463/R

**LiteLock™ system**  
(patent pending)

