

Küschall® K-SERIES



UNLIMIT YOUR WORLD

Siamo convinti che tu possa conquistare qualsiasi obiettivo se hai la giusta determinazione per raggiungerlo. Küschall K-Series è l'alleata perfetta perchè ti garantisce massima versatilità e performance di guida eccellenti. **Entra in un nuovo mondo!**

KÜSCHALL K-SERIES

Questa carrozzina è l'essenza e il manifesto del brand Küschall perchè racchiude in sé tutta la nostra esperienza in questo campo. Grazie all'esclusivo modulo seduta - che permette una **regolazione indipendente dal telaio** - Küschall K-Series sa adattarsi perfettamente a te e al tuo stile di vita. Inutile cercare imitazioni: non troverai nulla di simile.

HYDROFORMING

Il design di Küschall K-Series raggiunge un nuovo livello grazie alla tecnica dell'hydroforming perchè sottolinea le linee tese e di carattere di questa icona senza tempo. Questa tecnologia, inoltre, esalta la rigidità della carrozzina e consente una performance di guida senza precedenti.

TELAIO IDROFORMATO

- Disponibile con angolazione 90° o 75°, garantisce maggiore ergonomia e massima aderenza in fase di trasferimento.

FRENO LIGHT ACTIVE

- Disegnato seguendo le linee tese e minimal del nuovo telaio, il freno Light Active guadagna un terzo di leggerezza in più rispetto gli altri modelli di freni.

TELAIO ADDOTTO

- Il design del telaio addotto accompagna con eleganza le linee del tuo corpo.

POGGIAPIEDI

- Completamente ridisegnato, garantisce comfort e posizionamento grazie alla nuova superficie piatta.



Küschall® K-SERIES

NUOVA BARRA TENSORE

- Impugnatura ergonomica, un aspetto cruciale nella fase di carico e scarico della carrozzina. Barra tensore montata bassa, ideale per gli schienali Matrix.

SCHIENALE

- Schienale abbattibile e regolabile in sei diverse angolazioni per rispondere alle diverse esigenze dell'utente.

MODULO SEDUTA

- E' il marchio di fabbrica di K-Series. Consente cinque diverse posizioni del centro di gravità rendendo così la carrozzina ancora più dinamica.

SUPPORTO FORCELLE

- Il nuovo profilo interamente in alluminio e saldato al tubo telaio, sottolinea il design coerente e contemporaneo di tutta la carrozzina.

FORCELLA

- Grazie al nuovo design più pulito e ai cuscinetti integrati, lo sporco trattenuto dalla ruota viene notevolmente ridotto e la manutenzione diventa più semplice.

ASPETTI CHIAVE PERSONALIZZAZIONE

ICONICO

Küschall K-Series è la carrozzina modulare che siamo certi saprà rispondere perfettamente ad ogni tua esigenza. Grazie all'iconico modulo seduta - che permette una regolazione indipendente dal telaio - K-series sa adattarsi perfettamente a te e al tuo stile di vita.




MODULARE

Inutile cercare imitazioni: non troverai nulla di simile! Il modulo seduta - totalmente indipendente dal telaio - ti permette di regolare la seduta della tua carrozzina ovunque tu voglia e in qualsiasi momento!

DINAMICA

Il telaio mantiene inalterata la geometria di contatto con la superficie senza la necessità di doverlo regolare.

Le ruote rimangono sempre in posizione rispetto al telaio. Una costruzione veramente rigida che garantisce un'esaltante performance di guida.

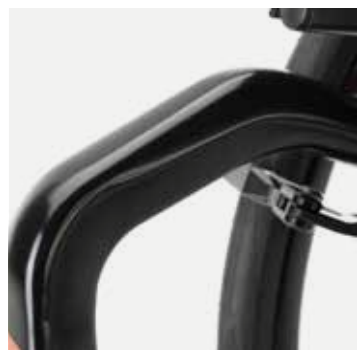

TELAIO ANTERIORE IDROFORMATO

Grazie a questa tecnica è possibile modellare i metalli rendendoli estremamente leggeri e, al contempo, strutturalmente rigidi e resistenti. Il profilo contemporaneo dei nuovi tubi idroformati di Küschall K-Series esalta la rigidità di questa carrozzina e ne aumenta la compattezza.

1 SCEGLI IL COLORE DEL TELAIO



Bianco



Grigio



Nero



Blu



Rosso

2 SCEGLI IL DESIGN DEL DECAL



3 SCEGLI IL COLORE DEL DECAL



Nero



Rosso



Grigio chiaro



Oro



Rosso



Blu



Grigio scuro

DATI TECNICI

LARGHEZZA SEDUTA

320 – 500 mm
a passi di 20 mm



PROFONDITA' SEDUTA

350 – 525 mm
a passi di 25 mm



LUNGHEZZA GAMBE

290 – 480 mm
a passi di 10 mm



ALTEZZA SCHIENALE

270 – 480 mm
in increments of 15 mm



ANGOLO SCHIENALE

74° / 78° / 82° /
86° / 90° / 94°



ALTEZZA SEDUTA

anteriore: 450 – 520 mm
posteriore: 390 – 490 mm
a passi di 10 mm



ANGOLAZIONE TELAIO

75° / 90°
diritto o addotto



LARGHEZZA TOTALE

L + 170 mm



LUNGHEZZA TOTALE

75°: circa 830 – 1055 mm
90°: circa 760 – 985 mm



CENTRO DI GRAVITA'

80 mm / 95 mm / 110 mm /
125 mm / 140 mm



CAMPANATURA

0° / 3° / 6°



PESO TOTALE SENZA ACCESSORI

circa 7.8 kg



PESO TOTALE SENZA RUOTE

circa 5.1 kg



PESO MASSIMO UTENTE

130 kg



CRASH TEST

Superato - soddisfa i requisiti
ISO 7176-19



Tutte le misure e i pesi indicati si riferiscono ad una seduta di larghezza e profondità pari a 400mm e alla configurazione più leggera e compatta possibile. Questi dati possono variare al variare della configurazione.



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Tel: +41 61 487 70 70
info@kuschall.com
www.kuschall.com

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland

Kuschall, Kuschall Unlimit your world, K, Unlimit your world and K-Series are trademarks of Invacare International GmbH. Every effort has been made to ensure that the contents of this publication are fully up-to-date at the time of going to print. As part of its ongoing improvement of products, Invacare International GmbH reserves the right to modify existing models at any time. © July 2019, Invacare International GmbH. All rights reserved. EU - 1659368