


Propad Revolve Si




Comfort a portata di mano!

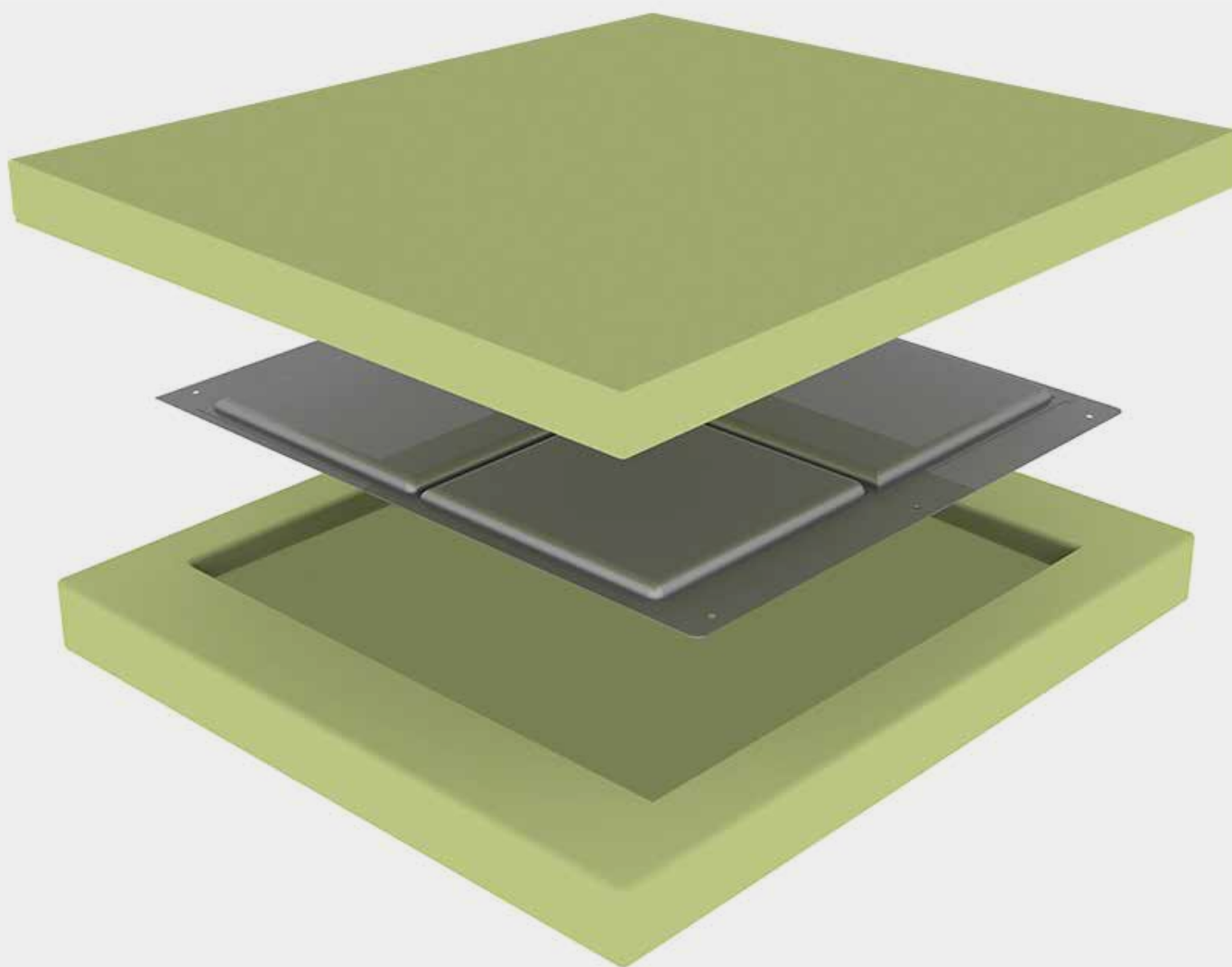

Frutto dell'esperienza nella produzione di cuscini e materassi antidecubito di alta gamma, il cuscino **Propad Revolve** rappresenta la soluzione ideale per chi è alla ricerca di:

- protezione dal rischio di decubito
- alta qualità dei materiali
- semplicità d'uso

Il cuscino **Propad Revolve Si** combina due strati di schiuma sagomata di alta qualità e una sacca di gel fluido che non cambia le sue caratteristiche al variare della temperatura.

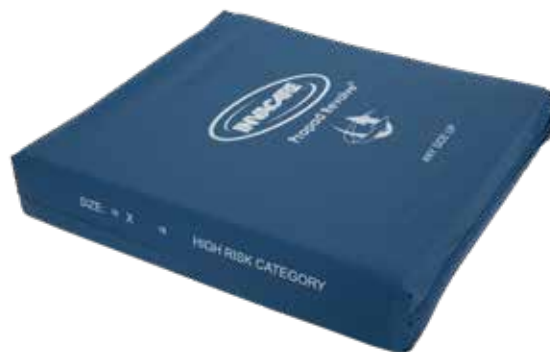

Multidirezionale - posizionamento senza pensieri!

Per evitare un utilizzo scorretto, il cuscino è stato progettato per essere impiegato in qualsiasi direzione e verso. Capita infatti di vedere cuscini sagomati posizionati in modo improprio. Il cuscino **Revolve** annulla il rischio di una riduzione dell'efficacia clinica perchè mantiene le sue caratteristiche antidecubito in qualsiasi verso e direzione.

Qualità dei materiali

Il cuscino **Revolve** è prodotto con schiuma ad alta resilienza, per garantire un'ottima resa in termini di elasticità e durata. Il caratteristico colore verde chiaro della schiuma indica che è stata sottoposta al trattamento chimico anti-batterico **Ultra-fresh** che limita la proliferazione di batteri e cattivi odori, prolungando la durata del prodotto e la sensazione di freschezza. La schiuma ha una densità di 70 kg/m² per evitare l'effetto bottoming -out (di toccare il fondo).

Benefici della sacca in fluido

La particolarità di questo modello è la sacca in fluido incapsulata all'interno della schiuma.

La sacca garantisce una sensazione di freschezza e allo stesso tempo un maggiore effetto di immersione e avvolgenza, principi base per un'ottimale distribuzione della pressione.

La sacca inoltre è suddivisa in 4 compartimenti, in modo da garantire che la quantità di fluido rimanga sempre la stessa indipendentemente dalla posizione di utilizzo, per una protezione antidecubito maggiore.



Dati tecnici

Per maggiori informazioni si rimanda al sito di Invacare

	Dimensioni	Altezza	Peso totale	Peso massimo paziente	Temperatura max di lavaggio
Propad Revolve Si	 410 x 410 mm 430 x 430 mm 460 x 410 mm	 75mm	 2.5kg	 125 kg	 80°

Codice CND:
Y033303

Nr. Repertorio DM:
1784172/R

Tel.: +39 0445 380059
 Fax: +39 0445 380034
www.invacare.it
 e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
 Via dei Pini, 62 - 36016
 THIENE (VI) - Italy

