


InvaSoft™ Hybrid

geavanceerde hybride technologie

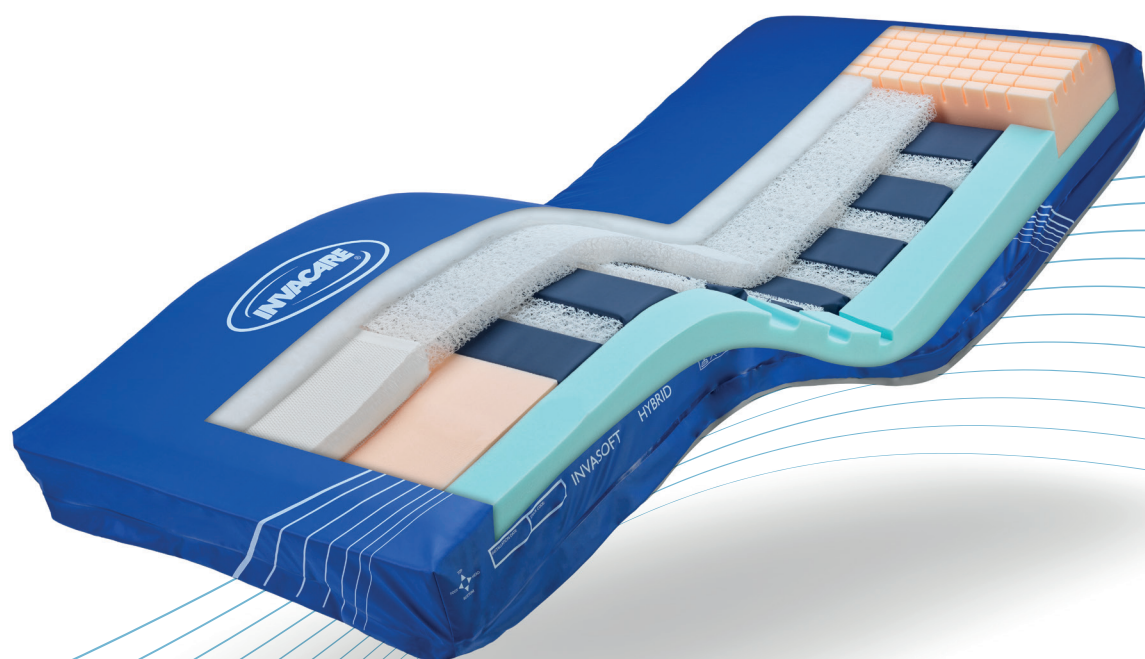

Pomploos Hybride Ligsysteem

Reguleert druk, schuifkrachten en microklimaat



Yes, you can.®

Revolutionair Pomploos Hybride Ligsysteem

Het nieuwe InvaSoft Hybrid ligsysteem biedt geavanceerde hybride technologie om de belangrijkste externe oorzaken van decubitus beter te reguleren.

InvaSoft™ Hybrid maakt gebruik van een innovatieve combinatie van materialen en technologieën voor een betere drukverdeling, vermindering van schuif- en wrijfkraften en zorgt voor een zeer effectief microclimaat beheer.

Door ons toegewijd onderzoek- en ontwerp programma inclusief samenwerking met experts op het gebied van decubitus, is InvaSoft Hybrid

ontworpen als een eenvoudige, effectieve en efficiënte oplossing om de vele uitdagingen aan te kunnen binnen de gezondheidszorg.

Onafhankelijke testresultaten bevestigen ook dat InvaSoft™ Hybrid uitermate effectief is bij het aanpakken van de belangrijkste externe factoren voor ontwikkeling van decubitus.



Matrashoes




> **Duurzaam en zeer ademend**
geschikt voor medische toepassingen.



> **Multistretch materiaal**
vermindert schuif- en wrijfkraften.


1

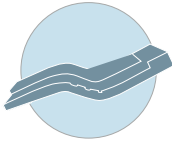

Drukverdeling

Onze **innovatieve auto-adjust technology** zorgt voor drukverdeling in iedere houding van de cliënt zonder gebruik te maken van een elektrische unit.

2

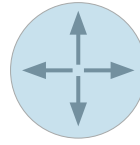

Schuif- en Wrijfkracht Reductie

InvaSoft™ Hybrid maakt gebruik van **innovatieve materialen** om schuif- en wrijfkrachten te reduceren.

5°

> **Aflopende hielzone voorzien van een beschermende schuifkracht reducerende laag** neemt de druk weg van het kwetsbare hielgebied.



> **Zachte, reactieve toplaag** omhult de cliënt met een maximum aan comfort en ondersteuning.



> **Acht horizontale luchtcellen** voor individuele, reactieve drukverdeling.



> **Vermindering van warmte en vocht** door speciaal vormgegeven uitsparingen.

3



Microclimate Management


Gebruikmakend van **non-powered airflow technology** (N.P.A.T.) zorgt InvaSoft Hybrid voor een continu microklimaat management.



- > **Exceptionele luchtcirculatie** door gebruikmaking van open en ondersteunend noodle materiaal.



- > **Geprofileerd foam** voor extra comfort en drukverdeling.

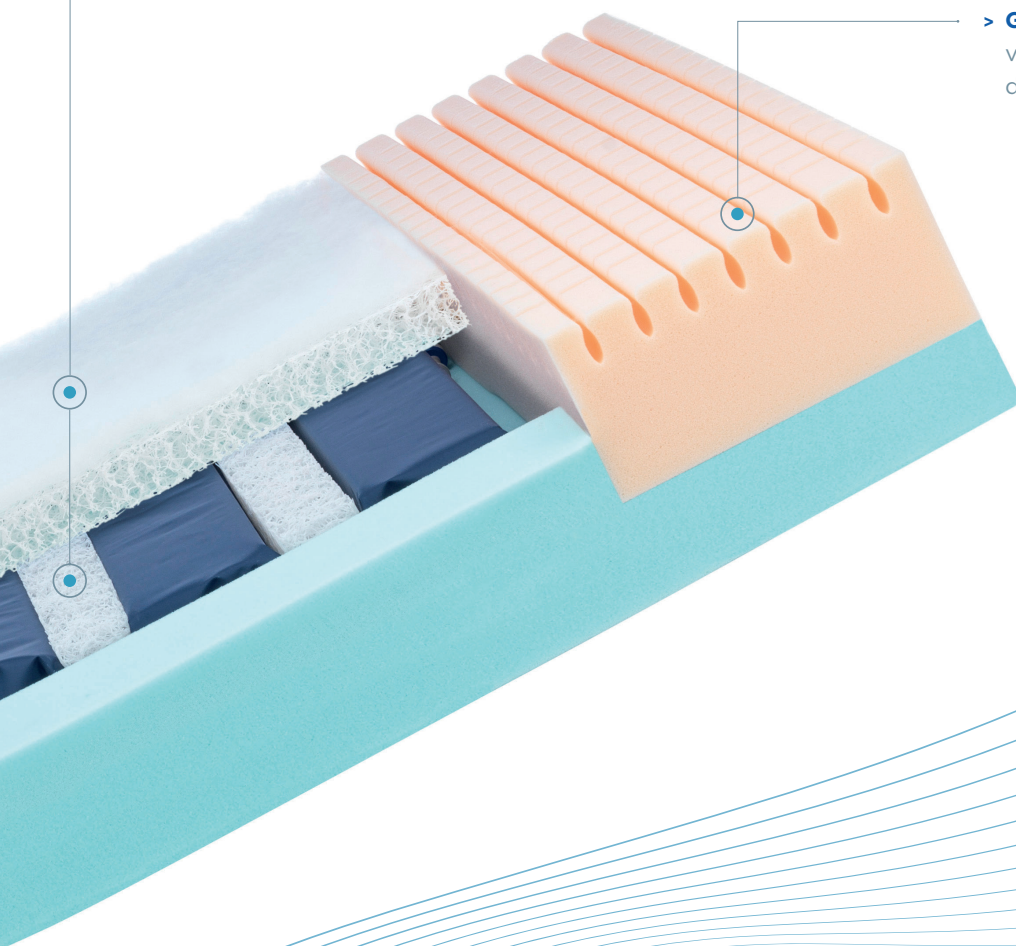

Clïent Comfort



- > **Ultra-zachte en ondersteunende lagen** bieden extra comfort en stabiliteit.



- > **230 kg veilige belastbaarheid** voor een hoge mate van ondersteuning.

Eenvoudig Effectief Efficiënt

De kostenefficiëntie en klinische voordelen van hybride ligsystemen worden in toenemende mate erkend. Het modulaire ontwerp van InvaSoft Hybrid maakt dat alle onderdelen individueel kunnen worden vervangen. Dit zorgt voor een maximale levensduur, kostenbesparing en een lagere belasting van het milieu.



Eenvoudig

Eenvoudig in gebruik, geen gecompliceerde instellingen vereist.

Eenvoudig te reinigen, garandeert een snelle omwisseling tussen cliënten

Eenvoudig te onderhouden, belangrijkste onderdelen zijn eenvoudig vervangbaar zonder gebruik van speciale gereedschappen of specialistische kennis.



Effectief

Effectieve en onafhankelijk bewezen **drukverdeling**.

Effectieve en onafhankelijk bewezen reductie van **schuif- en wrijfkraften**.

Effectief en onafhankelijk bewezen **microklimaat management**.



Efficiënt



Geen preventief onderhoud nodig.

Non-powered, levert daarmee een bijdrage aan een milieuvriendelijk systeem met een positieve CO2-footprint.

Modulair design betekent dat onderdelen individueel vervangen kunnen worden.

Kosten efficiënt
Klinische voordelen
Eenvoudige oplossing



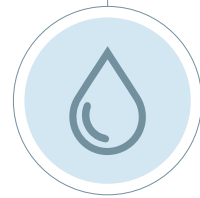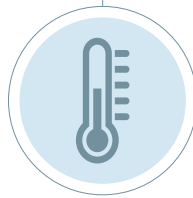


Onafhankelijk Getest

InvaSoft Hybrid is intensief getest bij Berlin Cert, een deskundig en onafhankelijk testinstituut met specifieke kennis op het gebied van ligsystemen. In deze testen werd InvaSoft Hybrid vergeleken met drie toonaangevende hybride ligsystemen in de markt op het gebied van drukverdeling, reductie van schuifkrachten en regulering van het microklimaat.


Klinische Uitmuntendheid

InvaSoft™ Hybrid liet onder andere resultaten zien op het gebied van temperatuur- en vochtmanagement - en overtrof hierin alle concurrerende hybride ligsystemen.

PIEK TEMPERatuur

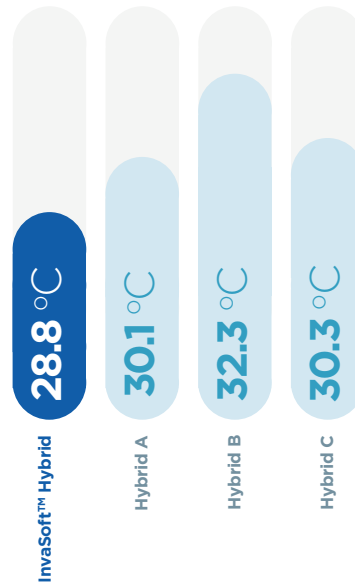

PIEK VOCHTIGHEID

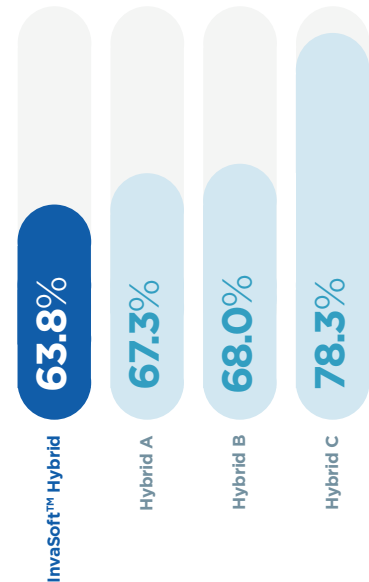

*Vergelijkende testen met drie toonaangevende hybride ligsystemen.


Technische gegevens ▼

Voor meer gegevens omtrent dit product, inclusief de gebruiksaanwijzing, raadpleeg onze website: www.invacare.nl



Breedte ▼

830-850-880 mm

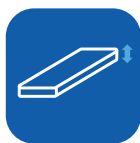

Hoogte ▼

170 mm



Lengte ▼

1970-2000-2100 mm



Gewicht ▼

18 kg



Gebruikersgewicht ▼

230 kg



Reinigings-temperatuur ▼

95 °C

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland



Yes, you can.®