


# Comet<sup>®</sup> Pro

Sienta la Libertad

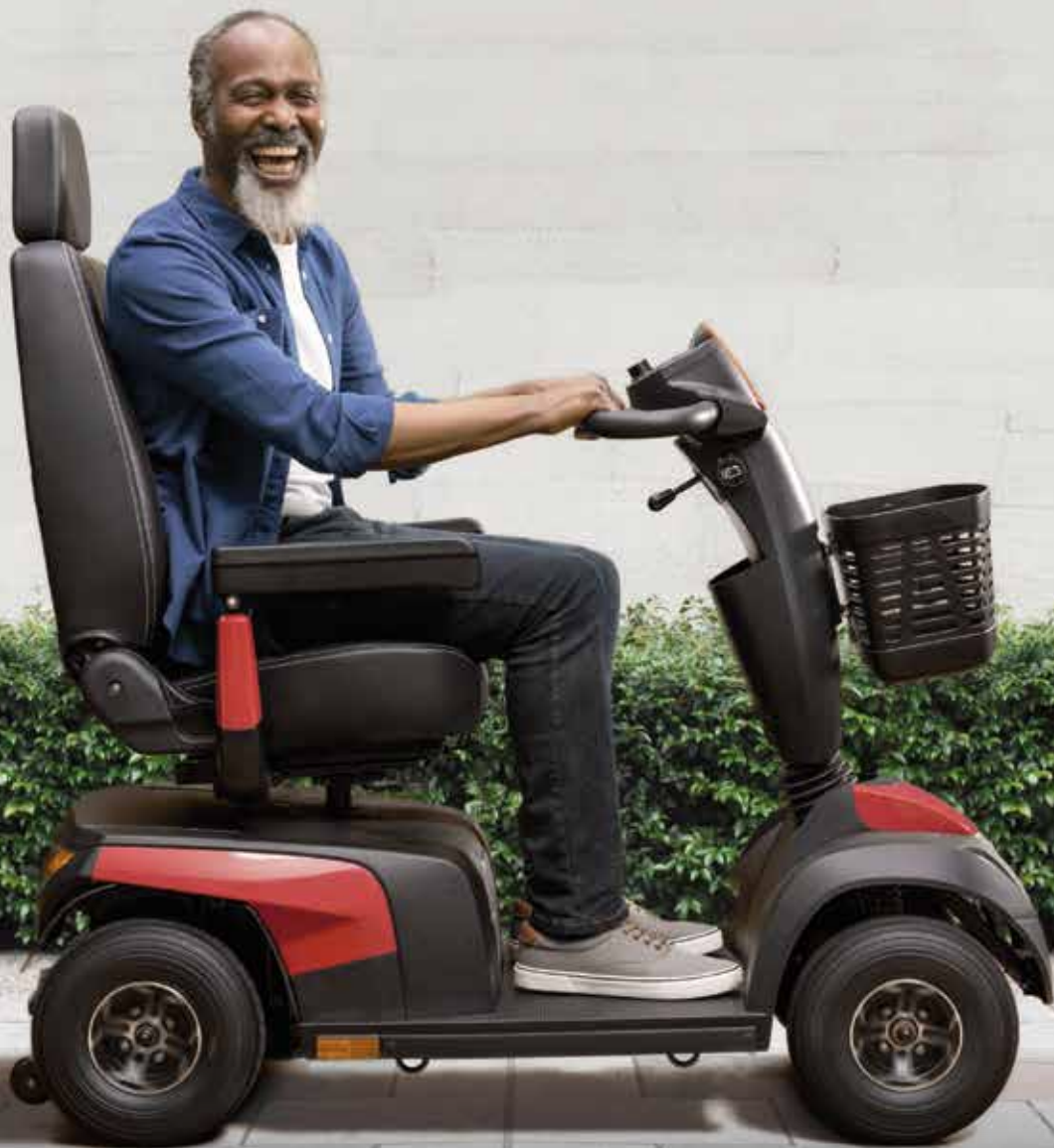

Un scooter premium

que ofrece un excelente rendimiento



Yes, you can.

# Sienta la diferencia

Nuestros scooters han sido diseñados por expertos de la salud para garantizar unos niveles inigualables de calidad, seguridad y confort.

Gracias a la investigación exclusiva y la amplia experiencia en el diseño de productos para la movilidad, en Invacare nos enorgullecemos especialmente de los scooters porque mejoran la calidad de vida de los usuarios. Poder recuperar la seguridad, la confianza y la independencia es muy importante.

Cada detalle de nuestros scooters se ha tenido en cuenta y se ha refinado para que moverse sea más cómodo y sencillo, desde el manillar ergonómico hasta los asientos acolchados adaptables y los asientos ajustables en altura.

## Calidad



Líder en el mercado en el montaje de calidad con especial atención en los detalles.

## Seguridad



Cumple con los últimos Estándares Europeos de Dispositivos Médicos.

## Confort



Diseño que se ajusta y adapta para ofrecer mayor confort



# Sienta el control con el scooter Comet® Pro

El Comet® Pro es nuestro scooter más avanzado. Diseñado con los mejores componentes y opciones que le llevará donde quiera con seguridad, comodidad y estilo. Su diseño busca ofrecer un elevado rendimiento y control sin comprometer la seguridad.

Las excepcionales prestaciones del Comet® Pro y su diseño moderno lo convierten en un scooter premium que ofrece rendimiento y control. Su potente motor y sus baterías 2 x 12V /75 Ah, permiten a los usuarios disfrutar de paseos más allá de la ciudad.

También tiene grandes ruedas delanteras y traseras, combinadas con un sistema premium de suspensión que permite superar de forma segura y cómoda bordillos y obstáculos





## Rendimiento mejorado

- Dirección intuitiva que permite mantener fácilmente la línea recta incluso con altas velocidades.
- Suspensión avanzada que garantiza una conducción suave y cómoda en terrenos irregulares.
- Manillar ergómico que permite mayor control.
- Diseñado para rendir en cualquier terreno.
- Protectores anti-salpicaduras.



## Seguridad sobre todo

- Limitador de velocidad automático: Reduce la velocidad en las curvas para mayor control y seguridad.
- Palanca de desembrague en 2 tiempos que impide que el motor quede desembragado de forma involuntaria.
- Luces de freno e intermitentes
- Kit de luces para mayor visibilidad



### Limitador de velocidad automático

reduce la velocidad en las curvas para mayor control y seguridad.





## Diseñado pensando en el confort

- Acolchado del asiento de alta calidad
- Asiento ajustable en altura
- Columna de conducción ajustable en altura
- Los reposabrazos abatibles y el asiento giratorio facilitan subir y bajar del scooter



## Manillar ajustable

para un control sensible y mayor comodidad



Suspensión mejorada



Columna de asiento reforzada



Reposabrazos ajustable en alto y ancho



## Personalice su scooter

Adapte el Invacare Comet® Pro a sus gustos y necesidades. Explore las opciones disponibles.

## Personalice su scooter

Tenemos una amplia gama de accesorios disponibles para que el scooter Comet® Pro puede personalizarse. Contacte con su distribuidor y descubra todas la opciones.



Cesta trasera



Retrovisores



Parachoques delantero y trasero



Soporte para móvil



Soporte para bastones/muletas



Cinturón de seguridad



Portavasos plegable

## Datos técnicos

Para más información sobre el producto, incluido manuales de usuario, por favor visite nuestra web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)



Ancho de respaldo ▼

510 mm



Profundidad de asiento ▼

Deluxe: 470 mm  
Premium: 460 mm



Altura asiento - suelo ▼

Min. 440 mm  
Max. 510 mm



Altura de respaldo ▼

Deluxe: 490 mm



Ancho total ▼

665 - 685 mm



Largo total ▼

1450 mm



Peso ▼

136 kg



La parte más pesada ▼

63 kg



Peso máximo de usuario ▼

160 kg



Capacidad de las baterías ▼

2 x 12 V/75 Ah (C20)  
AGM



Radio de giro ▼

2750 mm



Capacidad para superar obstáculos ▼

100 mm



Distancia al suelo ▼

100 mm



Pendiente máxima ▼

10 °



Potencia motor ▼

550 W / 1600 W<sup>1</sup>



Distancia máxima de conducción ▼

55 km



Velocidad máxima ▼

15 km/h

<sup>1</sup> Máximo rendimiento

## Colores\*



Azul



Plata



Rojo

## Tapicería



Negro

\*Los colores de los scooters pueden variar ligeramente. Por favor, verifique con su distribuidor

Tel. (34) 972 493 214  
E-Mail: [contactsp@invacare.com](mailto:contactsp@invacare.com)  
[www.invacare.es](http://www.invacare.es)

Invacare S.A.  
Avenida del Oeste nº50, 11ª  
Valencia - CP: 46001  
España



Yes, you can.®

© 2023 Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. Toda la información facilitada se supone correcta en el momento de la impresión. Invacare se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. Comet Pro - ES 06/2023