

SoftCloud™

Dynamiske vekseltrykkmadrasser



ALLSIDIG | INTUITIVT DESIGN | KOMFORT



Yes, you can.®

Invacare SoftCloud-serien

Vekseltrykk-teknologi anbefales for å oppnå forebygging og håndtering av trykksår døgnet rundt, kombinert med individuell overvåkning, reposisjonering og sårpleieprogram.

Helsepersonell møter ofte situasjoner hvor pasienten ikke selv er i stand til reposisjonering. Under disse omstendighetene anbefaler EPUAP å bruke et aktivt støtteprogram som en del av trykksårforebyggingen.

Invacare SoftCloud madrasser og overmadrasser består av aktive støtteflater av høy kvalitet, designet for pasienter med svært høy risiko for å utvikle trykksår. Det vekslende trykket er designet for å omfordele trykk flere ganger hver time, selv om pasienten ikke beveger seg.



"Bruk en aktiv støtteoverflate (overmadrass eller madrass) for personer med høy risiko for trykksår når hyppig manuell reposisjonering ikke er mulig" (EPUAP,2014)

TRE

EGENSKAPER

1

Intuitivt design

- En moderne og intuitiv kontrollenhet

2

Automatisk justering

- Sørger for klinisk riktig støtte for å sikre pasientens komfort

3

Maksimal fast-knapp

- Gir en fast overflate for enklere sengetøyskift og reposisjonering av pasient.



► Håndtak

For enkel madrasshåndtering og transport.

► Sikkerhetsremmer

Tillater sengen å være løst festet til madrassen samtidig som tilgangen til HLR-sikringen er fri.

► Trekk med glidelås

360-graders glidelås på toppen av trekket forenkler fullstendig fjerning av trekket ved vask.

► Hengslet rygg

Madrassen er konstruert for å hindre at luftcellene glir ned når hjertebrettet heves, og for å motvirke friksjon (gjelder kun SoftCloud Pro).

► Permanent avlastning av hælen

De fem hælcellene på SoftCloud Pro tillater permanent avlastning av pasientens hæl. Denne funksjonen er ideell for de fleste pasienter med eksisterende hælår.

► Kabelstyringssystem

Ingen etterfølgende strømkabler.

► CPR-stropp

Dersom det oppstår en situasjon hvor det er behov for HLR, skal man dra i den gule stroppen merket CPR. Madrassen tømmes da umiddelbart for luft i bryst- og hodedelen.

► Transportmodus

En transportklemme kan festes på slangen under transport, for å sikre at luften holder seg i madrassen når den er frakoblet pumpen.



SoftCloud-serien

Serien består av tre alternativer, som alle er enkle i bruk:

Delkontrakt 4

På anbud
med NAV



SoftCloud Top

- ▶ Overmadrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 12 minutter
- ▶ 1 av 2 Syklus
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

SoftCloud Ace

- ▶ Fullhøyde-madrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 10 minutter
- ▶ 1 av 3 Syklus
- ▶ Dampgjennomtrengelig trekk med sveisede sømmer
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

SoftCloud Pro

- ▶ Fullhøyde-madrass
- ▶ Består av luftceller som skånsomt veksler for å jevne ut uønsket trykk
- ▶ Syklus på 10 minutter
- ▶ 1 av 3 Syklus
- ▶ Permanent oppblåste luftvegger gir fast sidestøtte med en stabil forflytningsplattform
- ▶ Egen hældel for sensitive hæler
- ▶ 3 statiske celler i hodeenden

Intuitive kontrollenheter

Kontrollenhetene til SoftCloud har et intuitivt display som kan brukes til å justere komfortnivåer ved å gi enten en 1 av 2 eller 1 av 3 vekslende trykkmodus sammen med et statisk alternativ.

Videre tillater en automatisk detekteringsfunksjon i kontrollenheten å automatisk registrere trykk fra kroppen, og justerer trykknivået deretter. Kontrollenhetene har både visuelle alarmer og lydalarmer som aktiveres ved lavt trykk eller strømbrudd. Det er også mulig å skru av alarmene ved rengjøring.



1

SoftCloud Top

2

SoftCloud Ace
SoftCloud Pro



Tekniske data ▼

For mer informasjon om produktet samt produktets brukermanual, se www.invacare.no



Bredde ▼



Lengde ▼



Høyde ▼



Maks.
brukervekt ▼

SoftCloud Top

På anbud
med NAV

83-88 cm

200 cm

13 cm

200 kg

SoftCloud Ace

83-88 /103-116 cm

200 cm

20 cm

220 kg/ 350 kg

SoftCloud Pro

83-88 cm

200 cm

20 cm

220 kg



Dybde ▼



Bredde ▼



Høyde ▼

Kontrollenhet 1

12 cm

25 cm

24 cm

Kontrollenhet 2

12 cm

29 cm

25 cm

Farge ▼



Mørk blå

Fargen kan variere litt fra
fargen vist ovenfor.

Regulatoriske data ▼

Madrasen er produsert i henhold til:

European Standard: BS EN 597-1 Cig
European Standard: BS EN 597-2 Match
BS7177:1996 Crib 5.

Kontrollenhet

Lydnivå: ≤ 30 dB

Annen informasjon ▼


Denne madrassen vil bidra positivt i en komplett
pleieplan for trykksårforebyggende omsorg.

Tekniske data ▼

Art.nr ▼	HMS-nr ▼	Beskrivelse ▼	Madrassmål ▼	Materiale ▼
På anbud med NAV 1630814	278302	Softcloud Top, overmadrass inkl.pumpe	83x200x13 cm	Polyuretanbelagt inkotrekk
1630815	278303	Softcloud Top, overmadrass inkl.pumpe	88x200x13 cm	Polyuretanbelagt inkotrekk
SP1630834	278305	Pumpe SoftCloud Top overmadrass		
SP1631166	278304	Bag SoftCloud Top overmadrass		
1630822		Softcloud Pro, madrass inkl.pumpe	83x200x20 cm	Polyuretanbelagt inkotrekk
1630823		Softcloud Pro, madrass inkl.pumpe	88x200x20 cm	Polyuretanbelagt inkotrekk
1630818		Softcloud Ace, madrass inkl.pumpe	83x200x20 cm	Polyuretanbelagt inkotrekk
1630819		Softcloud Ace, madrass inkl.pumpe	88x200x20 cm	Polyuretanbelagt inkotrekk
1630820		Softcloud Ace, madrass inkl.pumpe	103x200x20 cm	Polyuretanbelagt inkotrekk
1630821		Softcloud Ace, madrass inkl.pumpe	116x200x20 cm	Polyuretanbelagt inkotrekk

Maxxcare Pro Evolution hælvavlaster tilgjengelig som tilbehør

På anbud med NAV

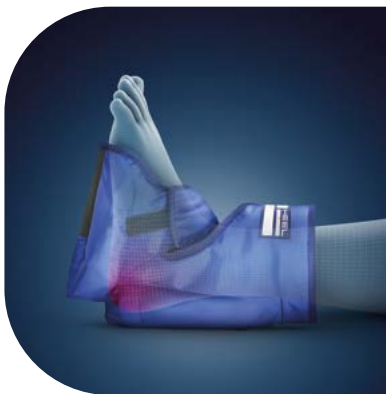

Maxxcare Pro Evolution hælvavlaster er nå tilgjengelig som tilbehør hos NAV. 100 % avlastning. Enkelt og effektivt.

Les mer om Maxxcare

Maxxcare®

Artikkelnummer ▼	HMS-numbers ▼	Størrelse ▼	Materiale ▼
060004	301470	S	Luftceller (Vicair SmartCells)
1578539	202746	Standard (M-L)	Luftceller (Vicair SmartCells)
060003	269681	XL	Luftceller (Vicair SmartCells)

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®