

Birdie[®] EVO



Komfort for både bruger og personale

En stærk og sikker personløfter, der klarer hverdagens forflytninger med optimal hensyntagen til bruger og personale



Yes, you can.[®]

Sikre og gode forflytninger

Birdie^{EVO} yder med sit nye design og forbedrede egenskaber maksimal komfort. Bruger og personale vil opleve at forflytningen er under fuld kontrol og plejeren opnår en god og tryk kontakt til brugeren under forflytningen.

Den ergonomiske personløfter

Birdie^{EVO} tilbyder med sit ergonomiske design en let manøvrering under forflytningen og løfteågets buede udformning giver god plads til brugerens hoved og skuldre.


Mere plads til brugeren

Løftearmens udformning, og den ekstra plads, der er skabt foran brugeren, forhindrer, at der sker stød og skader på knæ og skinneben.



Let håndtering og opbevaring

Birdie^{EVO} kan let foldes sammen og eventuelt placeres opretstående ved opbevaring. Har du brug for at løfte **Birdie**^{EVO}, kan denne let adskilles i to dele uden brug af værktøj.

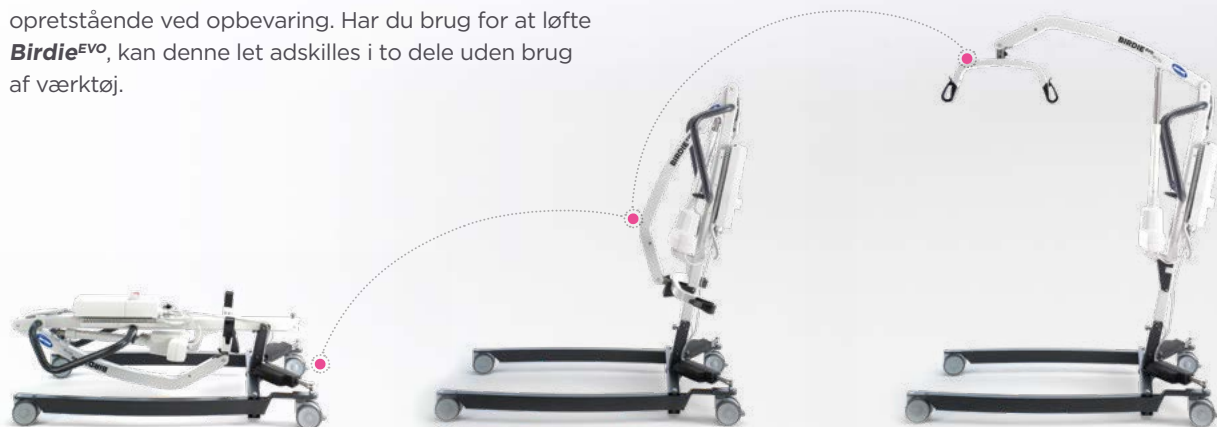

NYHED



SMARTLOCK®

- ▶ Hurtigere og sikker udskiftning af løfteåget, udføres med en praktisk og patenteret quick-release funktion.

Løftekroge

- ▶ Sikker montering af løftesejl med bløde og afrundede kanter på løftekroge, der beskytter hænder og sejlens løftestropper.



- ▶ Ergonomisk skubbebøjle sikrer kontrol og gode arbejdsstillinger.



- ▶ Løfteågets smarte og enkle design sikrer lettere øjenkontakt med brugeren og giver tryk under forflytningen.



- ▶ Understellets kurvede design sikrer let passage ved kørsel gennem døråbninger, og giver gode muligheder for, at understellet kan gå udenom brede kørestole eller toiletstole.

3 unikke fordele



◀ Sikkerhed Mere plads til brugeren

Det nye design på løfteåget giver øget sikkerhed og trygge forflytninger til glæde for både bruger og personale.



◀ SMARTLOCK® PATENTERET Enklere og mere sikkert låsesystem

Ny og patenteret SMARTLOCK funktion sikrer en let og enkel udskiftning af løfteåget uden brug af værktøj.




◀ Sejlmontering Hurtigt og intuitivt



De unikke kroge på løfteåget tilsikrer, at løftesejlet monteres sikkert hver gang. De afrundede hjørner på løfteåget beskytter personalets hænder og skåner endvidere stropperne på løftesejlet.

Tekniske data ▼

For mere information om dette produkt henvises til www.invacare.dk. For oplysninger om anvendelse se venligst brugervejledningen, der kan downloades på www.invacare.dk.

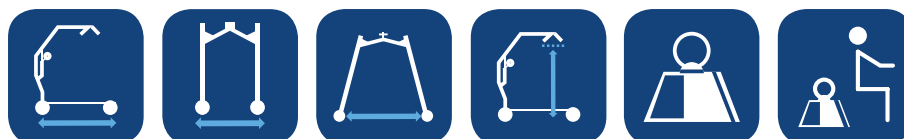

	Total længde ▼	Total bredde ▼	Indvendig bredde, åbne ben ▼	Løfteinterval ¹ ▼	Vægt ▼	Max. brugervægt ▼
Birdie^{EVO}	1220 mm	640 mm	1020 mm	415 - 1660 mm	40 kg	180 kg



	Højde ben ▼	Frihøjde ▼	Højde, sammenklappet ▼	Vend diameter ▼	Batterikapacitet * ▼
Birdie^{EVO}	115 mm	35 mm	455 mm	1400 mm	40 cyklusser

1. Som specialprodukt, mod merpris, er en løftehøjde på 1710 mm mulig

*Batteri opladet til 50-100%

Farve ▼



Lys grå:
Mast, bom og løfteåg
RAL: 7035



Antracitgrå:
Understel og skubbebøjle
RAL: 7016

Certifikater ▼



Tlf.: +45 36 90 00 00
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Søndre Ringvej 37
2605 Brøndby
Danmark



Yes, you can.®