

Birdie[®]EVO



Design otimizado para transferências seguras

SLOW'R[®] | SMARTLOCK[®] | GANCHOS COM NOVO DESIGN

INVACARE
Yes, you can.[®]

A evolução dos elevadores de transferência

A nossa nova família **Birdie^{Evo}** foi desenvolvida para oferecer várias opções, que conjugadas com novas tecnologias, proporcionam o máximo de conforto e segurança quando elevar ou transferir o utilizador de ou para a cama, cadeira ou até mesmo chão.

Baseada no reconhecido **Birdie**, a nova gama focada na visão do utilizador, engloba tudo o que era anteriormente valorizado no Birdie, enquanto traz novas características para melhorar a experiência do utilizador e do cuidador.

Abrangência em altura

O **Birdie^{Evo}** permite uma elevação ergonómica muito abrangente que possibilita que o utilizador seja mais facilmente rodado a 360° e transferido para a superfície de apoio. Facilita a tarefa do cuidador e tranquiliza o utilizador.

Espaço otimizado

O braço comprido e de amplitude elevada, assegura maior espaço para o utilizador, mesmo na posição mais alta. O espaço amplo em frente ao atuador reduz o contacto dos membros inferiores do utilizador com o elevador.



Fácil de usar, transportar e arrumar

A nossa nova família **Birdie^{Evo}** pode ser facilmente encartada e desencartada sem a necessidade de usar ferramentas. Os elevadores ocupam o mínimo de espaço quando arrumados e são fáceis de empurrar e transportar.

O **Birdie^{Evo Compact}** pesa apenas 31kg tornando-o ainda mais fácil de transportar e arrumar.



NOVO

OPÇÕES E CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS



Slow'R®

- ▶ Amortecedor integrado suaviza as descidas e minimiza o movimento de balanço. (opção)



SMARTLOCK®

- ▶ Sendo seguro e rígido, para além de estabilizar melhor o utilizador, este novo sistema de fixação é muito fiável. Possibilita a troca da barra com toda a segurança e rapidamente. (opção)



Design dos ganchos inovador

- ▶ Consegue-se montar a cesta na barra com uma só mão!
As fivelas da cesta ficam devidamente presas, oferecendo máxima segurança.

Outras características NOVAS



- ▶ Os punhos ergonómicos facilitam a condução e as manobras.



- ▶ O design curvilíneo do braço e da barra da cesta permite manter o contacto visual do cuidador com o utilizador durante todo o processo de transferência.



- ▶ O design ergonómico e curvo das pernas, permite chegar mais perto de poltronas ou cadeiras de rodas mais largas assim como oferece uma sensação de maior aconchego.



3 inovações chave

Do braço à barra de fixação da cesta

◀ **Slow'R®** PATENTEADO **Reduz o movimento de balanço**

Foi desenvolvido e integrado no braço um amortecedor para estabilizar o utilizador, oferecendo uma experiência mais tranquila e confortável para o utilizador. Permitindo ainda que o cuidador controle melhor o posicionamento do utilizador durante todo o processo de transferência. (Opcional em algumas versões)



◀ **SMARTLOCK®** PATENTEADO **Fixação da barra da cesta simples e segura**

O novo mecanismo de colocação e extração rápida possibilita a troca da barra de uma forma simples e segura, sem ferramentas. Um sistema de encaixe extremamente fiável assegura que ambas as partes da fixação fiquem bloqueadas uma na outra, aumentando ainda a estabilidade da barra. (Opcional em algumas versões)



◀ **Ganchos inovadores** **para colocação da cesta**

O novo design ergonómico do gancho permite que a fivela da cesta seja colocada com apenas uma mão. O gancho largo facilita a colocação das fivelas da cesta. O formato do gancho minuciosamente estudado, garante que as fivelas fiquem muito bem presas sem riscos de se soltarem da barra.

Apresentamos a família **Birdie^{EVO}**

A gama de elevadores desenvolvida sempre a pensar nos utilizadores e nos cuidadores.



Birdie^{EVO}

▲ O novo padrão dos elevadores

Versão melhorada do líder de mercado Birdie, desenvolvida para possibilitar transferências seguras, tanto em ambientes institucionais como domiciliários. Dobrável e com abertura de pernas manual. Disponível com barra de 4 pontos. Fornecido com cesta standard.

Birdie^{EVO COMPACT}

▲ Ocupa pouco espaço para facilitar as manobras

O tamanho reduzido do **Birdie^{EVO Compact}** permite executar manobras de forma fácil em espaços reduzidos. Dobrável e com abertura de pernas manual. Disponível com barra de cesta de 2 pontos ou 4 pontos. Fornecido com cesta standard.

Birdie^{EVO}

Versão premium

▲ Características superiores para funcionalidade melhorada

Os nossos modelos premium são dobráveis e incluem de série as características exclusivas Slow'R e SMARTLOCK. Estão disponíveis com ou sem abertura das pernas elétrica, com barra de cesta de 4 pontos. Fornecidos com cesta standard.

Birdie^{EVO XPLUS}

NOVIDADE

▲ Versão reforçada com uma capacidade de peso até 210kg. Ideal para uso intensivo.

Fornecido de série com Slow'R, SMARTLOCK, e abertura de pernas elétrica com motores tapados e controlador Jumbo care que é um sistema inteligente de monitorização de diversos parâmetros, é a solução ideal para ambientes hospitalares e institucionais. Fornecido sem cesta.

Reg. em altura	▶ 415 - 1660 mm	▶ 530 - 1590 mm	▶ 415 - 1660 mm	▶ 415 - 1660 mm
Peso max. utilizador	▶ 180 kg	▶ 150 kg	▶ 180 kg	▶ 210 kg
Raio de viragem	▶ 1400 mm	▶ 1070 mm	▶ 1400 mm	▶ 1430 mm


Opções e acessórios:

- ▶ Abertura das pernas elétrica ou manual
- ▶ Descida de emergência
- ▶ Barras de colocação da cesta com 2 ou 4 pontos em vários tamanhos
- ▶ Alavanca para abertura das pernas
- ▶ Balança para controlo de peso
- ▶ Vasta gama de cestas disponíveis em vários modelos, tecidos e tamanhos.



Dados técnicos ▼

Para mais informações sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o nosso website em www.invacare.pt

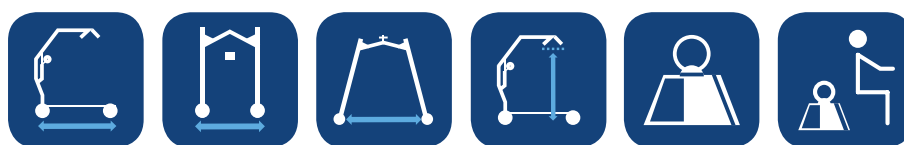

	Comprimento da base ▼	Largura da base ▼	Largura interior (pernas abertas) ▼	Regulação em altura ▼	Peso total ▼	Peso máximo de utilizador ▼
Birdie EVO	1220 mm	640 mm	1020 mm	415 - 1660 mm	40 kg	180 kg
Birdie EVO COMPACT	1080 mm	520 mm	815 mm	530 - 1590 mm	31 kg	150 kg
Birdie EVO PREMIUM	1235 mm	640 mm	1020 mm	415 - 1660 mm	41 kg	180 kg
Birdie EVO XPLUS	1280 mm	640 mm	1020 mm	415 - 1660 mm	41 kg	210 kg



	*Altura da base ▼	Distância do chão ▼	Altura quando encartado ▼	Raio de viragem ▼	Lifting speed ▼	**Capacidade da bateria ▼
Birdie EVO	115 mm	35 mm	455 mm	1400 mm	30 mm/s	40 ciclos
Birdie EVO COMPACT	115 mm	35 mm	455 mm	1070 mm	23 mm/s	40 ciclos
Birdie EVO PREMIUM	115 mm	35 mm	470 mm	1400 mm	40 mm/s	40 ciclos
Birdie EVO XPLUS	115 mm	35 mm	470 mm	1430 mm	40 mm/s	40 ciclos

Todas as medidas são tiradas com rodízios de 100 mm e barra de suporte de 2 pontos.

*+ 5 mm com proteção nas pernas
**Com a bateria entre os 100% e 50%

Cor do chassis ▼



Cinza claro:
mastro, braço e barra de colocação da cesta
RAL: 7035



Cinza antracite:
base (pernas) e pega
RAL: 7016

Atenção: as cores podem variar ligeiramente das cores acima apresentadas

Informação regulamentar ▼



Tlf.: 225193360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal



Yes, you can.®