

NordBed™ Ultra



ERGOMOVE™ TECHNOLOGIE | VALPREVENTIE | ONAFHANKELIJKHEID



Het innovatieve NordBed Ultra

Cliënten in een zorginstelling hebben een breed scala aan behoeften. Vooral diegenen die afhankelijk zijn van anderen en mensen met dementie. Voor hen is het NordBed Ultra de perfecte keuze, omdat dit bed gemakkelijk kan worden aangepast aan de behoeften van cliënten. Dit bed heeft daarnaast een huiselijke uitstraling, ideaal voor het creëren van een thuisgevoel binnen een zorginstelling. De geavanceerde ingebouwde auto-regressie vermindert schuifkrachten aanzienlijk wanneer de cliënt in zittende positie wordt gebracht. Het bevordert van de mobiliteit en zorg voor onafhankelijkheid, vooruitkijkend op de gebruikersbehoefte in de directe toekomst, zorgen ervoor dat het NordBed Ultra een goed zorgbed is voor zowel cliënten als zorgverleners.

ErgoMove technologie

Het Invacare NordBed Ultra beschikt over ErgoMove technologie om de cliënt comfortabel vanuit een liggende positie naar een actieve, zittende positie en weer terug te brengen met één druk op de knop. De actieve, zittende positie stimuleert de functies van de cliënt, zoals eten, drinken en lezen. Daarnaast zorgt het voor goede drukverdeling.

De volgorde van bewegen zorgt ervoor dat de draaipunten van de rug- en knieverstelling zo goed mogelijk overeenkomen met de natuurlijke draaipunten bij de heup en knieën van de cliënt. Zo blijft de cliënt in positie en schuift niet naar beneden in bed. In combinatie met de ingebouwde auto-regressie zorgt dit voor aanzienlijk minder schuifkrachten en een betere drukverdeling wanneer de cliënt in een zittende positie wordt gebracht. Deze intuïtieve eigenschap vermindert de noodzaak om cliënten te herpositioneren, wat minder handen aan het bed vereist. De geoptimaliseerde lengte van de secties van het inlegraam zijn vastgesteld naar antropometrische waarden, waardoor deze voor de meeste volwassenen geschikt zijn.

PATENT AANGEVRAAGD



Veiligheid, onafhankelijkheid en mobiliteit

Het NordBed Ultra heeft een laagste stand van slechts 25 cm:

- ▶ Meer veiligheid en minder risico voor mensen die de neiging hebben uit bed te vallen
- ▶ Voorkomt valverwondingen zonder het gebruik van zijhekken, wat een significant voordeel is voor mensen met dementie
- ▶ Vereenvoudigt het in en uit bed gaan van cliënten
- ▶ Zorgt ervoor dat ook kleine cliënten beide voeten veilig op de vloer kunnen plaatsen wanneer ze uit bed opstaan

Up-and-Out™

- ▶ Voor een veilige en soepele transfer en de ondersteuning van onafhankelijkheid en mobiliteit, kunnen cliënten de Up-and-Out functie met één druk op de knop activeren. De geprofileerde inlegraamsecties passen zich dan automatisch aan naar een goede positie om de transfer in en uit bed te ondersteunen met minimale schuifkrachten

Design

- ▶ Het NordBed Ultra is verkrijgbaar in verschillende, moderne stijlen, houten afwerking en gelakte delen. Afhankelijk van eisen en persoonlijke smaak kan het NordBed Ultra worden uitgerust met zijpanelen, zijhekken en meer



Perfect voor cliënten met dementie

- ▶ De lage transferhoogte biedt een veilige omgeving voor mobiele mensen
- ▶ Dit met vele opties uitgevoerde bed kan worden aangepast:
 - Om eruit te zien als een traditioneel bed
 - Om goed in een huiselijke omgeving te passen voor goede herkenning
 - Met een reeks zachte hoezen (hoge/lage textuur) voor een huiselijke vertrouwde en veilige omgeving
 - Verlichting onder het bed om het risico op verwondingen bij de cliënt te minimaliseren tijdens het in en uit bed stappen

4

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

1

ErgoMove technologie

- ▶ Brengt de cliënt naar een comfortabele zittende positie en weer terug naar een liggende positie zonder dat hij/zij geherpositioneerd hoeft te worden
- ▶ Vermindert schuiven

3

Up-and-Out

- ▶ Voor veilige en soepele transfers
- ▶ Ondersteunt het ergonomisch bewegen

2

25 cm laagste stand

- ▶ Met standaard wielen van 10 cm voor veilige transfers en vergrote valpreventie

4

Geoptimaliseerde lengte van de inlegraam secties

- ▶ Naar antropometrische waarden, voor extra comfort

Aanvullende eigenschappen

- ▶ **RememberMe™:**
 - Programmeerbare LCD handbediening
 - ErgoMove en Up-and-Out kunnen naar individuele behoeften worden aangepast
- ▶ **Geïntegreerde inlegraamverlenger**
 - 10 cm extra bij het hoofd- en voeteneind voor langere cliënten
- ▶ **Anti-Trendelenburg en Trendelenburg**
 - Ondersteunt zorgverleners bij het herpositioneren van de cliënt in bed
 - Eenvoudig om druk te verdelen
- ▶ **Verlichting onder het bed**
 - Eenvoudig om het licht aan te zetten
 - Valpreventie



Handbediening ▲

Eenvoudig te herkennen kleuren voor cliënten met verminderd zicht

- ▶ De belangrijkste knoppen, die het meest gebruikt worden, hebben duidelijk herkenbare kleuren. Deze kleuren zijn gekozen in samenwerking met experts
- ▶ Om een cliënt te ondersteunen bij het kiezen van een functie lichten alle knoppen op wanneer er een knop wordt ingedrukt. Dit zorgt voor eenvoudige herkenning overdag en 's nachts
- ▶ Voor een simpele selectie zijn de belangrijkste knoppen bovenaan de handbediening geplaatst en de verstellingseigenschappen zijn onder de up/down knoppen geplaatst
- ▶ De handbediening is standaard vergrendelbaar


Technische gegevens ▼

Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op onze Invacare-website.

	Buitenbreedte Binnenbreedte ▼	Buitenlengte Binnenlengte ▼	Hoogte- verstelling ▼	Afmetingen inlegraam ▼	Vrije ruimte onder het bed ▼	Heuphoek ▼
NordBed Ultra	100 / 90 cm	213 / 200 cm	25 - 85 cm	80-17-30-65 cm	15 cm	49°
	Beensteun- hoek ▼	Anti- Trendelenburg / Trendelenburg ▼	Max. gebr. gewicht ▼	Totaal gewicht (zonder beddeinden) ▼	Zwaarste onderdeel van het product ▼	Wasbaar in wasmachine ▼
NordBed Ultra	19°	+/- 15°	200 kg	105 kg	55 kg	Ja

NB: Het bed moet niet gebruikt worden voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar of bij cliënten bij wie lichaamsafmetingen kleiner zijn dan een gemiddeld iemand van 12 jaar oud.

Frame kleur ▼

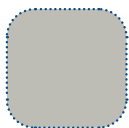

Grijs
aluminium

Houtwerk ▼



Beuken



Eiken



Omber



Beuken /
Blauw



Blauw



Wit

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland