


- Ausgezeichnetes Fahrgefühl, exzellente Manövrierbarkeit und ein stilvolles Aussehen
- Ein Maximum an Stabilität und Sicherheit bietet die **Stability Lock** Funktion, dank der alle sechs Räder trotz unebenem Untergrund auf dem Boden bleiben
- Patentierte **SureStep**® Technologie ermöglicht ein sanftes Überfahren anspruchsvoller Wegstrecken

Extrem enger Wenderadius

- Dank des Zentralradantriebs ist ein unglaublich enger Wenderadius möglich
- Sorgt für ausgezeichnete Wendigkeit und ein intuitives Fahrerlebnis

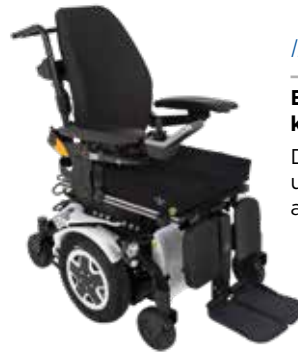

Invacare **TDX SP2 NB**

Besonders schmal und kompakt

Der **Invacare TDX SP2 NB** ist um vier Zentimeter schmaler als der **TDX SP2**.

Optionen und Merkmale



SureStep® und Stability Lock

Die patentierten Technologien **SureStep**® und **Stability Lock** ermöglichen das besonders sanfte und sichere Befahren anspruchsvoller Wegstrecken. Hindernisse - auch an Steigungen - lassen sich leichter überwinden.



Dahl-Docking-Station

Der **TDX SP2** ermöglicht den Anbau einer Dahl-Dockingstation. Sie sorgt für sicheren Halt während der Fahrt und beim Transport.



Zentrale, elektrische LNX-Beinstütze

Die zentrale Beinstütze ermöglicht eine aktive Sitzposition. Die Beine können im 90°-Winkel positioniert werden.



Elektrische Rückenlehne

Diese Option ermöglicht durch einen hohen Drehpunkt eine natürliche Bewegung. Der Schnellverschluss erlaubt ein schnelles Abklappen für den Transport.

Optionen und Merkmale



Elektrische Sitzwinkelverstellung mit Schwerpunktverlagerung

Ein max. Sitzwinkel von 30° bewirkt eine angenehme und sichere Sitzposition sowie eine Verlagerung des Schwerpunktes.



Sitzlifter

Der Sitzlifter ermöglicht eine angenehmere Kommunikation mit Mitmenschen und verbessert den Zugang zu höher gelegenen Gegenständen. Zugleich eignet er sich temporär für die druckentlastende und entspannte Positionierung.



Teleskopierbarer Sitzrahmen

Dünn profilierte Rohre innerhalb des Sitzrahmens sorgen für eine möglichst niedrige Sitzhöhe - sowohl bei der Ausführung mit Sitzwinkelverstellung als auch bei der Sitzwinkelverstellung in Kombination mit einem Sitzlifter.

Technische Daten

	Sitzbreite	Sitztiefe	Rückenlehnenhöhe	Gesamthöhe	Rückenlehnenwinkel	Armlehnenhöhe	Gesamtgewicht	Sitzhöhe
Modulite™ Teleskopierbarer Sitzrahmen	380 - 530 mm ¹	410 - 510 mm 510 - 560 mm	480, 540, 560 mm ⁵	1010 - 1170 mm ¹¹	90° - 120°	245 - 360 mm ⁶	154 kg ¹¹ 138 kg (NB)	450 / 475 mm ² 475 - 775 mm ⁴
Max-Sitz*	490 - 610 mm ¹	560 / 600 / 630 mm	570 - 680 mm ^{5, 11}	1100 - 1125 mm ¹¹	90° - 115°	250 - 340 mm 290 - 380 mm	154 kg ¹¹	470 / 495 mm ²

	Länge der Fußstützen	Winkel	Gesamtbreite	Gesamtlänge inkl. Fußstützen	Gesamtlänge ohne Fußstützen	Max. Benutzergewicht	Batteriekapazität	Wendekreis
Modulite™ Teleskopierbarer Sitzrahmen	290 - 460 mm ⁷	0 - 20° / 0 - 30° ^{3, 4}	650 mm ⁹ 610 mm (NB)	1160 mm ⁹	980 mm	180 kg / 160 kg ³ 150 kg (NB)	73.5 Ah (C20) 50 Ah (NB)	1120 mm
Max-Sitz*	290 - 460 mm ⁷	0 - 20° ³	650 mm ⁹	1240 mm ⁹	970 mm	180 kg / 160 kg ⁵	73.5 Ah (C20)	1120 mm

Überwindbare Bordsteinhöhe	Max. sichere Neigung	Motorleistung	Geschwindigkeit	Reichweite
75 mm	9° / 16 %	2 x 324 W	6 / 10 km/h	bis zu 31 km ¹² bis zu 26 km (NB) ¹²

- + weitere 50 mm über die Seitenteile
 - Gemessen ohne Sitzkissen
 - Mit Sitzlifter oder elektr. Sitzwinkelverstellung 30°
 - Mit Sitzlifter
 - Gemessen ab der Sitzplatte
 - Abhängig von gewählter Armlehnenausführung
 - Gemessen von der Fußplatte bis zur Sitzplatte
 - Abhängig von gewählter Beinstützensausführung
 - Abhängig von der Sitzposition
 - Fahrwerk
 - Variiert je nach Konfiguration
 - Gemäß ISO 7176-4:2008
 - Invacare **Modulite™** Sitzkomponenten sind Cross-Kompatibel innerhalb der Invacare Elektro-Rollstühle und teilweise innerhalb der Invacare Rea® Familie.
- * Max Sitz nur für **TDX SP2**, nicht für **TDX SP2 NB**



Farben für Gehäuse-Abdeckung



HMV-Nr. TDX SP2:
 ohne Lichtanlage: 18.46.05.0018
 mit Lichtanlage: 18.50.04.0172
 mit Sitzlifter: 18.99.06.1090

HMV-Nr. TDX SP2^{NB}:
 ohne Lichtanlage: 18.46.05.0019
 mit Lichtanlage: 18.50.04.0177
 mit Sitzlifter: 18.99.06.1092